



Fod- og fodledsortoser

www.camp.dk



Albue- og hælbeskytter Heelbo

Elastisk strømpe med trykafastende, udtagelig gelplade der beskytter huden og forebygger tryksår.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Omkreds ankel	Pakn./par
53600	Gul	Small	15-20 cm	1 par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	1 par
53600	Hvid	Large	25-30 cm	1 par
53600	Grøn	X-Large	>30 cm	1 par



Vristbandage

En fodledsstøtte i kraftigt elastisk materiale med velcrolukning, der giver let støtte. Påsættes som et 8-tal omkring fod og vrist.

Anvendelsesområde: Let fodledsinstabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds ankel
28632	Beige	Bilat.	Small	20-23 cm
28632	Beige	Bilat.	Medium	23-26 cm
28632	Beige	Bilat.	Large	26-29 cm
28632	Beige	Bilat.	X-Large	30-33 cm



ELCROSS® Ankel

Smidig blød fodledsstøtte i bomuld og lycra, formet som en strømpe, hvilket giver en jævn kompression. Det integrerede elastiske bånd løfter fodens lateralside for at mindske risikoen for forstuvning. Let at tage på.

Anvendelsesområde: Lettere fodledsinstabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds ankel
28181	Blå	Bilat.	Small	20-25 cm
28181	Blå	Bilat.	Large	25-30 cm




ASO® Fodledsortose

Stabil fodledsortose med lav profil og stabiliserende snøring fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner tapning og hindrer foden i at supinere. Båndene justeres afhængig af skadens omfang. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillessenen.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet og forebyggende ved idrætsudøvelse.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Vristmål
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	XX-Small	22,5-25 cm
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm
28188	Sort	Uden skinner	Bilat.	XXX-Large	>40 cm

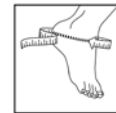



ASO® fodledsortose med skinner

Stabil fodledsortose med lav profil og udtagelige plastskinner både medialt- og lateralt og stabiliserende snøring fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner tapning og hindrer foden i at supinere. Båndene justeres afhængig af skadens omfang. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillessenen.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet og forebyggende ved idrætsudøvelse.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Vristmål
28185	Hvid	Med skinner	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28185	Hvid	Med skinner	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28185	Hvid	Med skinner	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28185	Hvid	Med skinner	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28185	Hvid	Med skinner	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28185	Hvid	Med skinner	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm
28186	Sort	Med skinner	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28186	Sort	Med skinner	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28186	Sort	Med skinner	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28186	Sort	Med skinner	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28186	Sort	Med skinner	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28186	Sort	Med skinner	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm

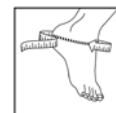

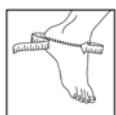

ASO®EVO™

Stabil fodledsortose med lav profil og stabiliserende snøring fortil. De uelastiske nylonbåndes placering efterligner taping og hindrer foden i at supinere/pronere. På ASO EVO giver nylonbåndene omkring calcaneus en større modstand mod inversion/eversion af calcaneus, end standard ASO. Den øverste del er forstærket med en plastmanchet og derved forbedres beskyttelsen mod høje forstuvninger i fodledet. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillessenen.

Anvendelsesområde: Akut- eller langvarig fodledsinstabilitet, præventivt ved idrætsudøvelse, høje forstuvninger i fodledet og subtalarleds-instabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Vristmål
28189	Sort	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28189	Sort	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28189	Sort	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28189	Sort	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28189	Sort	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28189	Sort	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm



Ankelortose Stabil Soft

Stabil fodledsortose med enkle cirkulære bånd. Sidestøtter af Polypropylene er anatomisk formede. Indermateriale af T-foam/skumplast der former sig og følger underbenets kontur. Ortosen skal anvendes sammen med en stabil sko.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
28184	Sort	Bilat.	One Size



KoolAir ankel

En ankelortose der yder immobilisering, køler og giver kompression for at reducere hævelse efter akut fodledsdistorsion. Ortosen har luftfyldte puder til at give kompression samt aftagelige gelpuder der kan anvendes som kuldeterapi på leddet. Ortosen har bånd til enkel justering af ankelbredden. Lav profil bevirker at ortosen passer i de fleste sko.

Anvendelsesområde: Akutte fodledsdistorsioner.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
45825	Hvid	Bilat.	One Size
45826	Ekstra bånd		One Size

Strassburg Sock

Smidig strømpe der anvendes om natten til behandling af Plantarfasciit. Strækker aktivt plantarfascian og bevarer den opheling der sker i løbet af natten. Strømpen trækkes på og lukkes et par centimeter under knæleddet. Derefter spændes båndet der går fra tærne og op foran skinnebenet.

Anvendelsesområde: Plantarfasciit/inflammation i senetilhæftningen.

Kontraindikation: Strømpen bør ikke anvendes af personer med nogen former for hævelser eller cirkulationsproblemer.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds læg
28638	Hvid	Bilat.	Barn	<20 cm
28638	Hvid	Bilat.	Regular	20-40 cm
28638	Hvid	Bilat.	Large	40-52 cm



BEBAX forfodsorthose

Fodorthose i skind beregnet til kongenitale fejlstillinger i forfoden. På undersiden mellem forfod og hæl er et led, der gør det muligt at justere vinklen på forfoden. Orthosen har lav vægt, blød polstring og er let at tage på og af. Størrelser f.o.m. 10 ½ har et vristbånd, der holder hælen på plads. Orthosen er ikke beregnet til at gå på.

Anvendelsesområde: Kongenitale fejlstillinger i forfoden.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Indersålens længde
28637	Hvid	Ve/Hø	7,5 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	8 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	8,5 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	9 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	9,5 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	10 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	10,5 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	11,5 cm
28637	Hvidv	Ve/Hø	12,5 cm
28637	Hvid	Ve/Hø	13,5 cm





PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) er udviklet for at aflaste hæl og hælsår ved sengeleje og ved kortere forflytning. Ortosen holder foden i neutralleje ved sengeleje og bibeholder dorsal- og plantarfleksion ved forflytning. Justerbar skinne modvirker inad- og udadrotation ved sengeleje. Regulerbar fod-, tå- og lægdel.

Anvendelsesområde: Velegnet ved fx. diabetessår og tryksår.

Øvrigt: Let at tage polstringen ud ved vask.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse
71100	Sort	PRAFO Standard	Bilat.	One Size
71110	Sort	Ekstra polstring		One Size
71120	Sort	Ekstra bånd		



Boston Soft AFO

Ankel- og fodortose i rigid plast foret med en blød foam. Beregnet til at forbedre positionering af fod og fodled samt reducere spasticitet. Ortosen har en indbygget hælbeskytter for at lette heling af hælsår. Boston Soft AFO findes i to udførelser med eller uden antirotationsskinne (stabilizer). Den er let at rengøre og kan trimmes med en saks.

Anvendelsesområde: Rygmarvsbrok, muskeldystrofi, CP, traume og hælsår.

Øvrigt: Stabilizer vedrører anti-rotationsskinne.

Art.nr.	Størrelse	Model	Ve/Hø	Skostørrelse	Pakn./Stk.
71151	Barn 1	Uden stabilizer	Bilat.	19-20	1
71151	Barn 2	Uden stabilizer	Bilat.	21-22	1
71151	Barn 3	Uden stabilizer	Bilat.	23-24	1
71151	Barn 4	Uden stabilizer	Bilat.	25-26	1
71151	Barn 5	Uden stabilizer	Bilat.	27-29	1
71151	Barn 6	Uden stabilizer	Bilat.	30-31	1
71151	Voksen A	Uden stabilizer	Bilat.	32-34	1
71151	Voksen B	Uden stabilizer	Bilat.	35-36	1
71151	Voksen C	Uden stabilizer	Bilat.	37-39	1
71151	Voksen D	Uden stabilizer	Bilat.	40-41	1
71151	Voksen E	Uden stabilizer	Bilat.	42-44	1
71151	Voksen F	Uden stabilizer	Bilat.	45-46	1
71152	Stabiliserings- skinne	Beregnet til 71151		One Size	1

Tibia frakturortose

Præfabrikeret røntgengennemtrængelig tibiaortose til tibiale skaffrakturer. Ortoosen bygger på Samiento-metoden. Ortoosen kan justeres med varmluftpistol, har enkel velcrolukning med plastringe og foddelen kan justeres i højden. Ortoosen er blødt polstret og to bomuldsinderstrømper medfølger.

Anvendelsesområde: Skaffrakturer på tibia.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds læg	Længde underben
71290	Hvid	Ve/Hø	Small	30-35 cm	39-46 cm
71290	Hvid	Ve/Hø	Medium	35-42 cm	42-48 cm
71290	Hvid	Ve/Hø	Large	41-48 cm	47-53 cm



ToeOFF[®]-familien



ToeOFF[®]-familien er en unik serie produkter inden for området af dorsal-ekstensortoser (dropfodsoroser). Produktudvikling og fremstilling sker i Sverige. ToeOFF, der var den første præfabrikerede kulfiberortose til dropfod, har siden 1997 erobret verden.

Produktets dynamiske funktion, åbne design i kombination med støtte på forsiden af benet, bevirker at ToeOFF-familien adskiller sig markant fra andre præfabrikerede AFO produkter på markedet.

Den bløde hæl sætning, stabiliteten i ståfasen og den dynamiske tåafvikling giver patienten øget funktion og et naturligt gangmønster.

Produktets sammensætning af glasfiber, kevlar og kulfiber giver en meget lav vægt, hvilket er af stor betydning for patienten.

ToeOFF-familien består af tre forskellige modeller, der alle har forskellige dynamiske egenskaber, ikke bare mellem modellerne, men også imellem hvert produkts forskellige størrelser:

Ypsilon = Til lettere dropfod

ToeOFF = Standardortosen

BlueRocker = Til svære tilfælde af dropfod

Yderligere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i ToeOFF Clinical Manual.

PATIENTENS
STABILITET
UDEN ORTOSE



PRODUKTETS
STABILITET



NAVIGAIT

NAVIGAIT er en ortose der er udviklet for at hjælpe personer med mild drop-fod til bedre dorsalfleksion. Den polstrede ortose-plastdel sidder behageligt mod benets forside og har en aftagelig vaskbar polstring. Graden af dorsalfleksion justeres ved krogens placering i snøringen samt ved justering af den øvre del af båndet. Det smidige design gør den usynlig under lange bukser. NAVIGAIT findes i to størrelser. Plastdelen kan ved behov trimmes en del i over- og underkant.

Anvendelsesområde: NAVIGAIT er beregnet til at støtte en fod når muligheden for aktiv dorsalfleksion er reduceret som følge af neurologiske tilstande såsom som Stroke, MS eller Post- polio syndrom.

Kontraindikationer: NAVIGAIT skal ikke anvendes af personer der udviser spasticitet eller har kraftige ødemer.

Øvrigt: NAVIGAIT adresserer ikke fejlstillinger i foden og deformiteter, disse skal behandles af sko og/eller indlæg efter behov.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Plastdelens længde
28410	Bilat.	Small/Medium	27,5 cm
28410	Bilat.	Large/X-Large	31,5 cm
28412	Ekstra bånd med krog	Small/Medium	
28412	Ekstra bånd med krog	Large/X-Large	
28413	Kraftigere gummibånd	Small/Medium	
28413	Kraftigere gummibånd	Large/X-Large	



NAVIGAIT 4-Foot

NAVIGAIT 4-Foot er et produkt beregnet til anvendelse sammen med NAVIGAIT ved de tilfælde hvor brugeren ikke anvender sko. Produktet kan også anvendes i sandaler hvor der ikke findes noget at fæste krogen i. NAVIGAIT 4-Foot skal sidde på forfoden. Kombinationen af elastiske og rigide materialer med en silikonekant på indersiden bevirker at den sidder sikkert på plads.

Anvendelsesområde: Anvendes sammen med NAVIGAIT i de tilfælde hvor brugeren ikke anvender sko.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse
28415	Bilat.	Small
28415	Bilat.	Large



NYHED!





Ypsilon™

Ypsilon™ er den mest fleksible dropfodsorthose i ToeOFF-familien. Den har en åben konstruktion, der giver plads over vristen og hindrer tryk mod tibiakammen. Polstringen på Ypsilon består af tre dele. Overtrækket trækkes over de to små vinger med velcrosiden indad. Den ovale polstrede pelotte sættes derefter på overtrækket. Dette giver en polstring der ikke kun er behagelig, men også følger benets bevægelser. Det bløde bånd fikserer ortosen til benet.

Anvendelsesområde: Dropfod med stabil ankel i kombination med ingen eller mild spasticitet. Patienter der behøver mere fleksibilitet og mindre støtte.

Kontraindikationer: Kraftige ødemer, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i ToeOFF Clinical Manual. Ypsilon leveres med komplet bånd sæt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Sko-størrelse	Fodpladens længde	Højde
28400	Sort	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	33 cm
28400	Sort	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	34 cm
28400	Sort	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	35 cm
28402	Ekstra bånd/polstring	Bilat.	Small-Large			

ToeOFF®

ToeOFF® er den originale og mest anvendte dropfodsorthose i ToeOFF-familien. Vores standardorthose passer til mange forskellige indikationer og patienttyper. Orthosen forbedrer gangen for patienter med dropfod ved at holde foden oppe i svingfasen, give blød hæl-sætning og en stabil ståfase samt tåafvikling. ToeOFF kan med fordel også anvendes ved delfodsamputationer. Skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen eller middel spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og delfodsamputationer.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i ToeOFF Clinical Manual. Alle ToeOFF leveres med komplet båndset. På ToeOFF m velcro er den hårde velcro limet på orthosen.

Art.nr.	Model	Ve/Hø	Størrelse	Sko-størrelse	Fodpladens længde	Højde
28370	ToeOFF	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28370	ToeOFF	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28370	ToeOFF	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28370	ToeOFF	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	43 cm
28370	ToeOFF	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28375	ToeOFF m velcro	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28375	ToeOFF m velcro	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28375	ToeOFF m velcro	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28375	ToeOFF m velcro	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	43 cm
28375	ToeOFF m velcro	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28371	Ekstra bånd til ToeOFF		X-Small/Small			
28371	Ekstra bånd til ToeOFF		Medium/Large/X-Large			
28377	Ekstra bånd til ToeOFF m velcro		X-Small/Small			
28377	Ekstra bånd til ToeOFF m velcro		Medium/Large/X-Large			



COMBO



Lårdel set fra
medialsiden

Multicentrisk led

Hyperekstensjonskryds

Spænde og justering til
hyperekstensjonskryds

Koblingsdel mod
ToeOFF eller
BlueRocker

ToeOFF eller
BlueRocker



Smidig og unik ortoseløsning ved hyperekstension i kombination med dropfod.

ToeOFF har i mange år bevist sit værd både i rehabiliteringsprocessen men også i det daglige liv og har hjulpet mange brugere med dropfod til en bedre gang og øget livskvalitet. ToeOFF er sommetider blevet kombineret med knæortoser for at modvirke overstrækning i knæleddet. Nu findes en ortoseløsning til dette, der kombineres direkte med ToeOFF eller BlueRocker.

Combo-ortosen tilpasses individuelt til hver patient. De forskellige komponenter kan kombineres afhængig af patientens størrelse og længde.

- Valg af størrelse på lårdelen er afhængig af hvor højt oppe på låret denne placeres. Den kan dog ikke placeres lavere end ca. 10 cm over Tibia plateauet.
- Valg af størrelse for koblingsdelen er afhængig af hvilken størrelse ToeOFF eller BlueRocker der anvendes
- Valg af størrelse på hyperekstensjonskrydset bestemmes af knæbredden.
- Samtlige 5 artikler skal bestilles for at få en komplet ortose.
- Combo er ikke beregnet til patienter med vægt >150 kg, højde >2 m.

ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del specielt udviklet til behandling af hyperekstension i kombination med dropfod. Combo er en forlængelse der monteres på en ToeOFF eller BlueRocker. Den unikke konstruktion bevirker at dropfodsskinen og Combo-delen let kan sammenkobles.

Anvendelsesområde: Knæledsinstabilitet, hyperekstension i kombination med dropfod som følge af stroke, post-polio, Ms, neuropati etc. Patientvægt max 150 kg. Patientens højde max. 2 m.

Kontraindikationer: Total bortfald af ligament i knæet. Overstrækning > 10



Øvrigt: Knæmål 1: Mål M-L midt-patella,

Knæmål 2: Omkreds 20 cm over patella, Knæmål 3:

Mål M-L 20 cm over patella.

Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 1	Knæmål 2	Knæmål 3
28780	Knæled m. skinner	One Size	Bilat.			
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28789	Lårdel startkit					
28782	Bånd, tekstil og spænder	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	Softkit (2 stk)	Small	Bilat.			
28783	Softkit (2 stk)	Medium	Bilat.			
28783	Softkit (2 stk)	Large	Bilat.			
28783	Softkit (2 stk)	X-Large	Bilat.			
28784	Tibiakobling	Small	Bilat.			
28784	Tibiakobling	Medium	Bilat.			
28784	Tibiakobling	Large/X-Large	Bilat.			



Custom AFO Standard/Rigid

I de tilfælde hvor hælhøjde, fasthed mm overskrider visse fastsatte kriterier ifølge ToeOFF/BlueRocker-Custom bliver produktet specielt tilpasset og benævnes da Custom AFO Standard eller Custom AFO Rigid. Bestillingen kan gøres på forskellige måder; scanning foretaget i Vorum-systemet, positiv gips, negativ gips, eller efter mål. Ud fra patientinformationen fremstilles en ortose der følger de gængse ToeOFF/BlueRocker former og egenskaber.

Anvendelsesområde: Se Toeoff og BlueRocker.

Kontraindikationer: Se ToeOFF og BlueRocker

Øvrigt: Kontakt kundeservice for blanketter og fremgangsmåde for bestilling af en specielt tilpasset Custom AFO Standard/Rigid.

Art.nr.	Model	Model	Tilvalg
28460/ 28480	Custom AFO Standard	Grundpris	
28464/ 28483	Custom AFO Standard	Fodpladens bredde	Modsvarende 1 str større eller 1 str mindre
28464/ 28484	Custom AFO Standard	Hælhøjde	5,10,20,25mm, >25mm
28465/ 28485	Custom AFO Standard	Aflastning af tibiakammen	3,5 mm, individuelt mål
28466/ 28486	Custom AFO Standard	Individuel aflastning	
28467/ 28487	Custom AFO Standard	Tålyft/hælhøjde	5 mm tålyft/5 mm hælhøjde eller 10 mm tålyft/10 mm hælhøjde
28468/ 28488	Custom AFO Standard	Fleksibilitet A-P	Mindre fleksibel modsvarende 1 eller 2 str større
28468-3/ 28488-3	Custom AFO Standard	Fleksibilitet A-P	Standard forfod mindre fleksibel hæl modsvarende 1 str større
28468-4/ 28488-4	Custom AFO Standard	Fleksibilitet A-P	Standard hæl mindre fleksibel forfod modsvarende 1 str større
28469/ 28489	Custom AFO Standard	Fleksibilitet A-P	Mere fleksibel modsvarende 1 eller 2 større mindre
28469-3/ 28489-3	Custom AFO Standard	Fleksibilitet A-P	Standard forfod, mere fleksibel hæl modsvarende 1 str mindre
28469-4/ 28489-4	Custom AFO Standard	Fleksibilitet A-P	Standard hæl, mere fleksibel forfod modsvarende 1 str mindre
28470/ 28490	Custom AFO Standard	Sidestabilitet M-L	Mindre fleksibel modsvarende 1 eller 2 str større
28471/ 28491	Custom AFO Standard	Sidestabilitet M-L	Mere fleksibel modsvarende 1 eller 2 str mindre
28472/ 28492	Custom AFO Standard	Fantasy-overflade	Beige, sort, blå, lilla
28473/ 28493	Custom AFO Standard	Aflastning til fodryggen	Høj vrist

ToeOFF/BlueRocker Custom

I de tilfælde hvor ToeOFF og BlueRocker ikke svarer til din patients behov kan man specialbestille en individuelt tilpasset ToeOFF-Custom eller BlueRocker-Custom. Bestillingen kan gøres på forskellige måder, scanning voretaget i Vorum-systemet, positiv gips, negativ gips eller efter mål. Ud fra informationer om patienten fremstilles en ortose der følger de gængse former og egenskaber for ToeOFF/BlueRocker.

Anvendelsesområde: Se ToeOFF og BlueRocker.

Kontraindikationer: Se ToeOFF og BlueRocker

Øvrigt: Kontakt kundeservice for yderligere information om blanketter og fremgangsmåde for bestilling af en individuelt fremstillet ToeOFF- eller BlueRocker- Custom ortose.

Art.nr.	Model	Model	Tilvalg
28420	ToeOFF custom	Grundpris	
28423	ToeOFF custom	Fodpladens bredde	Modsvarende 1 str. større eller 1 str. mindre
28424	ToeOFF custom	Hælhøjde	5, 10, 15, 20, 25 mm
28425	ToeOFF custom	Aflastning af tibiakammen	3,5 mm, individuelt mål
28426	ToeOFF Custom	Individuel aflastning	
28428	ToeOFF custom	Fleksibilitet A-P	Mindre fleksibel modsvarende 1 eller 2 str. større
28429	ToeOFF custom	Fleksibilitet A-P	Mere fleksibel, modsvarende 1 eller 2 str. mindre
28430	ToeOFF custom	Sidestabilitet M-L	Mere stabil modsvarende 1 eller 2 str. større
28431	ToeOFF custom	Sidestabilitet M-L	Mindre stabil, modsvarende 1 eller 2 str. mindre
28432	ToeOFF custom	Fantasy overflade	Beige, sort, blå, lilla
28440	BlueRocker custom	Grundpris	
28443	BlueRocker custom	Fodpladens bredde	Modsvarende 1 str. større eller 1 str. mindre
28444	BlueRocker custom	Hælhøjde	5, 10, 20, 25 mm
28445	BlueRocker custom	Aflastning af tibiakammen	3,5 mm, individuelt mål
28446	BlueRocker custom	Individuel aflastning	
28448	BlueRocker custom	Fleksibilitet A-P	Mindre fleksibel modsvarende 1 eller 2 str. større
28449	BlueRocker custom	Fleksibilitet A-P	Mere fleksibel, modsvarende 1 eller 2 str. mindre
28450	BlueRocker custom	Sidestabilitet M-L	Mindre stabil, modsvarende 1 eller 2 str. mindre
28451	BlueRocker custom	Sidestabilitet M-L	Mindre stabil, modsvarende 1 eller 2 str. mindre
28452	BlueRocker custom	Fantasy overflade	Beige, sort, blå, lilla





BlueRocker™

BlueRocker™ er den mest rigide og stabile dropfodsorthose i ToeOFF-familien. Gennem produktets øgede stabilitet (sammenlignet med Ypsilon og ToeOFF) forbedres både balance og holdning, samtidig med at ortosen giver større sikkerhed for patienter der også har svaghed i lårmuskler. BlueRocker er først og fremmest udviklet til patienter med mere omfattende problemer. BlueRocker kan med fordel også anvendes ved delfodsamputationer. Skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med ingen eller op til svær spasticitet, nedsat knæ- og hoftekontrol, svaghed eller funktionssvigt i benmuskulatur, nedsat balance, bilaterale patienter og delfodsamputation

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår og meget nedsat sensibilitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i ToeOFF Clinical Manual. BlueRocker leveres med komplet bånd sæt. Det hårde velcrobånd er limet på ortosen.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Sko-størrelse	Fodpladens længde	Højde
28405	Blå	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28405	Blå	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28405	Blå	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28405	Blå	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	43 cm
28405	Blå	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28377	Ekstra bånd		X-Small/Small			
28377	Ekstra bånd		Medium/Large/X-Large			



Ypsilon™ afprøvningsorthose

Ypsilon™ afprøvningsorthose er en Ypsilon-orthose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af orthose.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Skostørrelse	Fodpladens længde	Højde
28401	Sort	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	33 cm
28401	Sort	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	34 cm
28401	Sort	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	35 cm

ToeOFF® afprøvningsortose

ToeOFF® afprøvningsortose er en ToeOFF-ortose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Skostørrelse	Fodpladens længde	Højde
28385	Sort	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28385	Sort	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28385	Sort	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28385	Sort	Ve/Hø	Large	42-45	27cm	43 cm
28385	Sort	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm



ToeOFF® afprøvnings sæt

ToeOFF® afprøvnings sæt indeholder 6 polstrede ToeOFF afprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af individuel ortose.

Art.nr.	Farve	Pakn.
28386	Sort	6 styk





BlueRocker™ afprøvningsortose

BlueRocker™ afprøvningsortose er en BlueRocker-ortose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Skostørrelse	Fodpladens længde	Højde
28406	Blå	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28406	Blå	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28406	Blå	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28406	Blå	Ve/Hø	Large	42-45	27cm	43 cm
28406	Blå	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm



BlueRocker™ afprøvningsæt

BlueRocker™ afprøvningsæt indeholder 6 polstrede BlueRocker™ Afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af individuel ortose.

Art.nr.	Farve	Pakn.
28387	Sort	6

NYHED!

ToeOFF® Fantasy

ToeOFF® Fantasy er samme produkt som ToeOFF originalortose, i farverne beige, lilla, mørkeblå og sort. Ortosen er beklædt med et blankt, friktionsfrit materiale der får tøjet til at glide lettere udenpå. Skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen eller middel spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og delfodsamputationer.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i ToeOFF Clinical Manual.



Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Sko-størrelse	Fodpladens længde	Højde
28360	Sort	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28360	Sort	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28360	Sort	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28360	Sort	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	43 cm
28360	Sort	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28361	Mørkeblå	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28361	Mørkeblå	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28361	Mørkeblå	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28361	Mørkeblå	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	43 cm
28361	Mørkeblå	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28362	Beige	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28362	Beige	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28362	Beige	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28362	Beige	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	43 cm
28362	Beige	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28363	Lilla	Ve/Hø	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28363	Lilla	Ve/Hø	Small	35-38	23 cm	38 cm
28363	Lilla	Ve/Hø	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28363	Lilla	Ve/Hø	Large	42-45	27 cm	43 cm
28363	Lilla	Ve/Hø	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28377	Ekstra bånd sort		X-Small/Small			
28377	Ekstra bånd sort		Medium/ Large/X-Large			
28364	Ekstra bånd beige		X-Small/Small			
28364	Ekstra bånd beige		Medium/ Large/X-Large			



ToeOFF® kort

ToeOFF® kort er en specialmodel der har kortere tibiadel, bredere fodplade over metatarsalledene, lavere tåspring og lavere hælhøjde end ToeOFF originalortose. Skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen eller middel spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og delfodsamputationer.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i ToeOFF Clinical Manual.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Sko-størrelse	Fodpladens længde	Højde
28380	Sort	Ve/Hø	Small	32-35	21,5 cm	29,5 cm
28380	Sort	Ve/Hø	Medium	35-38	23,5 cm	32 cm
28380	Sort	Ve/Hø	Large	38-42	25,5 cm	34 cm
28377	Ekstra bånd		X-Small/Small			
28377	Ekstra bånd		Medium/Large/X-Large			



softKIT™

SoftKIT™ er en behagelig og smidig polstring beregnet til ToeOFF, BlueRocker og Fantasy. Tibiakammen kan let aflastes ved at anvende de medfølgende neoprenstave mellem ortose og polstring. Hver pakning indeholder to polstringer, to neoprenstave og selvhæftende Mikrofix.


Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
28390	Sort	Til ToeOFF, Fantasy, BlueRocker	X-Small- Large/X-Large
28391	Sort	Til ToeOFF kort	Small-Large
28396	Sort	Ekstra Mikrofix til softKIT	X-Small/Small
28396	Sort	Ekstra Mikrofix til softKIT	Medium/Large/X-Large
28395	Sort	Ekstra Neoprenstave	X-Small/Small
28395	Sort	Ekstra Neoprenstave	Medium/Large/X-Large

softKIT Beige

SoftKIT Beige er en behagelig og smidig polstring først og fremmest beregnet til Fantasy Ivory, men kan desuden også anvendes til ToeOFF og BlueRocker.

Tibiakammen kan enkelt aflastes ved at anvende neoprenstavene mellem ortose og polstring. Hver pakning indeholder to polstringer, to neoprenstave og selvhæftende Microfix.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
28365	Beige	Til Fantasy Ivory, ToeOFF, BlueRocker	X-Small
28365	Beige	Til Fantasy Ivory, ToeOFF, BlueRocker	Small
28365	Beige	Til Fantasy Ivory, ToeOFF, BlueRocker	Medium
28365	Beige	Til Fantasy Ivory, ToeOFF, BlueRocker	Large

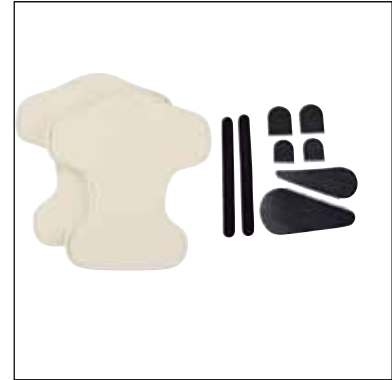

NYHED!



comfortKIT™

En ny blød polstring til ToeOFF og BlueRocker der er specielt velegnet til patienter med prominent tibia eller følsom hud, men også til personer med højt aktivitetsniveau. ComfortKIT har en indre kerne af såkaldt "memory foam" der bevirker at det naturligt tilpasser sig benets form ved anvendelse. Når materialet hviler genvinder det sin oprindelige form.

Art.nr.	Farve	Model	Størrelse
28398	Sort	Til ToeOFF, Fantasy og BlueRocker	X-Small
28398	Sort	Til ToeOFF, Fantasy og BlueRocker	Small
28398	Sort	Til ToeOFF, Fantasy og BlueRocker	Medium
28398	Sort	Til ToeOFF, Fantasy og BlueRocker	Large/X-Large
28396	Sort	MikroFix til softKIT/comfortKIT	X-Small/Small
28396	Sort	MikroFix til softKIT/comfortKIT	Medium/Large/X-Large



softSHELL™

SoftSHELL™ er en polstring beregnet til ToeOFF og BlueRocker der beklæder hele ortosen. En enkel måde at ændre farven og ydersiden på ortosen. Indersiden er samme materiale som standard SoftKIT og ydersiden er fremstillet af et blankere lycra-materiale der gør at tøjet lettere kan glide uden på ortosen. SoftSHELL leveres komplet med bånd, 2 neoprenstave og Microfix.

Art.nr.	Farve	Størrelse
28393	Beige	XSmall – Xlarge
28394	Brun	XSmall – Xlarge



NYHED!



KiddieGAIT™



Børn der rammes af neurologiske handicap og milde former for udviklingsforstyrrelser er i mange tilfælde afhængig af ortoseløsninger til de nedre ekstremiteter. Deres muskeltonus er ofte påvirket, hvilket gør deres gangmønster specielt udfordrende at behandle. Det er ikke udelukkende gulvreaktionskraften der påvirker gangmønsteret – muskeltonusen kan "øges ukontrollerbart" og kan påvirke samt forværre gangen og skabe deformiteter.

Start med en god begyndelse – lad barnet prøve en ortose der hjælper dets små fødder til et jævner og mere naturligt biomekanisk gangmønster:

- Kulfiberkomposit der ligger mod forsiden af tibia med en dynamisk fodplade der har en åben hæl.
- Skinnens placering på forsiden af tibia er til hjælp ved andre proximale problemer, som fx. hyperextension i knæet eller "Crouch"-gang.
- Beregnet til anvendelse i kombination med en individuel fodtilpasning for at hjælpe til med at kontrollere gulvreaktionskræfterne.

INDIKATIONER

Dropfod, ændringer i gangmønsteret som følge af proprioceptive forstyrrelser; tågænger med intakt mellemfod, "Crouch-gang" som følge af lav tonus (fleksion i hofte/knæ/ankel), Spina Bifida, Cerebral Parese, Muskel-dystrofi og MMC.

KONTRAINDIKATIONER

Begrænset bevægelighed i ankelledet (mindst 5° dorsalfleksion ved passiv bevægelse), alt for rigid fodstruktur. Spastisk Quadricepsmuskel. Strukturelle fejlstillinger i knæ og/eller fodled.

BEGRÆNSNINGER

Hyperextension i knæet på trods af behandling.

KiddieGAIT skal altid kombineres med en eller anden form for individuel fodtilpasning, for at kontrollere fodens position. Det er vigtigt at foden har en så funktionel position som muligt ved belastning. De mest almindelige fejlstillinger i foden som pronation, supination, pes varus, pes valgus skal korrigeres med et indlæg. Almindeligvis skal et sådant indlæg have en dyb hælkop for at stimulere hæl-til-tågæng.

Nedenstående er udelukkende anbefalinger, når de fodrelaterede problemer er:

Milde = anvend et stabilt indlæg med god hældybde. Moderate = anvend et stabilt indlæg med hælkop der slutter under ankelen. Svære og/eller stram akillesene = anvend ortose af typen SMO (Supra Malleolar Ortose) eller Surestep.



SureStep

Supra Malleolar Ortose

KiddieGAIT™

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Fodplade længde	Højde
28372	Sort	Ve/Hø	Baby Small	11 cm	15 cm
28372	Sort	Ve/Hø	Baby Medium	12,5 cm	18 mm
28372	Sort	Ve/Hø	Baby Large	14 mm	20 mm
28372	Sort	Ve/Hø	Small	16 cm	22 cm
28372	Sort	Ve/Hø	Medium	18 cm	25,7 cm
28372	Sort	Ve/Hø	Large	20 cm	29,5 cm
28373	Ekstra bånd		Small		
28373	Ekstra bånd		Medium		
28373	Ekstra bånd		Large		
28373	Ekstra bånd		Baby Small		
28373	Ekstra bånd		Baby Medium		
28373	Ekstra bånd		Baby Large		



KiddieGait™ afprøvningsortose

KiddieGAIT afprøvningsortose er en ortose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Den er udelukkende beregnet til at være et hjælpemiddel ved afprøvning inden valg af ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved anvendelse.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Fodplade længde	Højde
28382	Sort	Ve/Hø	Small	16 cm	22 cm
28382	Sort	Ve/Hø	Medium	18 cm	25,7 cm
28382	Sort	Ve/Hø	Large	20 cm	29,5 cm
28382	Sort	Ve/Hø	Baby Small	11 cm	15 cm
28382	Sort	Ve/Hø	Baby Medium	12,5 cm	18 cm
28382	Sort	Ve/Hø	Baby Large	14 cm	20 cm



KiddieGait™ Afprøvnings sæt

I KiddieGait™ afprøvnings sæt indgår 6 polstrede KiddieGait afprøvningsortoser med teksten "Not-for-resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne Small, Medium og Large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art.nr.	Farve	Pakn.	
28383	Sort	KiddieGAIT, Hø+Ve Small, Medium, Large	6 styk
28381	Sort	KiddieGAIT Baby, Hø+Ve Small, Medium, Large	6 styk





KiddieGAIT™ softKIT™

KiddieGAIT SoftKIT er en behagelig og smidig polstring beregnet til anvendelse sammen med KiddieGAIT. Hver pakning indeholder to polstringer og selvhæftende MikroFix.

Art.nr.	Farve	Størrelse
28397	Sort	Baby Small
28397	Sort	Baby Medium
28397	Sort	Baby Large
28397	Sort	Small
28397	Sort	Medium
28397	Sort	Large
28409	Ekstra MikroFix til KiddieGAIT softKIT	
		One Size



KiddieGAIT SoftSHELL

SoftSHELL er en polstring til KiddieGAIT der beklæder hele ortosen. Indersiden er fremstillet af samme materiale som SoftKIT. Ydersiden består af et glat mønstret lycra-materiale der giver et andet udseende og bevirker at bukser lettere kan glide mod ortosen.

Øvrigt: Mønster kan forandres med tiden.

Art.nr.	Farve	Mønster	Størrelse
28388	Rød	Biler	Small
28388	Rød	Biler	Medium
28388	Rød	Biler	Large
28389	Rosa	Hjerter	Small
28389	Rosa	Hjerter	Medium
28389	Rosa	Hjerter	Large

KiddieGait SoftSHELL Baby

SoftSHELL Baby er en polstring til KiddieGAIT Baby. Disse størrelser i KiddieGAIT SoftSHELL skal kompletteres med en SoftKIT (28397) i samme. SoftSHELL har en yderside af glat mønstret lycra-materiale der ændrer udseendet og gør at ortosen glider lettere mod tøjet. På denne model er båndet integreret i selve produktet.

Art.nr.	Farve	Mønster	Størrelse
28388	Blå	Dyr	Baby Small
28388	Blå	Dyr	Baby Medium
28388	Blå	Dyr	Baby Large
28389	Rosa	Stjerner	Baby Small
28389	Rosa	Stjerner	Baby Medium
28389	Rosa	Stjerner	Baby Large



Non Slip Material

Et skridsikkert materiale, der ved friktion er perfekt til overflader hvor man ønsker at undgå skrid. Materialet er specielt udviklet til anvendelse på KiddieGAITs fodplade, for at forhindre at f.eks. en SureStep ortose glider mod den blanke fodplade. OBS! Dette materiale skal ikke anvendes direkte mod huden.

Art.nr.	Farve	Bredde	Længde
28411	Sort	14 cm	1 m





Øvrigt: SureStep fremstilles i USA efter mål, hvis I har spørgsmål til måltagningen kontakt jeres bandagist eller kundeservice hos Camp Scandinavia A/S.

SureStep

SureStep er en dynamisk fodortose beregnet til børn. Ortosen kontrollerer fodens og fodleddets pronation hos børn med lav tonus. Koordination og balance forbedres. Kan anvendes med almindelige sko. SureStep er fremstillet af meget let og tynd plast.

- Koordination og balance forbedres.
- Nedre ekstremitets belastning normaliseres.
- Motorisk kontrol forbedres.
- Kan anvendes med almindelige sko.
- Fremstilles efter individuelle mål.
- Fremstilles af meget let og tynd plast.

Anvendelsesområde: Moderat eller udtalt pronation af fodleddet (plano-valgus) sammen med en af følgende tilstande:

- Lav tonus
- Slappe ligamenter
- Forsinket gang, dårlig balance, trætte fødder, hvis barnet undviger at gå

Kontraindikationer:

- >38 kg
- Kontrakturer- Foden skal nå neutralleje (90°) ved passiv manipulation
- Forhøjet tonus
- Spasticitet

Art.nr.	Model	Pakn.
28633	Målbestilt	Par
28634	Målbestilt	Stk.
28635	Måletaske	
93300	Måletaske til udlån	



Øvrigt: BigShot specialfremstilles i USA efter gipsafstøbning og mål. En ikke modificeret negativ gipsafstøbning sendes sammen med ordren til Camp Scandinavia. Gipsafstøbningen skal være i 90 grader med hæl og forfod i neutralleje.

Hvis I har spørgsmål om måltagning, kontakt jeres bandagist eller kundeservice hos Camp Scandinavia A/S.

SureStep BigShot

Selvom mange børn overgår fra SureStep til en mindre ortose, har en del børn fortsat behov for maksimal støtte og stabilitet. Til disse børn har vi udviklet BigShot. Denne ortose har samme fleksibilitet som SureStep og kan anvendes af de børn som er vokset ud af SureStep eller som nærmer sig vægtgrænsen på 38 kg. Det bløde silikonlignende inderhylster gør ortosen behagelig og den ydre fleksible ramme af plast giver en fleksibel støtte.

Anvendelsesområde: Moderat eller udtalt pronation af fodleddet (plano-valgus) sammen med en af følgende tilstande:

- Lav tonus
- Slappe ligamenter
- Forsinket gang, dårlig balance, trætte fødder, hvis barnet undviger at gå
- >38 kg

Kontraindikationer:

- Kontrakturer- Foden skal nå neutralleje (90°) ved passiv manipulation
- Forhøjet tonus
- Spasticitet

Art.nr.	Model	Pakn.
28636-0	BigShot efter gips+mål	Par
28636-1	BigShot efter gips+mål	Styk

Bestillingskema - SureStep/BigShot

Invoice to: Camp Scandinavia
 Adress: KARBINGATAN 38.254 67 HELSINGBORG
 Country: SWEDEN
 Contact: Susanne Persson / Ann-Louise Christensen
 Tel: +46 42 25 27 19/25 27 21

PO: _____


ORDER NR. _____

Bestiller: _____
 Virksomhed: _____ Deliver to: _____
 Land: _____ Adress: _____ Country: _____

Patient information

Patient ID _____ Sex: Male Female
 Age: _____ Right foot Left foot Bilateral
 Weight: _____ (kg)
 Diagnosis: _____

SMO Measurement form

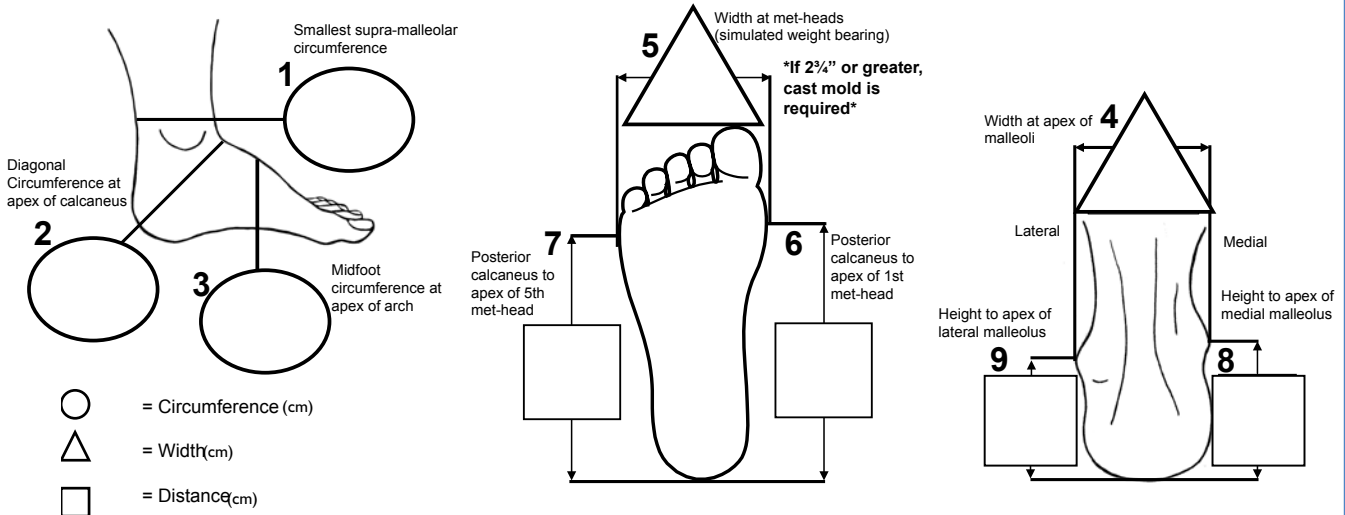


Pattern Options (Circle one)

Strap colours: White Black Royal Blue Light Blue
 Pink Purple Red


BabySports2 Beach Blossom Bugs Busy Bees Butterflies
 Construction Dinosaurs Farm Friends Happy Daisies Jungle Juggle Ocean Life
 Skateboard Sports I Traffic Soup Camo Pink Camo Pink Swirls

SureStep full footplate reverse trimlines/ clubfoot mod forefoot abduction ____°
 SureStep/BigShot(>80 lbs, 40Kg) - Cast mold measurements required for the SureStep BigShot

Surestep/BigShot – mønstertilvalg

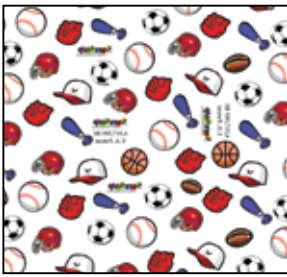

Babysports 2

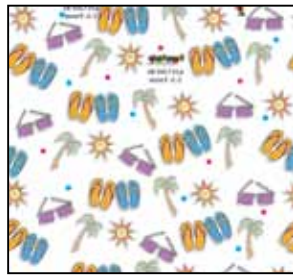


Beach




Blossom



Bugs

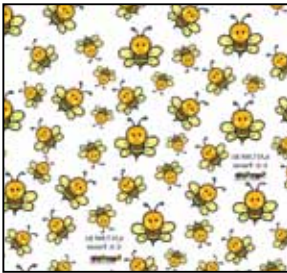

Busy bees

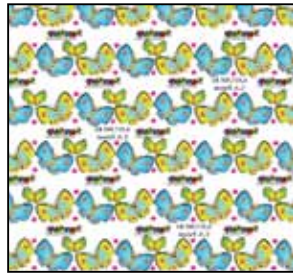

Butterflies




Construction



Dinosaurs



Farm friends

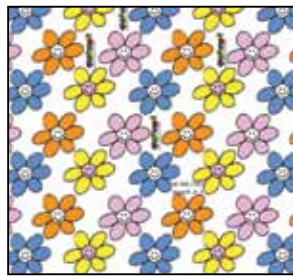

Happy daisies



Jungle



Ocean life



Skateboard



Sports I



Traffic soup



Pink Swirls



Camo



Pink Camo

Strap color

Pink Red Purple Black White

Light Blue Royal Blue

Dynafo dropfodsorthose

Dropfodsorthose af Polypropylene med enkel velcrolukning. Orthosen slutter ved metatarsalledet for at give bedre plads i skoen. Enkle justeringer kan foretages med varmluftpistol.

Anvendelsesområde: Let dropfod.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Skostørrelse
71295	Hvid	Ve/Hø	Small	36-39
71295	Hvid	Ve/Hø	Medium	40-42
71295	Hvid	Ve/Hø	Large	43-46
71295	Hvid	Ve/Hø	X-Large	47-49



Prim dropfodsorthose

Dropfodsorthose af Polypropylene. Orthosen har blød polstring omkring læggen. Fæstnes med velcrobånd.

Anvendelsesområde: Let dropfod.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Længde	Højde
71296	Hvid	Ve/Hø	Small	23 cm	29 cm
71296	Hvid	Ve/Hø	Medium	24,5 cm	31 cm
71296	Hvid	Ve/Hø	Large	26 cm	33 cm
71296	Hvid	Ve/Hø	X-Large	27,5 cm	35 cm



Mini Walker

Mini Walker er beregnet til behandling af stabile frakturer og fodledsdistorsioner. Et behageligere alternativ end gipsforbinding for barnet. Har et holdbart design der holder til det aktive barns bevægelser. Skinnerne i walkeren er i let nylon. Polstring der kan tages ud og vaskes ved behov. Latexfri.

Anvendelsesområde: Stabile frakturer og fodledsdistorsioner.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Alder
45830	Grå	Bilat.	Small	1-2 år
45830	Grå	Bilat.	Medium	2 1/2 - 6 år
45830	Grå	Bilat.	Large	6 1/2 - 9 1/2 år



NYHED!





Camp Fixed Ankle Walker

Uleddet walker til immobilisering af fodledet. Walkeren er indstillet i neutral vinkel (90°), har sideskinner af aluminium, dækket hælparti og rullensål med antiskridbelægning. Alle bånd har D-ring og båndene på tibiadelen kan placeres valgfrit for optimal støtte.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer; akut fodledsdistorsion, hælsenerupturer og bløddelsskader.

Øvrigt: Komplet med polstring, bånd og ekstra puder til evt. polstring.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Indersålens længde
28330	Sort	Bilat.	Small	ca 25 cm
28330	Sort	Bilat.	Medium	ca 27 cm
28330	Sort	Bilat.	Large	ca 29 cm
28322	Ekstra polstring og bånd		Small	
28322	Ekstra polstring og bånd		Medium	
28322	Ekstra polstring og bånd		Large	



Static Walker

Uleddet walker til immobilisering af fodledet. Walkeren er indstillet i neutral vinkel (90°), har sideskinner af hård plast, dækket hælparti og rullensål med antiskridbelægning. Alle bånd har D-ring. Fire løse polsterdele medfølger og kan placeres på udsatte punkter.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer; akut fodledsdistorsion, hælsenerupturer og bløddelsskader.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Indersålens længde
63100	Sort	Bilat.	X-Small	ca 22 cm
63100	Sort	Bilat.	Small	ca 24 cm
63100	Sort	Bilat.	Medium	ca 27 cm
63100	Sort	Bilat.	Large	ca 29 cm
63100	Sort	Bilat.	X-Large	ca 31 cm
63101	Ekstra polstring grå		X-Small/Small	
63101	Ekstra polstring grå		Medium	
63101	Ekstra polstring grå		Large/X-Large	
28335	Hælkile			

Pin Cam Walker

Leddets walker til immobilisering af fodledet. Walkeren har indstilleligt led der kan låses i ønsket vinkel, tillader et vist bevægelsesomfang eller giver helt fri bevægelighed. Bevægelsesomfanget justeres med 7,5° interval mellem 45° plantar- og 45° dorsalfleksion. Walkeren har sideskinner af aluminium, dækket hælparti og rullerul med antiskridbelægning. Til frakturer der kræver ekstra stabilitet medfølger to ekstra plastskinner. Alle bånd har D-ring og båndene på tibiadelen kan placeres valgfrit for optimal pasform.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer; akut fodledsdistorsion, hælenerupturer og bløddelsskader.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Indersålens længde
45820	Sort	Bilat.	Small	ca 24 cm
45820	Sort	Bilat.	Medium	ca 27 cm
45820	Sort	Bilat.	Large	ca 29 cm
45821	Ekstra polstring		Small	
45821	Ekstra polstring		Medium	
45821	Ekstra polstring		Large	
28335	Hælkile			



Hælkile til Walker

Hælkile beregnet til anvendelse i en Walker når der ønskes øget plantarfleksion. Kilen er opbygget af flere enkelte kiler der er sat sammen med dobbeltklæbende tape, derfor kan højden let mindskes trinvis. Passer til Static Walker, Pin Cam Walker samt CAMP Low Profile Walker.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
28335	Sort	Bilat.	One Size



