



# Hånd- og håndledsortoser

[www.camp.dk](http://www.camp.dk)



### SOF-Stretch dynamisk fingerortose kort

Skinne der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket. Bilateral wire kan bøjes for at tilpasse modstanden og gøre plads til eventuelt ødem. Det korte design tillader fuld bevægelighed i MCP-leddene.

**Anvendelsesområde:** Flexionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Mål volart mellem MCP-leddet og DIP-leddet.
51405	Hvid	X-Small	3,8 cm
51405	Hvid	Small	4,4 cm
51405	Hvid	Medium	5,1 cm
51405	Hvid	Large	5,7 cm
51405	Hvid	X-Large	7 cm



### SOF-Stretch dynamisk fingerortose

Skinne der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket. Bilateral wire kan bøjes for at tilpasse modstanden og gøre plads til eventuelt ødem.

**Anvendelsesområde:** Flexionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Mål volart mellem distale palmarled og DIP-leddet
51400	Hvid	X-Small	5,1 cm
51400	Hvid	Small	6,4 cm
51400	Hvid	Medium	7,6 cm
51400	Hvid	Large	8,9 cm
51400	Hvid	X-Large	10,2 cm
51401	Sort	X-Small	5,1 cm
51401	Sort	Small	6,4 cm
51401	Sort	Medium	7,6 cm
51401	Sort	Large	8,9 cm
51401	Sort	X-Large	10,2 cm

## SOF-Stretch dynamisk spiralortose

Ekstensionsskinne (Capener) der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Spiralfjedrene er placeret på begge sider af PIP-leddet for at yde samme modstand i alle positioner. De kan løsnes eller strammes til ønsket modstand. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket.

**Anvendelsesområde:** Fleksionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet. Egnede til kontrakturer op til 45°.


Art.nr.	Farve	Størrelse	Mål volart mellem distale palmarled og DIP-leddet
51410	Hvid	Small	6,4 cm
51410	Hvid	Medium	7 cm
51410	Hvid	Large	7,6 cm
51410	Hvid	X-Large	8,3 cm



## Stax fingerskinne

Immobiliserer DIP-leddet i ekstension og giver samtidig fuld bevægelighed i PIP-leddet. Anvendes normalt uden polstring og fikseres mod mellemste falang med selvhæftende bånd (medfølger ikke).

Art.nr.	Størrelse	Længde	Diameter	Pakn.
51421	1	5,3 cm	1,5 cm	12 styk
51421	2	5,1 cm	1,7 cm	12 styk
51421	3	5,8 cm	1,9 cm	12 styk
51421	4	6,3 cm	1,9 cm	12 styk
51421	5	5,8 cm	1,9 cm	12 styk
51421	5,5	6,1 cm	2,3 cm	12 styk
51421	6	6,4 cm	2,3 cm	12 styk
51421	7	6,2 cm	2,5 cm	12 styk
51420	30 stk. fingerskinner i forskellige størrelser i plastboks.			30 styk

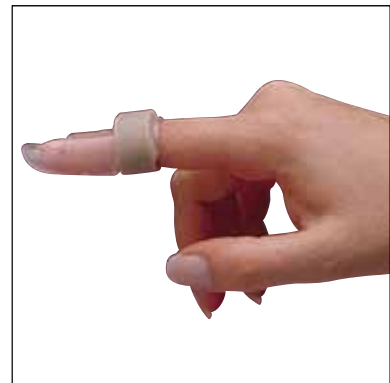

## Buddy strap

Tvillingebånd der holder to fingre fast sammen. Velcrobåndet kan let klippes til ønsket størrelse.

Art.nr.	Størrelse	Bredde	Længde	Pakn.
51430		1,3 cm	12,7 cm	5 styk





### Selection tommelortose Soft

Smidig og elastisk tommelortose der aflaster tommelens led og giver en let støtte. Selection Tommelortose Soft er fremstillet i et smidigt, moderne og let materiale, der er åndbart og føles behageligt mod huden. Ved hvile holdes tommelen i neutralleje uden at belaste muskler og senefæste. Kan klippes til ønsket form.

**Anvendelsesområde:** Reumatologiske sygdomme, aflastning, overbevægelighed i tommelens led, mild CMC-I artrose.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35200	Sort	Soft	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35200	Sort	Soft	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35200	Sort	Soft	Ve/Hø	Large	> 17 cm
35201	Beige	Soft	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35201	Beige	Soft	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35201	Beige	Soft	Ve/Hø	Large	> 17 cm



### Selection tommelortose Rigid

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet omkring tommelen. Giver aflastning til tommelens led og en stabil støtte. Giver desuden støtte og beskyttelse til tommelens MCP-led. Selection tommelortose rigid er fremstillet i et smidigt, moderne og let materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. Ved hvile holdes tommelen i neutralleje uden at belaste muskler og senefæste. Kan klippes til ønsket form.

**Anvendelsesområde:** Reumatologiske sygdomme, aflastning, overbevægelighed i tommelens led, mild til moderat CMC-I artrose.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35202	Sort	Rigid	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35202	Sort	Rigid	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35202	Sort	Rigid	Ve/Hø	Large	> 17 cm
35203	Beige	Rigid	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35203	Beige	Rigid	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35203	Beige	Rigid	Ve/Hø	Large	> 17 cm

## Tommelbandage kort og lang

Blød elastisk tommelbandage i neopren, der beskytter, aflaster og giver varme. Findes i to længder. Den lange model giver let støtte til håndleddet. Ved hvile holdes tommelfingeren i neutralleje uden belastning af muskler og sener. Kan klippes til ønsket form.

**Anvendelsesområde:** Reumatologiske sygdomme, aflastning og hypermobilitet i tommelen.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28548	Beige	Kort	Ve/Hø	Small	<17 cm
28548	Beige	Kort	Ve/Hø	Large	>17cm
28558	Blå	Kort	Ve/Hø	Small	<17 cm
28558	Blå	Kort	Ve/Hø	Large	>17 cm
28549	Beige	Lang	Ve/Hø	One Size	
28559	Blå	Lang	Ve/Hø	One Size	



## Basic tommelbandage, kort og lang

Bandage med plastskinne der giver støtte til tommelfingeren og omkringliggende strukturer. Materialet er klippet på skrå for optimal pasform og elasticitet. Åben justerbar tommelstrop. Den lange model er 2 cm længere og giver støtte til håndleddet. Kan kombineres med håndledsbånd 27447 eller 27448 for ekstra stabilitet.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm





### Tee Pee™ tommelortose

Tommelortose med tre formbare aluminumsskiner; centralt, dorsalt og palmart. Ortosen giver en stabil støtte til tommelfingeren. Fremstillet af perforeret luftig ruskindsimitation med åndbart foer.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme og instabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Længde fra håndled til tomlens IP-led
28560	Sort	Bilat.	X-Small	<9 cm
28560	Sort	Bilat.	Small	9-10 cm
28560	Sort	Bilat.	Medium	10-11,5 cm
28560	Sort	Bilat.	Large	11,5-13 cm
28560	Sort	Bilat.	X-Large	>13 cm



### CMC tommelortose

Denne tommelortose er beregnet til at give støtte til CMC-leddet ved instabilitet og slidskader. Den polstrede indre skinne i kombination med det ydre elastiske bånd giver kompression af tommelbasen og hjælper dermed til at stabilisere CMC-leddet.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme og instabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28561	Sort	Ve/Hø	X-Small	<14 cm
28561	Sort	Ve/Hø	Small	14-15,5 cm
28561	Sort	Ve/Hø	Medium	15,5-17,5 cm
28561	Sort	Ve/Hø	Large	17,5-19,5 cm
28561	Sort	Ve/Hø	X-Large	>19,5 cm



### Sporlastic tommelortose

Stabil tommelortose fremstillet af plast til immobilisering af tommelfingeren i funktionsstilling. Påsyet velcrobånd giver justerbar lukning. Stockinette i high-tech fiber opsuger fugt og giver en blød polstringseffekt.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt og ved instabilitet.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28545	Beige	Ve/Hø	Small	<17 cm
28545	Beige	Ve/Hø	Medium	17-19 cm
28545	Beige	Ve/Hø	Large	>19 cm



## Selection håndledsortose Soft

Smidig, elastisk håndledsortose fremstillet af et moderne smidigt materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. Selection Soft har en formet plasticskinne på volarsiden og en blødere lige plasticskinne på dorsalsiden. Skinnerne er udtagelige. Den todelte lukning gør ortosen let at åbne og lukke med én hånd. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks for en optimal pasform.

**Anvendelsesområde:** Når håndleddet har brug for aflastning fx. ved inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35204	Sort	Soft	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35204	Sort	Soft	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35204	Sort	Soft	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35204	Sort	Soft	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



## Selection håndledsortose Rigid

Smidig, elastisk håndledsortose med tommeldel, fremstillet i et moderne smidigt, let materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. Tommeldelen giver ved sit mere stabile materiale en god støtte og holder tommelen i neutralleje. Selection Rigid har en formet plasticskinne på volarsiden og en blødere lige plasticskinne på dorsalsiden. Skinnerne er udtagelige. Den todelte lukning gør ortosen let at åbne og lukke med én hånd. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks for en optimal pasform.

**Anvendelsesområde:** Når håndleddet og tommelen har brug for aflastning fx. ved inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
35206	Sort	Rigid	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35206	Sort	Rigid	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35206	Sort	Rigid	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35206	Sort	Rigid	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



## CS-skinne

Volar plasticskinne med hårdhedsgrad "Medium" der passer de fleste håndledsortoser. Skinnen holder håndleddet i funktionsleje. Formen tillader maksimal bevægelighed af thenarmuskulaturen.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål	Pakning
35210	Blå	Bilat.	One Size	22x168 mm	10





## Basic Ekstra bånd

Separat elastisk bånd i to bredder til Basic håndledbandager model 27441 og 27442 samt tommelbandager model 27443 og 27444.

Art.nr.	Farve	Størrelse	Bredde
27447	Blå	Small	5 cm
27448	Blå	Large	7,5 cm



## Basic håndledsbandage, kort og lang

Enkel håndledsbandage i kort og lang model med velcrolukning der giver god støtte og kompression. Åbne modeller der er lette at tage på og af. Udtagelig formbar aluminiumsskinne volart. Standardmodel med velcro påsyet og astrakan som lukkestrop giver fleksibilitet ved valg af størrelse. Kort model kan kombineres med ekstrabånd 27447 eller 27448 for ekstra stabilitet. Den lange model har et monteret elastisk bånd omkring håndleddet.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm



## Basic håndledsbandage

Håndledsbandage med integreret bånd, der giver ekstra god støtte til håndleddet. Det brede proximale bånd med bred lukning giver fleksibilitet ved valg af størrelse og letter på- og aftagning. Åben model der er let at tage på og af. Udtagelig formbar aluminiumsskine volart. Højt skåret ved lillefingersiden for ulnar støtte.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
27446	Blå	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27446	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27446	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27446	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27446	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm

## Let håndledsbandage

Håndledsbandage i neopren, der giver varme og støtte til håndledet. Holdes på plads ved at fastgøres om tommelfingeren.

Kan klippes til ønsket form.

**Anvendelsesområde:** Reumatologiske sygdomme og aflastning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
28230	Blå	Bilat.	One Size



## Bromsa håndledsbandage

Håndledsbandage med to fleksible plastskinner dorsalt, der sammen med det kraftige elastiske bånd begrænser dorsalfleksion af håndledet. Modstanden justeres let ved at anvende en eller to plastskinner, og ved at placere båndet mere proximalt eller distalt. Ingen skinner volart der påvirker håndens øvrige funktioner.

**Anvendelsesområde:** Aflastning af ekstensorsenerne i forbindelse med lateral epicondylit.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28240	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28240	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28240	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28240	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm



## Elcross® Carpus Flexi håndledsbandage

En af de mest populære bandager til reumatologiske patienter. Foret med bomuld, der er behageligt mod huden. Snøresystemet letter ved lukning og justering. Velegnet til patienter med svag håndfunktion. Pasformen er fleksibel og passer både en bred og smal underarm. Udtagelig formbar aluminiumsskinne.

**Anvendelsesområde:** Reumatologiske sygdomme og aflastning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28149	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28149	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28149	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28149	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
28144	Beige	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28144	Beige	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28144	Beige	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28144	Beige	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm





### Bisca® håndledsbandage

Model som specielt er velegnet til reumatologiske patienter. Bandagen er foret med bomuldsmateriale, der er behageligt mod huden. Det integrerede bånd i kombination med den udtagelige formbare aluminiumsskinne giver god støtte.

**Anvendelsesområde:** Reumatologiske sygdomme og aflastning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28042	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28042	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28042	Blå	Ve/Hø	Large	17-20cm



### D-ring håndledsbandage

En uelastisk, polstret håndledsbandage med formbar aluminiumsskinne volart. Lukkes med D-ringe. Den tykke polstring gør at ortosen med fordel kan anvendes til sensible patienter. Ortosen er bomuldsforet og findes i to farver samt i en slidstærk "Work Hard"-udgave i sort skind.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
53225	Sort Skind	Ve/Hø	X-Small	<14,6 cm
53225	Sort Skind	Ve/Hø	Small	14,6-16,5 cm
53225	Sort Skind	Ve/Hø	Medium	16,6-19,1 cm
53225	Sort Skind	Ve/Hø	Large	19,2-21,6 cm
53225	Sort Skind	Ve/Hø	X-Large	>21,6 cm



### Wrist Lacer™ håndledsorthese, kort

Meget stabil håndledsorthese med formbare aluminiumsskinner dorsalt og volart. Ortosen giver desuden ulnar støtte. Fremstillet i slidstærk ruskindsimulation med åndbart foer. Justerbar tommelstrop. Lukkesystemet med snører er let at åbne lukke med én hånd. Volar polstring ved skinnen for øget komfort. Findes i to farver.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet

**Øvrigt:** Denne model er 20 cm lang.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm
28571	Sort	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28571	Sort	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28571	Sort	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28571	Sort	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28571	Sort	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm

## Wrist Lacer™ håndledsortose, lang

Meget stabil håndledsortose med formbare aluminiumsskinner dorsalt og volart. Ortosen giver desuden ulnar støtte. Fremstillet i slidstærk ruskinsimitation med åndbart foer. Justerbar tommelstrop. Lukkesystemet med snører er let at åbne lukke med én hånd. Volar polstring ved skinnen for øget komfort. Findes i to farver.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

**Øvrigt:** Denne model er 26 cm lang.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm
28573	Sort	Lang	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28573	Sort	Lang	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28573	Sort	Lang	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28573	Sort	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm



## V-Strap™ håndledsortose, kort

V-Strap har samme egenskaber som WristLacer, men kan desuden bestilles i børnestørrelse (kort model). Ortosen adskiller sig ved lukkesystemet og pasform. Ortosen følger håndens konturer og passer også en bred hånd. Det patenterede V-formede lukkesystem holder båndene på plads i D-ringene ved på- og aftagning.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

**Øvrigt:** Denne model er 20 cm lang.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28574	Sort	Kort	Ve/Hø	XX-Small	<12 cm
28574	Sort	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28574	Sort	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28574	Sort	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28574	Sort	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28574	Sort	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm
28574	Sort	Kort	Ve/Hø	XX-Large	22-25 cm



## Tripod™ Wrist Lacer



En meget stabil håndledsortose med samme gode komfort og funktionelle egenskaber som Wrist Lacer. Tripod har tre formbare aluminiumskinner som er placeret ulnar, palmart og dorsalt. Disse skinner virker sammen for at hindre radial-ulnar deviation og minimere fleksion-ekstension af håndledet. Den ulnare skinne sammen med det dobbelte snøringsystem modvirker radial-ulnar deviation. Præcis som Wrist Lacer tillader Tripod en fuld bevægelighed af tommelen. Lukningssystemet med snører er let at åbne og lukke med én hånd.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, radial-ulnar deviation, carptunnelsyndrom, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28577	Sort	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28577	Sort	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28577	Sort	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28577	Sort	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28577	Sort	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm



## V-Strap™ håndledsortose, lang

V-Strap har samme egenskaber som Wrist Lacer. Ortosen adskiller sig ved lukkesystemet og pasform. Ortosen følger håndens konturer og passer også en bred hånd. Det patenterede V-formede lukkesystem holder båndene på plads i D-ringene ved på- og aftagning.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

**Øvrigt:** Denne model er 26 cm lang.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28575	Sort	Lang	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28575	Sort	Lang	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28575	Sort	Lang	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28575	Sort	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm



## CTS håndledsortose

Natortose af tynd, perforeret Krydexplast, der immobiliserer håndledet. Beregnet til patienter med Carptunnelsyndrom med natlige problemer i form af hævelse, følelseløshed og smerter.

**Anvendelsesområde:** Carptunnelsyndrom.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndflade	Omkreds underarm
28542	Lyseblå	Ve/Hø	Small	<20 cm	<23 cm
28542	Lyseblå	Ve/Hø	Large	>20 cm	>23 cm
25030	Ekstra bånd	19 mm			
25030	Ekstra bånd	25 mm			
25030	Ekstra bånd	50 mm			

## Basic håndledsbandage med tommel

Unik designet håndledsbandage, der støtter tommelfingeren. Tommelfingerdelen er delvis fritstående for at følge Thenarmuskulaturen og sikre en god pasform. Tommelfingeren holdes i neutralleje ved hvile. Udtagelig og formbar aluminiumsskinne volart. Tommelfingerskinne i fleksibel plast følger hele bandagens længde for at give ekstra stabilitet. Standardmodel med velcro påsyet og astrakan som lukkestrop giver fleksibilitet ved valg af størrelse.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

**Øvrigt:** Basic Extra Bånd, som ses på fotoet, kan købes separat (side 12 i kataloget).

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
27442	Blå	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27442	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27442	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27442	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27442	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm



## D-ring håndleds- og tommelbandage

En uelastisk, polstret håndleds- og tommelbandage med formbare aluminiumsskinne. Lukkes med D-ring. Ortosen er bomuldsforet og den tykke polstring gør at bandagen med fordel kan anvendes til sensible patienter.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
53219	Beige	Ve/Hø	X-Small	<14,6 cm
53219	Beige	Ve/Hø	Small	14,6-16,5 cm
53219	Beige	Ve/Hø	Medium	16,6-19,1 cm
53219	Beige	Ve/Hø	Large	19,2-21,6 cm
53219	Beige	Ve/Hø	X-Large	>21,6 cm



## Ryno Lacer® håndledsorthese

Meget stabil håndleds- og tommelorthese med formbare aluminiumsskinne dorsalt, volart og radiale. Den radiale tommelskinne følger hele ortosens længde og immobiliserer tommelen effektivt. Fremstillet i slidstærk ruskinsimitation med åndbart foer. Lukkesystemet med snøring er let at åbne og lukke med én hånd.

**Anvendelsesområde:** Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

**Øvrigt:** Denne model er 22 cm lang.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28576	Sort	Ve/Hø	X-Small	<14 cm
28576	Sort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28576	Sort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28576	Sort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28576	Sort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm



## Thermoskin artrosehandske

Handske der giver varme for smertelindring. Ydermateriale af "nonslip" giver et sikkert greb. Det patenterede Trioxon® materiale stimulerer huden til at producere varme, transporterer fugt bort fra huden og tillader huden at ånde. Det er klinisk påvist at handsken øger temperaturen på hudoverfladen og subkutant med ca. 2°, hvilket forbedrer elasticiteten i muskler, sener og ligamenter. Sælges parvis.



**Anvendelsesområde:** Reumatologiske sygdomme

Art.nr.	Farve	Størrelse	Omkreds omkring MCP-leddene	Pakn.
53234	Sort	X-Small	15-17 cm	Sælges i par
53234	Sort	Small	18-20 cm	Sælges i par
53234	Sort	Medium	21-23 cm	Sælges i par
53234	Sort	Large	24-26 cm	Sælges i par
53234	Sort	X-Large	27-29 cm	Sælges i par
53234	Sort	XX-Large	>30 cm	Sælges i par

## Gripa håndledsbandage

Bandagen giver effektiv støtte til håndleddet ved tunge eller monotome arbejdsopgaver. Et kraftigt elastisk bånd støtter håndleddet. "Tuff Grip" i håndfladen sikrer et godt greb om værktøj. Udviklet i samarbejde med montører indenfor værkstedsindustrien.



**Anvendelsesområde:** Aflastning af håndfladen og håndleddet og præventivt ved f.eks. monteringsarbejde.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28210	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28210	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28210	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28210	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm

## Combi håndledsbandage

Handske der giver støtte til håndleddet og beskytter håndfladen. Handskens volare side består af specialbehandlet gribevenligt gedeskind, der polstres med kevlar, hvilket beskytter mod varme og skarpe genstande. Håndleddet støttes af et kraftigt elastisk bånd. Beregnet til tufft miljø.




**Anvendelsesområde:** Aflastning af håndfladen og håndleddet og præventivt ved f.eks. monteringsarbejde.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
28220	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28220	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28220	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28220	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
28220	Blå	Ve/Hø	XX-Large	23-26 cm

## Ergospoon skinne

Volar plastskinne der passer til de fleste håndledsbandager. Fremstillet i 3 forskellige hårdhedsgrader. Holder hånden i en aktiv vinkel. Formen tillader maksimal bevægelighed af Thenarmuskulaturen.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Pakn.
27340	Gul	Soft	Ve/Hø	10 styk
27340	Grøn	Medium	Ve/Hø	10 styk
27340	Rød	Rigid	Ve/Hø	10 styk

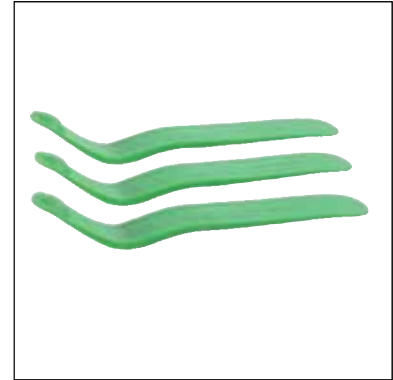

## Fingerkontrakturpude

Blød fingerseparator med polyesterfyld der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Beklædt med frottémateriale der opsuger fugt.

**Anvendelsesområde:** Fremskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål	Pakn.
51616	Blå	Bilat.	Medium	7,6 x 12,7 cm	3 styk
51616	Blå	Bilat.	Large	10 x 12,7 cm	3 styk



## Håndfladebeskytter

Blød bandage der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer.

Ønskes yderligere ekstension, kan en rulle let sættes ind mellem håndfladen og fingrene.

**Anvendelsesområde:** Fremskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Pakn.
51600	Hvid/Beige	Ve/Hø	One Size	1 styk
51601	Hvid/Beige	Ve/Hø	One Size	3 styk



## Håndfladebeskytter med fingerdeler

Blød bandage der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Materialet mellem fingrene giver en let abduktion. Kan åbnes helt for let påtagning.

**Anvendelsesområde:** Fremskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
51605	Hvid/Beige	Ve/Hø	One Size





### Sof-Gel™ håndfladebeskytter med fingerdeler

Blød håndfladebektter med trykafastende gel, der beskytter håndfladen og huden mellem fingrene. Den brede volare del beskytter tommelfingeren.

**Anvendelsesområde:** Fremskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse
51615	Beige	Ve/Hø	One Size





### Carve-It™ håndpositioneringsortose

Ortose der hjælper med til at holde hånden med mild til moderat fingerspasticitet i en funktionel position. Ortosen har udtagelig polstring. Inde i hånden findes en anatomisk formet skumdel der bevarer håndfladens runding. En flad underside gør den let at positionere mod underlaget ex. i sengen. Kan klippes til ønsket form. Universal anvendelse til både venstre og højre hånd.

**Anvendelsesområde:** Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus.

**Øvrigt:** Aftageligt betræk der kan håndvaskes og lufttørres.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP-led
51650	Hvid	Bilat.	Small/Medium	<7,6 cm
51650	Hvid	Bilat.	Large/X-Large	>7,6 cm
51651	Ekstra betræk		Small/Medium	
51651	Ekstra betræk		Large/X-Large	

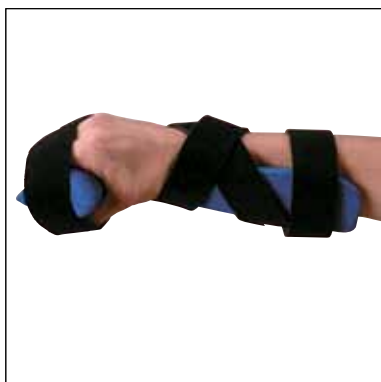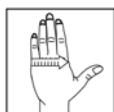

### Kwik-Form™ progressiv håndortose

Ortose med fast skinne og aftagelig polstring. Skinnen kan justeres uden værktøj. Støtter hånd og håndled. Tre håndruller i forskellige størrelser medfølger til progressiv behandling af fleksionskontrakturer i hånden.

**Anvendelsesområde:** Behandling og korrektion af fremskredne kontrakturer og ændret tonus.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
51630	Klar Blå	Bilat.	Small/Medium	<18 cm
51630	Klar Blå	Bilat.	Medium/Large	>18 cm
51631	Ekstra betræk		Small/Medium	
51631	Ekstra betræk		Medium/Large	



## Kwik-Form™ hvileortose

Ortose der kan justeres til ønsket position uden værktøj. Velcrobåndene hæfter direkte mod ortosens bløde betræk. Støtter tommelfinger, hånd og håndled.

**Anvendelsesområde:** Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus. Hvileortose.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
51638	Klar Blå	Ve/Hø	Small/Medium	<18 cm
51638	Klar Blå	Ve/Hø	Medium/Large	>18 cm



## TheraPlus™ Universal hånd- og håndledsortose

Ortose af aluminium med aftagelig polstring. Skinnen kan justeres uden værktøj. Støtter hånd og håndled. Findes i to forskellige modeller med forskellig rigiditet. Den stabile model vælges til patienter med forhøjet tonus. Aftagelig fingerdeler til positionering af fingrene og beskyttelse af huden medfølger.

**Anvendelsesområde:** Behandling og korektion af kontrakturer og ændret tonus samt som hvileskinne.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Mål håndled til fingerspids
51640	Blå	Regular	Bilat.	Small	16,5 cm
51640	Blå	Regular	Bilat.	Medium	18 cm
51640	Blå	Stabil	Bilat.	Medium	18 cm
51640	Blå	Stabil	Bilat.	Large	>23 cm
51641	Ekstra betræk			Small	
51641	Ekstra betræk			Medium	
51641	Ekstra betræk			Large	




## Lynx WHFO™ Deluxe håndortose

Ortose af aluminium med aftageligt betræk. Skinnen kan justeres uden værktøj. Støtter tommelfinger, hånd og håndled. Tommelfingeren holdes på plads af en medial og lateral støtte. Aftagelig fingerdeler til positionering af fingre og beskyttelse af huden medfølger. Aftagelig og vaskbart betræk.


**Anvendelsesområde:** Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus samt som hvileskinne.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Længde håndled til fingerspids
51642	Blå	Ve/Hø	X-Small	14,5-16,5 cm
51642	Blå	Ve/Hø	Small	16,5-18,5 cm
51642	Blå	Ve/Hø	Medium	18,5-20 cm
51642	Blå	Ve/Hø	Large	>20 cm
51643	Ekstra betræk	Ve/Hø	X-Small	
51643	Ekstra betræk	Ve/Hø	Small	
51643	Ekstra betræk	Ve/Hø	Medium	
51643	Ekstra betræk	Ve/Hø	Large	

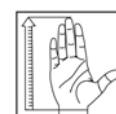


## Jackson hånd- og håndledsortose

En forformet hvileortose med lav vægt fremstillet i transperant højtemperaturplast. Skinnen går højt op på ulnarsiden og immobiliserer både håndled og fingre. Kanterne er blødt afrundet. Faste nylonbånd med enkel velcrolukning medfølger.

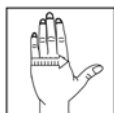

**Anvendelsesområde:** Immobilisering af håndled og fingre.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP-led	Længde
28701	Ve/Hø	Small	8 cm	29 cm
28701	Ve/Hø	Medium	8 cm	32 cm
28701	Ve/Hø	Large	9 cm	33 cm

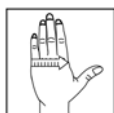


## Præformet hånd- og håndledsortose

Ortose der holder hånd og håndled i funktionsstilling. Skinnen er fremstillet i lavtemperaturplast, 3,2 mm Polyform, der kan formes ved individuel tilpasning. Selvklæbende bånd, der med fordel kan påsættes med varmepistol medfølger.

**Anvendelsesområde:** Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus.

Art.nr	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP-led
53231	Hvid	Ve/Hø	Small	6,4-8,8 cm
53231	Hvid	Ve/Hø	Medium	8,9-11,3 cm
53231	Hvid	Ve/Hø	Large	>11,4 cm

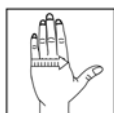

## Præformet anti-spasticitetsortose

Ortose der abducerer fingre og tommel samt positionerer håndleddet og holder hånden i en optimal stilling for at løsne spasticitet. Ortosen er fremstillet af lavtemperaturplast, 3,2 mm Polyform, der kan formes ved individuel tilpasning. Selvklæbende polstrede D-ringsbånd, der med fordel kan påsættes med varmepistol medfølger.

**Anvendelsesområde:** Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus samt som hvileskinne.


Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP-led
53232	Hvid	Ve/Hø	X-Small	7,6-8,2 cm
53232	Hvid	Ve/Hø	Small	8,3-8,8 cm
53232	Hvid	Ve/Hø	Medium	8,9-10,2 cm
53232	Hvid	Ve/Hø	Large	>10,2 cm

## Præformet hvileortose

Ortose der holder hånd og håndled i hvilestilling. Skinnen er fremstillet af lavtemperaturplast, 3,2 mm Polyform, der kan formes ved individuel tilpasning. Selvklæbende bånd, der med fordel kan påsættes med varmepistol medfølger.

**Anvendelsesområde:** Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus, reumatologiske sygdomme, hvileskinne.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP-led
53223	Beige	Ve/Hø	Small	<8,9 cm
53223	Beige	Ve/Hø	Medium	9-10,2 cm
53223	Beige	Ve/Hø	Large	>10,2 cm

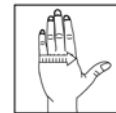

## Håndledsortose med lynlås

Frakturortose med lynlås, i 2,4 mm Aquaplast-T, der immobiliserer håndledet. Skinnen leveres flad og formes individuelt efter opvarmning i vandbad eller ovn. Lynlåsen betyder at skinnen enkelt kan tages af for kontrol og god hygiejne. Aquaplast-T bliver transparent ved opvarmning, har 100% hukommelse og er røngtengennemtrængeligt.

**Anvendelsesområde:** Immobilisering, posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Model	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
53221	Hvid	Kort	Bilat.	Small	12,7-15,5 cm
53221	Hvid	Kort	Bilat.	Medium	15,6-18,3 cm
53221	Hvid	Kort	Bilat.	Large	18,4-21 cm
53220	Hvid	Lang	Bilat.	Small	12,7-15,5 cm
53220	Hvid	Lang	Bilat.	Medium	15,6-18,3 cm
53220	Hvid	Lang	Bilat.	Large	18,4-21 cm



## Håndleds- og tommelortose med lynlås

Frakturortose med lynlås, i 2,4 mm Aquaplast-T, der immobiliserer håndled og tommelfinger. Skinnen leveres flad og formes individuelt efter opvarmning i vandbad eller ovn. Lynlåsen betyder at skinnen enkelt kan tages af for kontrol og god hygiejne. Aquaplast-T bliver transparent ved opvarmning, har 100% hukommelse og er røngtengennemtrængeligt.

**Anvendelsesområde:** Immobilisering, posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farve	Ve/Hø	Størrelse	Omkreds håndled
53215	Hvid	Bilat.	Small	13-15,8 cm
53215	Hvid	Bilat.	Medium	15,9-18,6 cm
53215	Hvid	Bilat.	Large	18,7-21,3 cm



