



Jalka- ja nilkkatuet

www.camp.fi



Heelbo kyynärpää-/kantapääsuoja

Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kantapään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Nilkan ympärysmitta	Pakkaus
53600	Keltainen	Small	15-20 cm	Myydään pareittain pari
53600	Sininen	Medium	20-25 cm	Myydään pareittain pari
53600	Valkoinen	Large	25-30 cm	Myydään pareittain pari
53600	Vihreä	X-Large	>30 cm	Myydään pareittain pari



Kahdeksikko nilkkatuki

Vahvasta ja joustavasta materiaalista valmistettu, kevyesti tukeva nilkkatuki tarranauhakiinnityksellä. Kierretään jalan ja nilkan ympärille kahdeksikon muotoon.

Käyttöalueet: Lievä nilkan instabiliteetti.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Nilkan ympärysmitta
28632	Beige	Bilat.	Small	20-23 cm
28632	Beige	Bilat.	Medium	23-26 cm
28632	Beige	Bilat.	Large	26-29 cm
28632	Beige	Bilat.	X-Large	30-33 cm



Elcross nilkkatuki

Puuvillasta ja lycrasta valmistettu pehmeä ja joustava sukkamallinen nilkkatuki, joka tukee nilkkaa kevyesti. Integroitu, elastinen nauha nostaa jalkaa lateraalipuolelta, mikä estää nilkan nyrjähdysten. Helppokäyttöinen.

Käyttöalueet: Lievä nilkan instabiliteetti.


Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Nilkan ympärysmitta
28181	Sininen	Vas/oik	Small	20-25 cm
28181	Sininen	Vas/oik	Large	25-30 cm

ASO® nilkkatuki

Matalaprofiilinen ja stabiili nilkkatuki. Edessä on tukeva nyörytys. Joustamattomien nylonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja estää jalan supinaation. Nauhoja säädetään vamman mukaan. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset jalan instabiliteetit ja urheilussa ennaltaehkäisevästi.

Tuotenro.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Mitta
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	XX-Small	22,5-25 cm
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm
28188	Musta	Ilman lastoja	Bilat.	XXX-Large	>40 cm

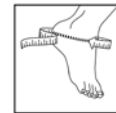


Mittaus: Ympärysmitta kantaluun apexin ja malleolien päältä.

ASO® nilkkatuki lastoilla


Matalaprofiilinen ja stabiili nilkkatuki. Edessä on tukeva nyörytys. Joustamattomien nylonnauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja estää jalan supinaation. Nauhoja säädetään vamman mukaan. Tämä malli tukee nilkkaa erityisen hyvin ulko- ja sisäpuolella olevien, irrotettavien muovilastojensa ansiosta. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset jalan instabiliteetit ja urheilussa ennaltaehkäisevästi.

Tuotenro.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Mitta
28185	Valkoinen	Lastoilla	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28185	Valkoinen	Lastoilla	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28185	Valkoinen	Lastoilla	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28185	Valkoinen	Lastoilla	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28185	Valkoinen	Lastoilla	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28185	Valkoinen	Lastoilla	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm
28186	Musta	Lastoilla	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28186	Musta	Lastoilla	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28186	Musta	Lastoilla	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28186	Musta	Lastoilla	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28186	Musta	Lastoilla	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28186	Musta	Lastoilla	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm

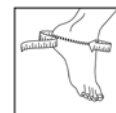

Mittaus: Ympärysmitta kantaluun apexin ja malleolien päältä.

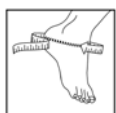

Mittaus: Ympärysmitta kantaluun apexin ja malleolien päältä.

ASO®EVO™

Matalaprofiilinen ja tukeva nilkkatuki, jossa on edessä stabiloiva nyöritys. Nailon-nauhojen asettelu muistuttaa teippausta ja ne stabiloivat nilkkaa supinaatioissa/pro-naatioissa. ASO EVO:n nauhat tukevat kantaluuta inversiossa/eversiossa paremmin kuin tavallinen ASO. Ortoosin suu on vahvistettu muovimansetilla, minkä ansiosta se tukee myös ylempää nilkkaniveltä. Ortoosin sisäpuolella akillesjänteen kohdalla on lisäksi mukavantuntuinen vahvistettu CoolFlex-pehmuste.

Käyttöalueet: Akuutti tai pitkäkestoinen nilkan instabiliteetti, ennaltaehkäisevästi urheilussa, nilkan nyrjähdykset, subtalar-nivelen instabiliteetti.

Tuotenumero	Väri	Puoli	Koko	Mitta
28189	Musta	Bilat.	X-Small	25-27,5 cm
28189	Musta	Bilat.	Small	27,5-30 cm
28189	Musta	Bilat.	Medium	30-32,5 cm
28189	Musta	Bilat.	Large	32,5-35 cm
28189	Musta	Bilat.	X-Large	35-37,5 cm
28189	Musta	Bilat.	XX-Large	37,5-40 cm



Stabil Soft -nilkkatuki

Stabiili nilkkatuki, jossa on nilkan ympärillä yksinkertaiset kiinnitysnauhat. Polypropeenista valmistetut sivutuet on muotoiltu anatomisesti. Sisämateriaali on T-vahtokumia, joka muotoutuu säären mukaan. Tukea käytetään yhdessä tukevan kengän kanssa.

Käyttöalueet: Akuutit ja pitkäkestoiset nilkan instabiliteetit.

Tuotenumero	Väri	Puoli	Koko
28184	Musta	Bilat.	Yksi koko



KoolAir-nilkkatuki

Nilkkatuki, joka immobilisoi, viilentää ja kompressoii nilkkaa ja vähentää turvotusta akuutin nilkkanyrjähdysten jälkeen. Tuessa on kompressioon tarkoitettuja, ilmatäyteisiä tyynyjä sekä irrotettavia geelityynyjä, joita voi käyttää kylmäpussin tavoin. Tuessa on nauha, jonka avulla nilkan ympärysmittaa on helppo säätää. Matalan profiilinsa ansiosta sitä voi käyttää useimpien kenkien kanssa.

Käyttöalueet: Akuutit nilkkanyrjähdykset.

Tuotenumero	Väri	Puoli	Koko
45825	Valkoinen	Bilat.	Yksi koko
45826	Nauha		Yksi koko

Strassburg sukka

Yökäyttöön tarkoitettu joustava sukka, jota käytetään plantaarifaskiitin hoitoon. Venyttää aktiivisesti kalvojännettä. Sukka vedetään jalkaan ja paikallaan pysyvyys varmistetaan tarranauhan avulla, joka kiinnitetään muutama senttimetri polvitaiteen alapuolelle. Sen jälkeen kiristetään varpaista säären etuosaan kulkeva nauha, joka venyttää jalkapohjaa.

Käyttöalueet: Plantaarifaskiitti eli jalkapohjan kalvojänteen kiinnitysalueen tulehdus. Sukkaa ei tule käyttää, jos jaloissa on turvotusta tai verenkiertohäiriöitä.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Pohkeiden ympärysmitta
28638	Valkoinen	Bilat.	Lasten koko	<20 cm
28638	Valkoinen	Bilat.	Regular	20-40 cm
28638	Valkoinen	Bilat.	Large	40-52 cm



BEBAX jalkateräortoosi

Nahasta valmistettu ortoosi, joka on tarkoitettu jalkaterän synnyntäisen virheasennon korjaamiseen. Ortoosin pohjapuolella jalkaterän ja kantapään välissä on nivel, jonka ansiosta jalkaterän kulmaa voidaan säätää. Ortoosi on kevyt, siinä on pehmeä pehmuste ja se on helppo pukea ja riisua. Koissa 10½-13½ on nilkkanauha, joka pitää kantapään paikallaan. Ortoosia ei ole tarkoitettu kävelyyn.

Käyttöalueet: Jalkaterän synnyntäiset virheasennot.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Sisäpohjan pituus
28637	Valkoinen	Vas/oik	7,5 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	8 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	8,5 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	9 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	9,5 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	10 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	10,5 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	11,5 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	12,5 cm
28637	Valkoinen	Vas/oik	13,5 cm





PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) on kehitetty keventämään painetta kantapäässä ja kantapään haavaumissa makuuasennossa ja lyhyillä kävelymatkoilla. Se pitää jalan neutraalissa asennossa ja säilyttää dorsaali- ja plantaarifleksion kävelyn aikana. Säädettävä tanko estää sisä- ja ulkorotaation makuuasennossa. Säädettävät jalka-, varvas ja pohjeosat.

Käyttöalueet: Soveltuu esim. diabetes- ja painehaavaumiin.

Muuta: Pehmeuste on helppo irrottaa pesua varten ja asettaa takaisin.

Tuoteno.	Väri	Tuote	Puoli	Koko
71100	Musta	PRAFO Standard	Bilat.	Yksi koko
71110	Musta	Vaihtopehmuste		Yksi koko
71120	Musta	Vaihtonauha		



Boston Soft AFO

Nilkka- ja jalkaortoosi, joka on valmistettu jäykästä muovista ja vuorattu pehmeällä vahtomuovilla. Ortoosi on tarkoitettu jalan ja nilkan asennon parantamiseen ja spastisiteetin vähentämiseen. Siinä on sisäänrakennettu kantasuoja, joka edesauttaa kantapäähaavojen hoitamista. Boston Soft AFOa voi tilata sekä antirotaatiotuen (stabilizer) kanssa tai ilman. Ortoosi on helppo puhdistaa ja sitä voi muotoilla saksilla.

Käyttöalueet: Selkäydintyrä, lihasdystrofia, CP, trauma ja kantapäähaavat.

Muuta: Tuki estää jalan kiertymisen.

Tuoteno.	Koko	Malli	Puoli	Kengän koko	Pakkaus
71151	Lapsi 1	Ilman tukea	Bilat.	19-20	I
71151	Lapsi 2	Ilman tukea	Bilat.	21-22	I
71151	Lapsi 3	Ilman tukea	Bilat.	23-24	I
71151	Lapsi 4	Ilman tukea	Bilat.	25-26	I
71151	Lapsi 5	Ilman tukea	Bilat.	27-29	I
71151	Lapsi 6	Ilman tukea	Bilat.	30-31	I
71151	Aikuinen A	Ilman tukea	Bilat.	32-34	I
71151	Aikuinen B	Ilman tukea	Bilat.	35-36	I
71151	Aikuinen C	Ilman tukea	Bilat.	37-39	I
71151	Aikuinen D	Ilman tukea	Bilat.	40-41	I
71151	Aikuinen E	Ilman tukea	Bilat.	42-44	I
71151	Aikuinen F	Ilman tukea	Bilat.	45-46	I
71152	Lisätukea antava lasta	Käytetään 71151 kanssa		Yksi koko	I

Tibia murtumaortoosi

Esivalmistettu, röntgensäteitä läpäisevä murtumaortoosi tibiamurtumiin. Ortoosia voidaan muotoilla kuumailemapuhaltimella. Siinä on yksinkertainen tarranauhakiinnitys ja kääntösoljet. Jalkaosan korkeutta voidaan säätää. Ortoosi on pehmeästi vuorattu ja mukana tulee kaksi puuvillasukkaa.

Käyttöalueet: Tibian murtumat.

Tuotenro	Väri	Puoli	Koko	Pohkeen ympärysmitta	Säären pituus
71290	Valkoinen	Vas/oik	Small	30-35 cm	39-46 cm
71290	Valkoinen	Vas/oik	Medium	35-42 cm	42-48 cm
71290	Valkoinen	Vas/oik	Large	41-48 cm	47-53 cm



ToeOFF[®]-ortoosiperhe



ToeOFF[®]-ortoosiperhe on ainutlaatuinen sarja riippunilkaortooseja. Tuotekehittäminen ja valmistus tapahtuvat Ruotsissa. ToeOFF, joka oli ensimmäinen esivalmistettu hiilikuitu-riippunilkaortoosi, on lanseerauksestaan eli vuodesta 1997 alkaen valloittanut maailmaa.

ToeOFF-ortoosit eroavat merkittävästi muista markkinoilla olevista AFO-tuotteista dynaamisen funktion ja avoimen rakenteensa ansiosta. Ortoosi tukeutuu säären etuosaan, mikä tekee ToeOFF-ortoosista erityisen.

Pehmeä kantaisku, tukivaiheen stabiliteetti ja dynaamisuus varvastyöntövaiheessa lisäävät potilaan toimintamahdollisuuksia ja helpottavat luonnollista kävelyä.

Tuote on erittäin kevyt, koska valmistusmateriaalina on lasikuitu, Kevlar ja hiilikuitu. Keveys on tärkeä tekijä potilaalle.

ToeOFF-perheeseen kuuluu kolme mallia, joilla on erilaisia dynaamisia ominaisuuksia. Myös koot vaihtelevat ortoosista riippuen.

Ypsilon = lievälle riippunilkalle

ToeOFF = perusortoosi

BlueRocker = vaikealle riippunilkalle

Enemmän tietoa sovituksesta sekä koon ja mallin valinnasta löytyy ToeOFF Clinical Manualista.

POTILAAN
STABILITEETTI
ILMAN ORTOOSIA



NAVIGAIT

NAVIGAIT ortoosi on tarkoitettu avustamaan dorsaalifleksiota henkilöillä, joilla on lievä riippunilikka. Ortoosin pehmustettu muoviosa istuu tukevasti säären etuosaa vasten. Pehmuste voidaan irrottaa ja pestä. Dorsaalifleksiota säädetään säätämällä nauhan yläosaa sekä kiinnittämällä koukku erikoisdille kengän nyöritystä. Ortoosi on muotoiltu niin, että se on huomaamaton housunlahkeen alla. NAVIGAITia on saatavilla kahta eri kokoa. Muoviosan ylä- ja alareunoja voidaan tarvittaessa hieman muotoilla.

Käyttöalue: NAVIGAIT on tarkoitettu antamaan jalalle lisätukea, kun mahdollisuus aktiiviseen dorsaalifleksioon on heikentynyt neurologisten sairauksien kuten, Stroke, MS ja Post- polio syndrooman seurauksena.

Kontraindikaatiot: Henkilöt, joilla ilmenee spatisiteettia tai voimakasta ödeemaa ei tule käyttää Navigaitia.

Muuta: Navigait ei korjaa jalan virheasentoja tai epämuodostumia. Näitä tulee tarpeen mukaisesti hoitaa niihin soveltuvilla kengillä ja/tai pohjallisilla.

Tuotenro.	Puoli	Koko	Muoviosan pituus
28410	Bilat.	Small/Medium	27,5 cm
28410	Bilat.	Large/X-Large	31,5 cm
28412	Varakuminauha koukulla	Small/Medium	
28412	Varakuminauha koukulla	Large/X-Large	
28413	Vahvistettu kuminauha	Small/Medium	
28413	Vahvistettu kuminauha	Large/X-Large	



NAVIGAIT 4-Foot

NAVIGAIT 4-Foot on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä NAVIGAITin kanssa, kun käyttäjällä ei ole kenkiä jalassa. Tuotetta voidaan myös käyttää sandaaleitten tai muiden nauhattomien jalkineiden kanssa. NAVIGAIT 4-Foot vedetään kuin sukka jalkapöydän päälle. Joustavan ja jäykän materiaaliyhdistelmän sekä sisäpuolella olevan silikoniosan ansiosta se pysyy hyvin paikoillaan.

Käyttöalue: Käytetään yhdessä NAVIGAITin kanssa kun käyttäjällä ei ole kenkiä jalassa.

Tuotenro.	Vas/Oik	Koko
28415	Bilat.	Small
28415	Bilat.	Large



UUTUUS!





Ypsilon™

Ypsilon™ on ToeOFF-perheen joustavin riippunilkkortoosi. Sen rakenne on avoin ja se jättää nilkan vapaaksi painamatta tibian harjua. Ypsilon voi olla hyvä valinta henkilölle, jolla lihasvoima on alentunut, koska se mahdollistaa luontevan kävelyn vähällä energialla. Ypsilonin pehmuste koostuu kolmesta osasta. Siipien päälle vedetään päällinen siten, että tarrapuoli jää sisäpuolelle. Soikea, pehmustettu levy kiinnitetään päälliseen. Uusi pehmuste on mukava ja myötäilee säären muotoja. Pehmeä nauha fiksoi ortoosin säärtä vasten.

Käyttöalueet: Riippunilkkä, jossa nilkka on stabiili (lievä spastisuus tai ei spastisuutta ollenkaan). Henkilöt, jotka tarvitsevat enemmän joustavuutta ja vähemmän tukea.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista sekä mallin ja koon valinnasta löytyy ToeOFF Clinical Manualista. Ypsilonin mukana tulee nauhasetti.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28400	Musta	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	33 cm
28400	Musta	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	34 cm
28400	Musta	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	35 cm
28402	Lisänauha		Small-Large			

ToeOFF®

ToeOFF® on ToeOFF-perheen alkuperäinen ja eniten käytetty ortoosi. Tämä perustuki sopii moniin eri indikaatioihin ja erilaisille henkilöille. ToeOFF parantaa riippunilkkapotilaan askellusta estäen riippunilkan jalan heilahdusvaiheessa, vaimentaen kantaiskua ja stabiloiden tukivaiheessa. Lisäksi ortoosi avustaa varvastyöntöä. ToeOFF:ia voi hyvin käyttää osajalka-amputaatioissa. Ortoosi on pehmustettava ennen käyttöä.

Käyttöalueet: Riippunilka yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli ja osajalka-amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Lisätietoa sovituksesta sekä mallin ja koon valinnasta löytyy ToeOFF Clinical Manualista. Kaikkien ToeOFF:in mallien mukana tulee nauhasetti. Mallissa 28375 tarrat on liimattu valmiiksi ortoosiin.

Tuotenumero.	Malli	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28370	ToeOFF	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28370	ToeOFF	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28370	ToeOFF	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28370	ToeOFF	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	43 cm
28370	ToeOFF	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28375	ToeOFF tarroilla	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28375	ToeOFF tarroilla	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28375	ToeOFF tarroilla	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28375	ToeOFF tarroilla	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	43 cm
28375	ToeOFF tarroilla	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28371	Lisänauha ToeOFFiin		X-Small/Small			
28371	Lisänauha ToeOFFiin		Medium/ Large/X-Large			
28377	Lisänauha ToeOFFiin tarroilla		X-Small/Small			
28377	Lisänauha ToeOFFiin tarroilla		Medium/ Large/X-Large			



COMBO



Reisiosa mediaali-
puolelta katsottuna

Multisentriinen
niveli

Hyperekstensoristikko

Hyperekstensoristikon
solki ja säätö

Liitäntäosa ToeOFFiin
tai BlueRockeriin

ToeOFF tai
BlueRocker



Joustava ja ainutlaatuinen ortoosiratkaisu polven hyperekstension johon liittyy riippunilikka.

ToeOFF on vuosien aikana osoittanut hyödyllisyytensä niin kuntoutusprosessissa kuin päivittäisessä elämässäkin. ToeOFF on auttanut monia käyttäjiä joilla on riippunilikka kävelemään paremmin ja lisännyt heidän elämänlaatuaan. ToeOFF on joskus yhdistetty polviortoosiin polvinivelen yliojentumisen estämiseksi. Olemme nyt kehittäneet ortoosiratkaisun, joka yhdistetään ToeOFFiin tai BlueRockeriin.

Combo-ortoosi sovitetaan potilaalle yksilöllisesti. Eri osia voi yhdistää riippuen potilaan koosta ja pituudesta.

- Reisiosan koon valinta riippuu siitä, miten korkealle reiteen se asetetaan. Reisiosa on kuitenkin asetettava vähintään 10 cm:ä polven nivelraon yläpuolelle.
- Liitäntäosan koon valinta on täysin riippuvainen ToeOFFin tai BlueRockerin koosta.
- Hyperekstensoristikon koon määrittää polven leveys.
- Täydellisen ortoosin kokoamiseen tarvitaan kaikki 5 osaa.
- Combo ei ole tarkoitettu potilaille, joiden paino on yli 150 kg ja pituus yli 2 m.

ToeOFF® Combo

Combo on ortoosiosa, joka on kehitetty erityisesti polven hyperekstension hoitoon, kun siihen liittyy riippunilkka. Combo on jatkokappale, joka asennetaan ToeOFF:iin tai BlueRockeriin. Combo-osa on helppo irrottaa riippunilkaortoosista innovatiivisen rakenteensa ansiosta.

Käyttöalueet: Polvinivelen instabiileetti, yliojennus yhdistettynä riippunilkaan, joka johtuu halvauksesta, post-poliosta, MS:stä, neuropatiasta tms. Potilaan paino enintään 150 kg. Potilaan pituus enintään 2 m.

Kontraindikaatiot: Polven ligamenttien totaalinen puuttuminen. Yliojennus enemmän kuin 10°.

Muuta: Mitta 1: Polvimitta M-L patellan keskikohdasta
Mitta 2: Ympärysmitta 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta
Mitta 3: M-L 20 cm patellan keskikohdan yläpuolelta



Tuotenumero.	Malli	Koko	Puoli	Mitta 1	Mitta 2	Mitta 3
28780	Ortoosinivel kiskoilla (pari)	Yksi koko				
28781	Reisiosa	Small	Vas/oik		30-40 cm	11-15 cm
28781	Reisiosa	Medium	Vas/oik		38-50 cm	13-17 cm
28781	Reisiosa	Large	Vas/oik		48-60 cm	15-19 cm
28781	Reisiosa	X-Large	Vas/oik		58-70 cm	17-21 cm
28789	Reisiosa startkit					
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Polven takaosan kangas solkineen	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	SoftKIT (2 kpl)	Small				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Medium				
28783	SoftKIT (2 kpl)	Large				
28783	SoftKIT (2 kpl)	X-Large				
28784	Tibian liitäntäosa	Small				
28784	Tibian liitäntäosa	Medium				
28784	Tibian liitäntäosa	Large/X-Large				



Custom AFO Standard/jäykkä

Kun kannan korkeus, jäykkyys jne. ylittävät tietyt kriteerit, jotka on asetettu ToeOFF/BlueRocker Customille, täytyy tuotteeseen tehdä muutoksia. Kutsomme tätä Custom AFO Standardiksi tai jäykäksi Custom AFO:ksi. Custom AFO Standardin/jäykän voi tilata kahdella tavalla. Voit joko lähettää kipsivalun tai lähettää sähköpostitse Vorum-systeemillä tehdyn skannauksen. Näiden tietojen avulla valmistamme ortoosin, joka mukaillee tavanomaisen ToeOFF:in/BlueRockerin muotoja ja ominaisuuksia.

Käyttöalueet: Katso ToeOFF/BlueRocker.

Kontraindikaatiot: Katso ToeOFF/BlueRocker.

Muuta: Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos haluat lisätietoa kipsivalusta, skannauksesta, lomakkeista tai tilauksen kulusta.

Tuotenro.	Malli	Malli	Valinnan mukaan
28460/ 28480	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Perushinta	
28643/ 28483	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Pohjalevyn leveys	Vastaavasti I koko suurempi tai I koko pienempi
28464/ 28484	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Kannankorkeus	Tasainen, 5, 10, 20, 25 mm, >25 mm
28465/ 28485	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Tibian harjun kevennys	3,5 mm yksilöllinen mitta
28466/ 28486	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Yksilöllinen kevennys	
28467/ 28487	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Varvaskork./ kannankork.	5mm varvaskork./ 5mm kannankork. tai 10mm varvaskork./10mm kannankork.
28468/ 28488	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Jäykkyyssaste A-P koko pohjalevy	Jäykempi, vastaavasti I tai 2 kokoa suurempi
284683/ 28488-3	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Jäykkyyssaste A-P	Standard jalkaterä, jäykempi kantapää, vastaavasti I koko suurempi
284684/ 28488-4	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Jäykkyyssaste A-P	Standard kantapää, jäykempi jalkaterä, vastaavasti I koko suurempi
28469/ 28489	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Jäykkyyssaste A-P koko pohjalevy	Löysempi, vastaavasti I tai 2 kokoa pienempi
28469- 3/28489-3	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Jäykkyyssaste A-P	Standard jalkaterä, löysempi kantapää, vastaavasti I koko pienempi
284694/ 28489-4	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Jäykkyyssaste A-P	Standard kantapää, löysempi jalkaterä, vastaavasti I koko pienempi
28470/ 28490	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Sivuttaisstabiliteetti M-L koko pohjalevy	Jäykempi, vastaavasti I tai 2 kokoa suurempi
28471/ 28491	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Sivuttaisstabiliteetti M-L koko pohjalevy	Löysempi, vastaavasti I tai 2 kokoa pienempi
28472/ 28492	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Fantasy-pinta	Beige, musta, sininen, liila
28473/ 28493	Custom AFO Standard Custom AFO Jäykkä	Jalkapöydän kevennys	Iso virheasento

ToeOFF/BlueRocker Custom

Jos ToeOFF tai BlueRocker eivät sovi potilaalle, voi tilata yksilöllisten mittojen mukaan tehdyn ToeOFF Customin tai BlueRocker Customin. Tilauksen voi tehdä kahdella tavalla. Voit joko lähettää kipsivalun tai lähettää sähköpostitse Vorum-systeemillä tehdyn skannauksen. Näiden tietojen avulla valmistamme ortoosin, joka mukaillee tavanomaisen ToeOFF:in/BlueRockerin muotoja ja ominaisuuksia.

Käyttöalueet: Katso ToeOFF ja BlueRocker.

Kontraindikaatiot: Katso ToeOFF ja BlueRocker.

Muuta: Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos haluat lisätietoa kipsivalusta, skannauksesta, lomakkeista tai tilauksen kulusta.

Tuotenro.	Malli	Malli	Valinnan mukaan
28420	ToeOFF Custom	Perushinta	
28423	ToeOFF Custom	Pohjalevyn leveys	Vastaten 1 kokoa suurempaa tai pienempää
28424	ToeOFF Custom	Kannan korkeus	5,10,15,20,25 mm
28425	ToeOFF Custom	Tibian harjun kevennys	3,5 mm, yksilöllinen mitta
28426	ToeOFF Custom	Yksilöllinen kevennys	
28428	ToeOFF Custom	Jäykkyyssaste A-P	Jäykempi, vastaten 1 tai 2 kokoa suurempaa
28429	ToeOFF Custom	Jäykkyyssaste A-P	Löysempi, vastaten 1 tai 2 kokoa pienempää
28430	ToeOFF Custom	Sivuttaisstabiliteetti M-L	Jäykempi, vastaten 1 tai 2 kokoa suurempaa
28431	ToeOFF Custom	Sivuttaisstabiliteetti M-L	Löysempi, vastaten 1 tai 2 kokoa pienempää
28432	ToeOFF Custom	Fantasy-pinta	Beige, musta, sininen, liila
28440	BlueRocker Custom	Perushinta	
28443	BlueRocker Custom	Pohjalevyn leveys	Vastaten 1 kokoa suurempaa tai pienempää
28444	BlueRocker Custom	Kannan korkeus	5, 10, 20, 25 mm
28445	BlueRocker Custom	Tibian harjun kevennys	3,5 mm, yksilöllinen mitta
28446	BlueRocker Custom	Yksilöllinen kevennys	
28448	BlueRocker Custom	Jäykkyyssaste A-P	Jäykempi, vastaten 1 tai 2 kokoa suurempaa
28449	BlueRocker Custom	Jäykkyyssaste A-P	Löysempi, vastaten 1 tai 2 kokoa pienempää
28450	BlueRocker Custom	Sivuttaisstabiliteetti M-L	Jäykempi, vastaten 1 tai 2 kokoa suurempaa
28451	BlueRocker Custom	Sivuttaisstabiliteetti M-L	Löysempi, vastaten 1 tai 2 kokoa pienempää
28452	BlueRocker Custom	Fantasy-pinta	Beige, musta, sininen, liila





BlueRocker™

BlueRocker™ on ToeOFF-perheen jäykin ja stabiilein riippunilkkortoosi. Tuotteen stabiiliuden ansiosta sekä tasapaino että ryhti paranevat. Lisäksi se antaa varmuutta henkilöille, joilla on heikot reisilihakset. BlueRocker on kehitetty etupäässä henkilöille, joilla on laajempi liikkumisen ongelma. BlueRockeria voi hyvin käyttää osajalka-amputaatioissa. Ortoosi on pehmustettava ennen käyttöä.

Käyttöalueet: Riippunilkkä yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), heikentynyt polvi- ja lantiokontrolli, heikkous tai toimintapuutos alaraajan lihaksissa, heikentynyt tasapaino, molemminpuolinen riippunilkkaoire ja osajalka-amputaatio.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia ja alentunut tuntoherkkyys.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy ToeOFF Clinical Manualista. Blue Rockerin mukana tulee nauhasetti. Tarrat on liimattu ortoosiin.

Tuotenumero.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28405	Sininen	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28405	Sininen	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28405	Sininen	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28405	Sininen	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	43 cm
28405	Sininen	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28377	Lisänauha		X-Small/Small			
28377	Lisänauha		Medium/Large/X-Large			



Ypsilon™-sovitusortoosi

Ypsilon™-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen Ypsilon, mutta siinä on teksti "Not-for-Resale". Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu tuen avulla tai nojapuiden välissä. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenumero.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28401	Musta	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	33 cm
28401	Musta	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	34 cm
28401	Musta	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	35 cm

ToeOFF®-sovitusortoosi

ToeOFF®-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen ToeOFF, mutta siinä on teksti "Not-for-Resale". Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu tuen avulla tai nojapuiden välissä. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28385	Musta	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28385	Musta	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28385	Musta	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28385	Musta	Vas/oik	Large	42-45	27cm	43 cm
28385	Musta	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm



ToeOFF®-sovitussetti

ToeOFF®-sovitussetti sisältää 6 pehmustettua vasemman ja oikean puolista ToeOFF-sovitusortoosia, koot: small, medium ja large. Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuoteno.	Väri	Pakkaus
28386	Musta	6 nimike





BlueRocker™-sovitusortoosi

BlueRocker™-sovitusortoosi on samanlainen kuin tavallinen BlueRocker, mutta siinä on teksti ”Not-for-Resale”. Jos sovitettaessa tuntuu kipua tai ortoosi on epämiellyttävä, on kokeilu lopetettava. Suosittelemme, että ensimmäinen sovitus tapahtuu tuen avulla tai nojapuiden välissä. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön kävelyä harjoiteltaessa ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28406	Sininen	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28406	Sininen	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28406	Sininen	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28406	Sininen	Vas/oik	Large	42-45	27cm	43 cm
28406	Sininen	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm



BlueRocker™ sovitussetti

BlueRocker™-sovitussetissä on 6 kappaletta pehmustettuja BlueRocker™ sovitusortooseja niihin laminoidulla tekstiilillä ”Not-for-Resale”. Setissä on 3 vasemman ja 3 oikeenpuoleista ortoosia koossa small, medium ja large. Sovitussetti toimitetaan Camp-urheilukassissa.

Käyttöalueet: Ortoosit ovat tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön arvioitaessa yksilöllisen ortoosin tarvetta.

Tuoteno.	Väri	Pakkauskoko
28387	Musta	6

UUTUUS!

ToeOFF® Fantasy

ToeOFF® Fantasy on sama tuote kuin alkuperäinen ToeOFF, mutta värillisenä (norsunluu, lila, tummansininen ja musta). Ortoosi on päällystetty kiiltävällä, kitkattomalla materiaalilla, mikä helpottaa vaatteiden liukumista ortoosin pinnalla. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta.

Käyttöalueet: Riippujalka yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy ToeOFF Clinical Manualista.



Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28360	Musta	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28360	Musta	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28360	Musta	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28360	Musta	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	43 cm
28360	Musta	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28361	Tummansininen	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28361	Tummansininen	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28361	Tummansininen	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28361	Tummansininen	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	43 cm
28361	Tummansininen	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28362	Norsunluu	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28362	Norsunluu	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28362	Norsunluu	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28362	Norsunluu	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	43 cm
28362	Norsunluu	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28363	Lila	Vas/oik	X-Small	32-35	21 cm	36 cm
28363	Lila	Vas/oik	Small	35-38	23 cm	38 cm
28363	Lila	Vas/oik	Medium	38-42	24,5 cm	40,5 cm
28363	Lila	Vas/oik	Large	42-45	27 cm	43 cm
28363	Lila	Vas/oik	X-Large	>45	28,5 cm	43 cm
28377	Musta lisänauha		X-Small/Small			
28377	Musta lisänauha		Medium/Large/ X-Large			
28364	Beige lisänauha		X-Small/Small			
28364	Beige lisänauha		Medium/Large/ X-Large			



ToeOFF® lyhyt

Lyhyt ToeOFF® on erikoismalli, jossa on matalampi sääriosa, leveämpi jalkapohjaosa metatarsaalinielien kohdalta ja lyhyempi varvas- ja kantaosa kuin perinteisessä ToeOFF:issa. Ortoosissa tulee käyttää pehmustetta.

Käyttöalueet: Riippujalka yhdistettynä kohtuulliseen spastisuuteen (tai ei spastisuutta ollenkaan), jossain tapauksissa myös heikentynyt polvikontrolli.

Kontraindikaatiot: Voimakas ödeema, diabetes, jossa on haavaumia, alentunut tuntoherkkyys ja voimakas spastisiteetti.

Muuta: Enemmän tietoa sovituksista ja mallin ja koon valinnasta löytyy ToeOFF Clinical Manualista.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohjaosan pituus	Korkeus
28380	Musta	Vas/oik	Small	32-35	21,5 cm	29,5 cm
28380	Musta	Vas/oik	Medium	35-38	23,5 cm	32 cm
28380	Musta	Vas/oik	Large	38-42	25,5 cm	34 cm
28377	Lisänauha		X-Small/Small			
28377	Lisänauha		Medium/Large/X-Large			



SoftKIT™

SoftKIT™ on ToeOFF:ille, BlueRockerille ja Fantasyille tarkoitettu mukava ja taipuisa pehmuste. Tibiaharjun kuormitusta voi keventää asettamalla neopreeniliuskat ortoosin ja pehmusteen väliin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta, kaksi neopreeniliuskaa ja itsekiinnittyvät Mikrofix-tarrat.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
28390	Musta	Sopii ToeOFF:iin, Fantasyyn ja BlueRockeriin	X-Small- Large/X-Large
28391	Musta	Sopii ToeOFF:in lyhyeen malliin	Small-Large
28396	Musta	Mikrofix softKIT:iin	X-Small/Small
28396	Musta	Mikrofix softKIT:iin	Medium/Large/X-Large
28395	Musta	Neopreeniliuskat	X-Small/Small
28395	Musta	Neopreeniliuskat	Medium/Large/X-Large

softKIT Beige

SoftKIT Beige on mukavantuntuinen ja sileäpintainen pehmuste, joka on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Fantasy Ivoryn kanssa mutta sopii myös ToeOFFiin ja BlueRockeriin. Tibianharjun rasiusta voidaan helposti lievittää käyttämällä neopreeniliuskoja ortoosin ja pehmusteen välillä. Jokainen pakkaus sisältää kaksi pehmustetta, kaksi neopreeniliuskaa ja itsekiinnittyvää Microfixiä.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
28365	Beige	Fantasy Ivoryyn, ToeOFFiin, BlueRockeriin	X-Small
28365	Beige	Fantasy Ivoryyn, ToeOFFiin, BlueRockeriin	Small
28365	Beige	Fantasy Ivoryyn, ToeOFFiin, BlueRockeriin	Medium
28365	Beige	Fantasy Ivoryyn, ToeOFFiin, BlueRockeriin	Large



UUTUUS!



ComfortKIT™

ComfortKIT™ on uusi, mukava pehmuste ToeOFF:ille ja BlueRockerille. Se sopii erityisen hyvin potilaille, joilla on luiset sääret tai herkkä iho, mutta myös niille, joilla on korkea aktiivisuustaso. ComfortKIT:in sisäosa on valmistettu polyuretaanista ("muistivaahto"), joka muotoutuu käyttäjän säären muotojen mukaisesti. Kun ortoosi riisutaan, pehmusteen alkuperäinen muoto palautuu.

Tuotenro.	Väri	Malli	Koko
28398	Musta	Sopii ToeOFF:iin, Fantasyyn ja BlueRockeriin	X-Small
28398	Musta	Sopii ToeOFF:iin, Fantasyyn ja BlueRockeriin	Small
28398	Musta	Sopii ToeOFF:iin, Fantasyyn ja BlueRockeriin	Medium
28398	Musta	Sopii ToeOFF:iin, Fantasyyn ja BlueRockeriin	Large/X-Large
28396	Musta	Mikrofix SoftKIT:iin ja ComfortKIT:iin	X-Small/Small
28396	Musta	Mikrofix SoftKIT:iin ja ComfortKIT:iin	Medium/Large/X-Large



SoftSHELL™

SoftSHELL™ on ToeOFF:ille ja BlueRockerille tarkoitettu pehmuste, joka puetaan ortoosin päälle. Ortoosin väriä ja pintarakennetta voi näin helposti muuttaa. SoftSHELL:in sisäpinta on samaa materiaalia kuin tavallinen SoftKIT ja ulkopinta sileää Lycra-materiaalia joka ei tartu kiinni vaatteisiin. Pakkaus sisältää yhden SoftSHELL:in, kaksi neopreeniliuskaa sekä Microfix-tarranauhaa.

Tuotenro	Väri	Koko
28393	Beige	XSmall – Xlarge
28394	Ruskea	XSmall – Xlarge



UUTUUS!



KiddieGAIT™



Lapset, joilla on neurologinen vamma tai lievä kehitysvamma tarvitsevat usein jonkinlaisen alaraajan ortoosin. Näiden lasten lihastonuksessa saattaa olla vaihteluita, minkä takia kävely on suuri haaste. Anna lapsen kokeilla ortoosia, joka auttaa pieniä jalkoja toimimaan luonnollisella tavalla ohjaten biomekaanisesti oikeanlaiseen kävelyyh.

- Hiilikuitukomposiitti asettuu tibiaa vasten. Dynaaminen pohjalevy jättää kantapään avoimeksi.
- Ortoosin säären etuosaa vasten tuleva tuki auttaa myös muissa proksimaalisissa ongelmassa kuten polven ekstensiossa tai "koukkukävelyssä".
- Ortoosi on suunniteltu käytettäväksi yhdessä yksilöllisen pohjallisen tai ortoosin kanssa, mikä auttaa kontrolloimaan maan vetovoiman vaikutuksia.

INDIKAATIOT

- riippuniikka • propioseptiikan häiriöstä aiheutuvat kävelyn muutokset
- varvaskävely, johon ei liity jalkapöydän jäykkyyttä
- matalan tonuksen aiheuttama "kyykäkävely" (lonkan/polven/nilkan fleksio)
- Spina Bifida • Cerebral Pares • lihasdystrofia • MMC

KONTRAINDIKAATIOT

- nilkanivelen rajoittunut liikkuvuus (passiivinen dorsaalifleksio oltava vähintään 5° nilkan keskiasennosta)
- liian jäykät jalan rakenteet • spastinen Quadricepslihas
- polven ja/tai nilkan rakenteelliset virheasennot

RAJOITUKSET

- polven hyperekstensio, joka ei ole korjattavissa

KiddieGAIT pitää aina yhdistää yksilölliseen pohjalliseen tai ortoosiin jalan asennon kontrolloimiseksi. On tärkeää, että jalka on kuormitettuna mahdollisimman toiminnallinen. Jalan tavallisimmat virheasennot kuten pronaatio, supinaatio, pes varus ja pes valgus korjataan pohjallisella. Pohjallisessa tulisi olla syvä kantakuppi, jotta se stimuloi kantapää-varvaskävelyä. Alla olevat ovat vain suosituksia, kun jalkaan liittyvät ongelmat ovat:

- lieviä = käytä stabiilia pohjallista, jonka kantakuppi on tarpeeksi syvä
- kohtalaisia = käytä stabiilia pohjallista, jonka kantakuppi ei nouse nilkkaa korkeammalle
- vaikeita ja/tai akillesjänne on kireä = käytä SMO:ta (supramalleolaarinen ortoosi) tai SureStepia



SureStep

Supramalleolaarinen ortoosi

KiddieGAIT™

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Pohjalevyn pituus	Korkeus
28372	Musta	Vas/oik	Baby Small	11 cm	15 cm
28372	Musta	Vas/oik	Baby Medium	12,5 cm	18 mm
28372	Musta	Vas/oik	Baby Large	14 mm	20 mm
28372	Musta	Vas/oik	Small	16 cm	22 cm
28372	Musta	Vas/oik	Medium	18 cm	25,7 cm
28372	Musta	Vas/oik	Large	20 cm	29,5 cm
28373	Lisänauha		Small		
28373	Lisänauha		Medium		
28373	Lisänauha		Large		
28373	Lisänauha		Baby Small		
28373	Lisänauha		Baby Medium		
28373	Lisänauha		Baby Large		



KiddieGAIT™-sovitusertoosi

KiddieGAIT™-sovitusertoosissa on teksti ”Not-for-resale”. Sovitusertoosia tulee käyttää vain apuna sovituksessa ennen oikean ortoosin valintaa. Ortoosi on valmiiksi pehmustettu.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Pohjalevyn pituus	Korkeus
28382	Musta	Vas/oik	Small	16 cm	22 cm
28382	Musta	Vas/oik	Medium	18 cm	25,7 cm
28382	Musta	Vas/oik	Large	20 cm	29,5 cm
28382	Musta	Vas/oik	Baby Small	11 cm	15 cm
28382	Musta	Vas/oik	Baby Medium	12,5 cm	18 cm
28382	Musta	Vas/oik	Baby Large	14 cm	20 cm



KiddieGait™-sovitussetti

KiddieGait™-sovitussetti sisältää 6 pehmustettua vasemman ja oikean puolista sovitusertoosia, koot: Small, Medium ja Large. Ortooseissa on teksti ”Not-for-Resale”. Sovitussetti toimitetaan Camp-laukussa.

Käyttöalueet: Ortoosi on tarkoitettu vain lyhytaikaiseen käyttöön ennen henkilökohtaisen ortoosin valintaa.

Tuotenro.	Väri	Pakkaus	
28383	Musta	KiddieGAIT, Oik+Vas Small,Medium,Large nimike	6
28381	Musta	KiddieGAIT Baby, Oik+Vas Small, Medium, Large nimike	6





KiddieGAIT™ softKIT™

KiddieGait™softKIT™ on mukava ja joustava pehmuste KiddieGAIT:iin. Pakkaus sisältää kaksi pehmustetta ja itseliimautuvat MikroFix-tarrat.

Tuotenro.	Väri	Koko
28397	Musta	Baby Small
28397	Musta	Baby Medium
28397	Musta	Baby Large
28397	Musta	Small
28397	Musta	Medium
28397	Musta	Large
28409	MikroFix KiddieGait softKIT:iin	Small-Large



KiddieGAIT SoftSHELL

SoftSHELL on KiddieGAIT:in pehmuste, joka peittää koko ortoosin. Sisäpuoli on valmistettu samasta materiaalista kuin SoftKIT. Ulkopuoli on kiiltävää, kuvioitua lycraa, jonka ansiosta esim. housut liukuvat helpommin ortoosia vasten.

Muuta: Kuviot voivat ajoittain vaihdella.

Tuotenro.	Väri	Kuvio	Koko
28388	Punainen	Autokuvio	Small
28388	Punainen	Autokuvio	Medium
28388	Punainen	Autokuvio	Large
28389	Vaal.pun.	Sydänkuvio	Small
28389	Vaal.pun.	Sydänkuvio	Medium
28389	Vaal.pun.	Sydänkuvio	Large

KiddieGAIT SoftSHELL Baby

SoftSHELL Baby on KiddieGAIT Baby:in tarkoitettu pehmuste. KiddieGAIT SoftSHELL tulee tilata yhdessä saman kokoisen normaalin SoftKITin kanssa. SoftSHELLin ulkopuoli on kiiltävää, kuvioitua lycra-materiaalia, joka on mukava piriste ortoosille ja saa materiaalinsa ansiosta vaatteet liukumaan helpommin ortoosia vasten. Tässä mallissa kiinnitysnauhat ovat yhdistetty tuotteeseen.

Muuta: Kuviot voivat ajoittain vaihdella.

Tuoteno.	Väri	Malli	Koko
28388	Sininen	Eläinkuvio	Baby Small
28388	Sininen	Eläinkuvio	Baby Medium
28388	Sininen	Eläinkuvio	Baby Large
28389	Vaal.pun.	Tähtikuvio	Baby Small
28389	Vaal.pun.	Tähtikuvio	Baby Medium
28389	Vaal.pun.	Tähtikuvio	Baby Large



Non Slip -materiaali

Luistamaton materiaali, joka on korkean kitkansa ansiosta ihanteellinen pinoille, jotka altistuvat kovalle kulutukselle. Materiaali on kehitetty käytettäväksi erityisesti KiddieGAIT:in pohjalevyllä, jottei esim. SureStep-ortoosi liukuisi ortoosin paljaalla pinnalla.

HUOM! Materiaalia ei tule käyttää suoraan ihoa vasten.

Tuoteno.	Väri	Leveys	Pituus
28411	Musta	14 cm	1 m





SureStep valmistetaan USA:ssa mittojen mukaan. Jos sinulla on kysyttävää mitanotosta, ota yhteyttä apuvälinetekniikkoon tai Camp Scandinaviaan.

SureStep

SureStep on lapsille tarkoitettu, dynaaminen jalkaortoosi. Se kontrolloi jalan ja nilkan pronaatiota lapsilla, joilla on matala tonus. Koordinaatio ja tasapaino paranevat. Voi käyttää tavallisen kengän kanssa. SureStep on valmistettu erittäin kevyestä ja ohuesta muovista.

- Koordinaatio ja tasapaino paranevat
- Alaraajojen kuormitus normalisoituu
- Motorinen kontrolli paranee
- Voidaan käyttää tavallisen kengän kanssa
- Valmistetaan yksilöllisesti mittojen mukaan
- Valmistettu erittäin kevyestä ja ohuesta muovista

Käyttöalueet: Kohtalainen/suuri jalkaterä pronaatio (plano-valgus) yhdessä jonkin seuraavista kanssa:

- matala tonus
- löysät ligamentit
- viivästynyt kävely, huono tasapaino, väsyneet jalat, liikkumisen välttäminen

Kontraindikaatiot:

- >38 kg
- Kontraktuurat - jalan tulee saavuttaa neutraaliasento (90°) passiivisessa manipulaatiossa

- kohonnut tonus
- spastisiteetti

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28633	Mittatilaus	Pari
28634	Mittatilaus	Kappale
28635	Mittalaatikko	
93300	Lainattava mittalaatikko	



Muuta: BigShot valmistetaan USA:ssa kipsivalun ja mittojen mukaan. Yhdessä tilauslomakkeen kanssa Camp Scandinavialle lähetetään ei modifioitu negatiivinen kipsi. Kipsivalun tulee olla 90 asteen kulmassa, sekä kantapää ja päkiä neutraalissa asennossa. Jos sinulla on kysyttävää mitanotosta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

SureStep BigShot

Kun lapset siirtyvät SureStepistä muuhun ortoosiin, tarvitsevat monet heistä edelleen maksimaalista tukea ja stabiiliteettia. Heitä varten on BigShot. Se on yhtä joustava kuin SureStep ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kasvaneet ulos SureStepistä tai joiden paino ylittää 38 kg. Ortoosi on 2-kerroksinen. Pehmeä, silikonia muistuttava sisus on mukava jalalle ja joustava muovikuori antaa sopivan tuen.

Käyttöalueet: Kohtalainen/suuri jalkaterän pronaatio (plano-valgus) yhdessä jonkin seuraavista kanssa:

- matala tonus
- löysät ligamentit
- viivästynyt kävely, huono tasapaino, väsyneet jalat, liikkumisen välttäminen
- paino >38 kg

Kontraindikaatiot:

- kontraktuurat - jalan tulee saavuttaa neutraaliasento (90°) passiivisesti
- kohonnut tonus
- spastisiteetti

Tuotenro.	Malli	Pakkaus
28636-0	BigShot kipsivalu + mitta	Pari
28636-1	BigShot kipsivalu + mitta	Kappale

Tilauslomake - SureStep/BigShot

Invoice to: Camp Scandinavia
 Address: KARBINGATAN 38.254 67 HELSINGBORG
 Country: SWEDEN
 Contact: Susanne Persson / Ann-Louise Christensen
 Tel: +46 42 25 27 19/25 27 21

PO: _____


ORDER NR. _____

Tilaja: _____
 Proteesipaja: _____ Deliver to: _____
 Maa: _____ Address: _____ Country: _____

Patient information

Patient ID _____ Sex: Male Female
 Age: _____ Right foot Left foot Bilateral
 Weight: _____ (kg)
 Diagnosis: _____

SMO Measurement form

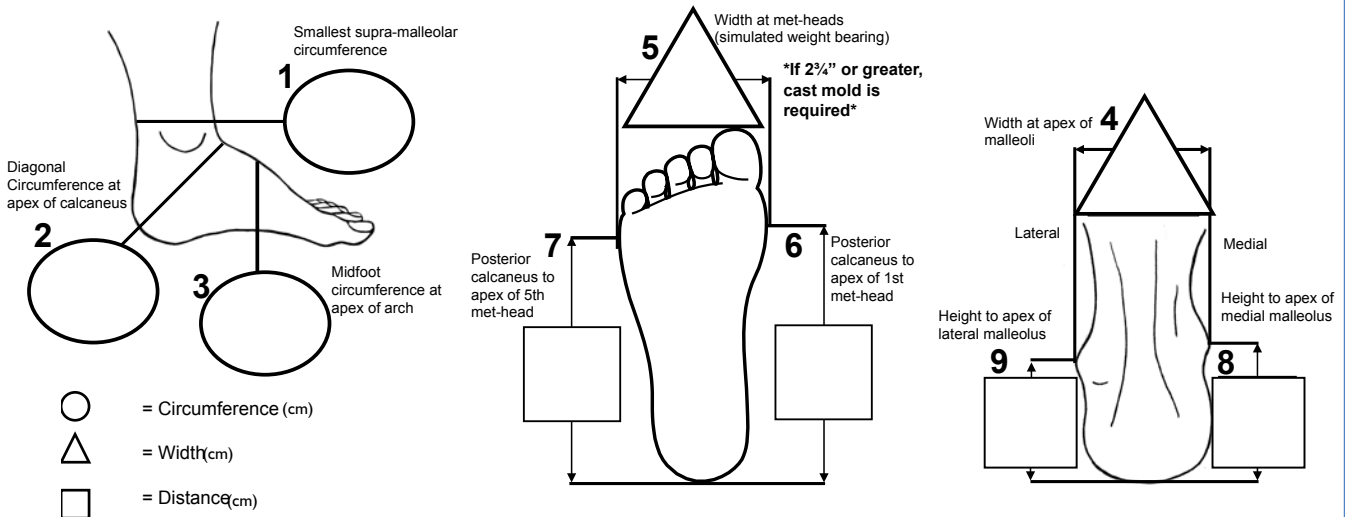


Pattern Options (Circle one)

Strap colours: White Black Royal Blue Light Blue
 Pink Purple Red


BabySports2 Beach Blossom Bugs Busy Bees Butterflies
 Construction Dinosaurs Farm Friends Happy Daisies Jungle Juggle Ocean Life
 Skateboard Sports I Traffic Soup Camo Pink Camo Pink Swirls

SureStep full footplate reverse trimlines/ clubfoot mod forefoot abduction ____°
 SureStep/BigShot(>80 lbs, 40Kg) - Cast mold measurements required for the SureStep BigShot

SureStep/BigShot – kuvion valinta

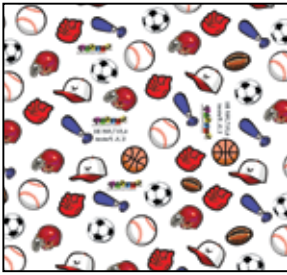

Babysports 2

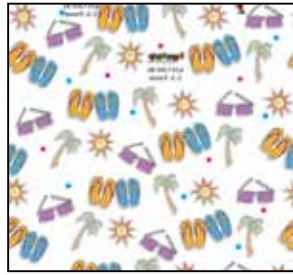


Beach



Blossom



Bugs

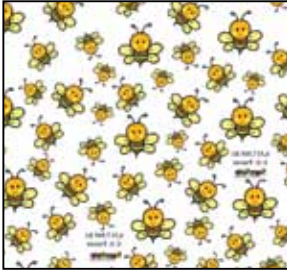

Busy bees



Butterflies




Construction



Dinosaurs



Farm friends

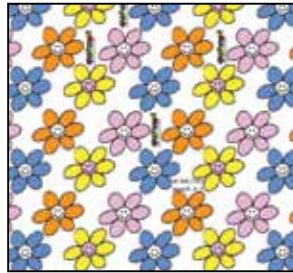

Happy daisies



Jungle



Ocean life



Skateboard



Sports I



Traffic soup



Pink Swirls



Camo



Pink Camo

Strap color

Pink Red Purple Black White

Light Blue Royal Blue

Dynafo riippunilkkaortoosi

Polypropeenista valmistettu riippunilkkaortoosi yksinkertaisella tarranauhakiinnityksellä. Ortoosi päättyy metatarsaaliniveleen, jotta kenkään jäisi enemmän tilaa. Ortoosia voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimella.

Käyttöalueet: Lievä riippunilkka.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Kengän koko
71295	Valkoinen	Vas/oik	Small	36-39
71295	Valkoinen	Vas/oik	Medium	40-42
71295	Valkoinen	Vas/oik	Large	43-46
71295	Valkoinen	Vas/oik	X-Large	47-49



Prim riippunilkkaortoosi

Polypropeenista valmistettu riippunilkkaortoosi. Pohkeen ympärillä on pehmuste, joka kiinnittyy ortoosiin tarralla.

Käyttöalueet: Lievä riippunilkka.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Pituus	Korkeus
71296	Valkoinen	Vas/oik	Small	23 cm	29 cm
71296	Valkoinen	Vas/oik	Medium	24,5 cm	31 cm
71296	Valkoinen	Vas/oik	Large	26 cm	33 cm
71296	Valkoinen	Vas/oik	X-Large	27,5 cm	35 cm



Mini Walker

Mini Walker on tarkoitettu stabiileiden jalan ja nilkan murtumien hoitoon. Se antaa lapselle mukavamman vaihtoehdon kipsille. Mini Walker on valmistettu kestävästi aktiivisen lapsen liikkumista. Kiskot ovat kevyttä nylonia. Pehmuste voidaan irrottaa ja pestä tarvittaessa. Tuote ei sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat.

Tuotenro.	Väri	Vas/Oik	Koko	Ikä
45830	Harmaa	Bilat.	Small	1-2 vuotta
45830	Harmaa	Bilat.	Medium	2 1/2-6 vuotta
45830	Harmaa	Bilat.	Large	6 1/2-9 vuotta



UUTUUS!





Camp Fixed Ankle Walker

Nivelöimätön Walker (saapasortoosi) jalan immobilisoimiseksi. Walker on neutraalissa kulmassa (90°), siinä on alumiinikiskot ja rullapohja, jossa on luistamaton pinta. Kaikissa nauhoissa on kääntösoljet. Tibiaosan kolmea nauhaa voidaan siirtää optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan nyrjähdys, kantapään alueen ruptuurat ja pehmytkudosvauriot.

Muuta: Mukana tulee pehmuste, nauhat ja lisätynyt, mutta ne voi ostaa myös erikseen.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Sisäpohjallisen pituus
28330	Musta	Bilat.	Small	n. 25 cm
28330	Musta	Bilat.	Medium	n. 27 cm
28330	Musta	Bilat.	Large	n. 29 cm
28322	Pehmuste ja nauhat		Small	
28322	Pehmuste ja nauhat		Medium	
28322	Pehmuste ja nauhat		Large	



Static Walker

Nivelöimätön Walker jalan immobilisoimiseksi. Walker on neutraalissa kulmassa (90°), siinä on muovikiskot ja rullapohja, jossa on luistamaton pinta. Kaikissa nauhoissa on kääntösoljet. Mukana tulee neljä irtonaista pehmustetta.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan nyrjähdys, kantapään alueen ruptuurat ja pehmytkudosvauriot.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Sisäpohjan pituus
63100	Musta	Bilat.	X-Small	n. 22 cm
63100	Musta	Bilat.	Small	n. 24 cm
63100	Musta	Bilat.	Medium	n. 27 cm
63100	Musta	Bilat.	Large	n. 29 cm
63100	Musta	Bilat.	X-Large	n. 31 cm
63101	Pehmuste		X-Small/Small	
63101	Pehmuste		Medium	
63101	Pehmuste		Large/X-Large	
28335	Kantakiila			

Pin Cam Walker

Nivelöity Walker jalan immobilisoimiseksi. Walkerissa on säädettävä nivel, joka voidaan lukita tiettyyn asentoon, säätää liikkuvaksi halutulla liikeradalla tai jättää vapaa liikkuvuus. Liikelaajuutta voidaan säätää 45° plantarifleksion ja 45° dorsaalifleksion välillä 7,5° välein. Walkerissa on alumiinikiskot ja rullapohja, jossa on luistamaton pinta. Mukana tulee kaksi muovilastaa murtumille, jotka tarvitsevat enemmän stabiliteettia. Kaikissa nauhoissa on kääntösoljet. Tibiaosan nauhoja voidaan siirtää optimaalisen istuvuuden saavuttamiseksi.

Käyttöalueet: Stabiilit jalan ja nilkan murtumat, akuutti nilkan nyrjähdys, kantapään alueen ruptuurat ja pehmytkudosvauriot.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Sisäpohjan pituus
45820	Musta	Bilat.	Small	n. 24 cm
45820	Musta	Bilat.	Medium	n. 27 cm
45820	Musta	Bilat.	Large	n. 29 cm
45821	Pehmuste		Small	
45821	Pehmuste		Medium	
45821	Pehmuste		Large	
28335	Kantakiila			



Kantakiila Walkeriin

Kantakiilaa käytetään Walkerissa silloin, kun kaivataan lisää plantariflexiota. Kantakiila muodostuu useista kiiloista, jotka kiinnittyvät toisiinsa kaksipuolisen teipin avulla. Korkeutta voidaan säätää asteittain poistamalla tai lisäämällä kiiloja. Sopii Static Walkeriin, Pin Cam Walkeriin sekä CAMP Low Profile Walkeriin.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko
28335	Musta	Bilat.	Yksi koko



