



**Käsi- ja rannetuet**

[www.camp.fi](http://www.camp.fi)



**Mittaus:** Mitta volaaripuolelta MCP- ja DIP-nivelen välistä.

## SOF-Stretch lyhyt dynaaminen sormiortoosi

Dynaaminen lasta ojentaa PIP-niveltä. Ortoosia käytetään lisäämään ekstensiota PIP-nivelessä ja vähentämään kireyttä fleksorijänteissä sekä korjaamaan sormen koukkuvirheasentoa. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta. Bilateraalaisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi ja jos halutaan tehdä tilaa mahdolliselle ödeemalle. Lyhyt ortoosi sallii MCP-niveliä täydellisen liikkuvuuden.

**Käyttöalueet:** Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51405	Valkoinen	X-Small	3,8 cm
51405	Valkoinen	Small	4,4 cm
51405	Valkoinen	Medium	5,1 cm
51405	Valkoinen	Large	5,7 cm
51405	Valkoinen	X-Large	7 cm



**Mittaus:** Mitta volaaripuolelta distaalien kämmenpoimun ja DIP-nivelen välistä.

## SOF-Stretch dynaaminen sormiortoosi

Dynaaminen lasta ojentaa PIP-niveltä. Ortoosia käytetään lisäämään ekstensiota PIP-nivelessä ja vähentämään kireyttä fleksorijänteissä sekä korjaamaan sormen koukkuvirheasentoa. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta. Bilateraalaisia jousia voidaan taivuttaa vastuksen säätämiseksi ja jos halutaan tehdä tilaa mahdolliselle ödeemalle.

**Käyttöalueet:** Fleksiokontraktuurat ja PIP-nivelen jäykkyys.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51400	Valkoinen	X-Small	5,1 cm
51400	Valkoinen	Small	6,4 cm
51400	Valkoinen	Medium	7,6 cm
51400	Valkoinen	Large	8,9 cm
51400	Valkoinen	X-Large	10,2 cm
51401	Musta	X-Small	5,1 cm
51401	Musta	Small	6,4 cm
51401	Musta	Medium	7,6 cm
51401	Musta	Large	8,9 cm
51401	Musta	X-Large	10,2 cm

## SOF-Stretch dynaaminen spiraaliortoosi

Ekstensiolasta (Capener) avustaa ekstensiota PIP-nivelessä vähentäen nivelen jäykkyyttä ja kontraktuuria. Spiraalijouset asettuvat PIP-niveleen molemmille puolille ja säilyttävät näin venytysvoiman samana kaikissa asennoissa. Jouset voidaan löysätä tai kiristää haluttuun vastukseen. Anatomisesti muotoillut tyynyt jakavat ja vähentävät painetta.

**Käyttöalueet:** Fleksiokontraktuurat ja PIP-niveleen jäykkyys. Sopii hyvin kun kontraktuura on enintään 45°. Ei luutuneille kontraktuurille.

Tuotenro.	Väri	Koko	Mitta
51410	Valkoinen	Small	6,4 cm
51410	Valkoinen	Medium	7 cm
51410	Valkoinen	Large	7,6 cm
51410	Valkoinen	X-Large	8,3 cm




**Mittaus:** Mitta volaaripuolelta distaalin kämmenpoimun ja DIP-niveleen välistä.

## Stax sormiortoosi

Immobilisoi DIP-niveleen ekstensioon ja sallii samalla PIP-niveleen täyden liikkuvuuden. Käytetään yleensä ilman pehmustetta ja kiinnitetään keskimmäiseen falangiin itsekiinnittyvällä nauhalla (ostettava erikseen).


Tuotenro.	Koko	Pituus	Halkaisija	Pakkaus
51421	1	5,3 cm	1,5 cm	12 nimike
51421	2	5,1 cm	1,7 cm	12 nimike
51421	3	5,8 cm	1,9 cm	12 nimike
51421	4	6,3 cm	1,9 cm	12 nimike
51421	5	5,8 cm	1,9 cm	12 nimike
51421	5,5	6,1 cm	2,3 cm	12 nimike
51421	6	6,4 cm	2,3 cm	12 nimike
51421	7	6,2 cm	2,5 cm	12 nimike
51420	30 erikokoista sormilastaa muovilaatikossa			30 nimike

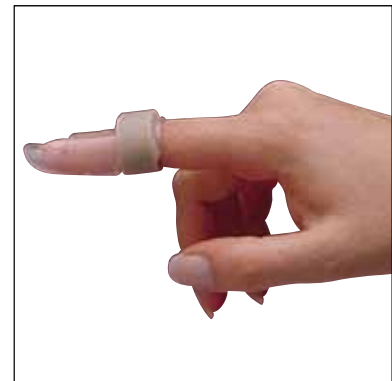

## Buddy strap

Kaksoisside, joka pitää kaksi sormea lujasti yhdessä. Tarranauha voidaan leikata halutun mittaiseksi.

Tuotenro.	Koko	Leveys	Pituus	Pakkaus
51430	Yksi koko	1,3 cm	12,7 cm	5 nimike

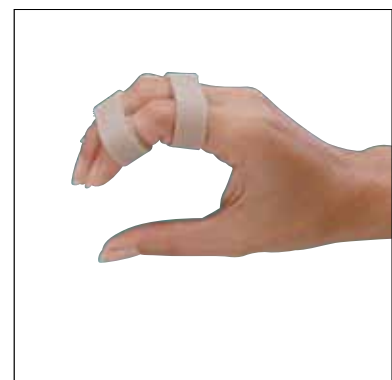



## Selection peukalo-ortoosi Soft

Sileä ja joustava peukalo-ortoosi, joka vähentää rasitusta peukalonivelissä, sekä suojaa niitä hieman. Selectionin pehmeä (soft) peukalo-ortoosi on valmistettu sileästä, modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja nivelitukia. Ortoosi voidaan leikata haluttuun muotoon.

**Käyttöalueet:** Reumasairaudet, rasitusvammojen ehkäisy, peukalonivelen yliojenus, CMC-I artroosin lievitys

Tuotenro.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
35200	Musta	Soft	Vas/Oik	Small	< 15 cm
35200	Musta	Soft	Vas/Oik	Medium	15 - 17 cm
35200	Musta	Soft	Vas/Oik	Large	> 17 cm
35201	Beige	Soft	Vas/Oik	Small	< 15 cm
35201	Beige	Soft	Vas/Oik	Medium	15 - 17 cm
35201	Beige	Soft	Vas/Oik	Large	> 17 cm



## Selection peukalo-ortoosi Rigid

Sileä ja joustava peukalo-ortoosi, joka antaa lisätukea peukalon ympärillä oleviin rakenteisiin, sekä vähentää rasitusta peukalonivelissä ja antaa lisää tukea niille. Ortoosi myös tukee ja suojaa peukalon MCP-nivelä. Selectionin jäykkä (rigid) peukalo-ortoosi on valmistettu sileästä, modernista, ihoa muotoilevasta materiaalista, joka antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta lihaksia ja nivelitukia. Ortoosi voidaan leikata haluttuun muotoon.

**Käyttöalueet:** Reumasairaudet, rasitusvammojen ehkäisy, peukalonivelen yliojenus, CMC-I artroosin lievitys

Tuotenro.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
35202	Musta	Rigid	Vas/Oik	Small	< 15 cm
35202	Musta	Rigid	Vas/Oik	Medium	15 - 17 cm
35202	Musta	Rigid	Vas/Oik	Large	> 17 cm
35203	Beige	Rigid	Vas/Oik	Small	< 15 cm
35203	Beige	Rigid	Vas/Oik	Medium	15 - 17 cm
35203	Beige	Rigid	Vas/Oik	Large	> 17 cm

## Pehmeä peukalotuki, lyhyt ja pitkä

Neopreenista valmistettu pehmeä ja elastinen peukalotuki, joka suojaa ja vähentää peukalon rasitusta sekä lämmittää. Tukea on saatavana kahta pituutta, joista pitkä malli tukee rannetta kevyesti. Levossa peukalo pysyy perusasennossa kuormittamatta lihaksia tai jänteen kiinnitysalueita. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

**Käyttöalueet:** Reumatologiset sairaudet, rasituksen vähentäminen, peukalon ja ranteen yliliikkuvuus.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28548	Beige	Lyhyt	Vas/oik	Small	<17 cm
28548	Beige	Lyhyt	Vas/oik	Large	>17cm
28558	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Small	<17 cm
28558	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Large	>17 cm
28549	Beige	Pitkä	Vas/oik	Yksi koko	
28559	Sininen	Pitkä	Vas/oik	Yksi koko	



## Basic peukalotuki, lyhyt ja pitkä

Tuki, jonka muovilastat tukevat peukaloa ja ympärillä olevia kudoksia. Materiaali on leikattu viistoon parhaan istuvuuden ja elastisuuden saavuttamiseksi. Peukalon ympäryys on avoin ja säädettävissä. Pitkä malli on 2 cm lyhyttä mallia pidempi ja tukee näin rannetta. Lisätukea haluttaessa voidaan tuen kanssa käyttää erillisiä rannenauhoja 27447 tai 27448.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
27443	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	X-Small	<12 cm
27443	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Small	11-14 cm
27443	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Medium	14-17 cm
27443	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Large	17-20 cm
27443	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	X-Large	20-23 cm
27444	Sininen	Pitkä	Vas/oik	X-Small	<12 cm
27444	Sininen	Pitkä	Vas/oik	Small	11-14 cm
27444	Sininen	Pitkä	Vas/oik	Medium	14-17 cm
27444	Sininen	Pitkä	Vas/oik	Large	17-20 cm
27444	Sininen	Pitkä	Vas/oik	X-Large	20-23 cm





## Tee Pee™-peukalo-ortoosi

TeePee™-peukalo-ortoosissa on kolme muotoiltavaa alumiinilastaa (sentraalinen, dorsaalinen ja palmaarinen). Ortoosi stabiloi peukalon hyvin. Valmistettu perforoidusta ja ilmavasta mokkajäljelmästä. Hengittävä vuori.

**Käyttöalueet:** Posttraumaattinen käyttö, reumatologiset sairaudet ja instabiliteetti.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Pituus ranteesta peukalon IP-niveleen
28560	Musta	Bilat.	X-Small	<9 cm
28560	Musta	Bilat.	Small	9-10 cm
28560	Musta	Bilat.	Medium	10-11,5 cm
28560	Musta	Bilat.	Large	11,5-13 cm
28560	Musta	Bilat.	X-Large	>13 cm



## CMC-peukalo-ortoosi

Tätä peukalo-ortoosia käytetään tukemaan CMC-nivelteä instabiliteetissä ja kulumisissa. Pehmustettu lasta ja elastinen kiinnitysnauha antavat peukalon tyveen tarvittavan kompression ja auttavat stabiloimaan CMC-nivelteä.

**Käyttöalueet:** Posttraumaattinen käyttö, reumatologiset sairaudet ja instabiliteetti.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
28561	Musta	Vas/oik	X-Small	<14 cm
28561	Musta	Vas/oik	Small	14-15,5 cm
28561	Musta	Vas/oik	Medium	15,5-17,5 cm
28561	Musta	Vas/oik	Large	17,5-19,5 cm
28561	Musta	Vas/oik	X-Large	>19,5 cm



## Sporlastic peukalo-ortoosi

Muovista valmistettu, stabiili peukalo-ortoosi, jonka tehtävänä on immobilisoida peukalo toiminnalliseen asentoon. Ortoosin kiinnittävä tarranauha on joustava. Mukana tulee high-tech-kuidusta valmistettu vuorikangas, joka imee kosteuden ja toimii pehmusteena.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, post-operatiivisesti ja instabiliteetissa.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
28545	Beige	Vas/oik	Small	<17 cm
28545	Beige	Vas/oik	Medium	17-19 cm
28545	Beige	Vas/oik	Large	>19 cm



## Selection rannetuki

Selection pehmeä ja joustava rannetuki on valmistettu sileästä, modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Selectionin pehmeässä rannetuessa on muotoiltu muovinen tukilasta volaaripuolella ja joustavampi suora muovilasta dorsaalipuolella. Tukilastat voidaan irrottaa. Kaksiosainen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalo-nauhaa voi myös säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla optimaalisen istuvuuden löytämiseksi.

**Käyttöalueet:** Kun rannetta tarvitsee suojata rasitukselta esim. tulehdukset, työssä aiheutuvat rasitusvammat sekä reumaattiset tai rappeutumiseen liittyvät muutokset.

Tuotenro.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
35204	Musta	Soft	Vas/Oik	Small	11 - 14 cm
35204	Musta	Soft	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm
35204	Musta	Soft	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm
35204	Musta	Soft	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm



## Selection peukalorannetuki

Selection pehmeä ja joustava rannetuki on valmistettu sileästä, modernista, ihoa myötäilevästä materiaalista, joka antaa ihon hengittää, sekä tuntuu mukavalta sitä vasten. Peukalo-osa antaa tukevan materiaalin ansiosta hyvän tuen peukalolle, sekä pitää sen neutraalissa asennossa. Selectionin peukalo-rannetuessa on muotoiltu muovinen tukilasta volaaripuolella ja joustavampi suora muovilasta dorsaalipuolella. Tukilastat voidaan irrottaa. Kaksiosainen kiinnitys tekee tuen avaamisen ja sulkemisen helpoksi yhdellä kädellä. Peukalo-osan voi myös säätää. Materiaalia voi muotoilla saksilla optimaalisen istuvuuden löytämiseksi.

**Käyttöalueet:** Kun rannetta ja peukaloa tarvitsee suojata rasitukselta esim. tulehdukset, työssä aiheutuvat rasitusvammat, sekä reumaattiset tai rappeutumiseen liittyvät muutokset.

Tuotenro.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
35206	Musta	Rigid	Vas/Oik	Small	11 - 14 cm
35206	Musta	Rigid	Vas/Oik	Medium	14 - 17 cm
35206	Musta	Rigid	Vas/Oik	Large	17 - 20 cm
35206	Musta	Rigid	Vas/Oik	X-Large	20 - 23 cm



## CS-lasta

Volairinen keskikova muovilasta, joka sopii hyvin useimpiin ranneortooseihin. Muovilasta auttaa rannetta pysymään toiminnallisessa tilassa. Muotoilu sallii thenarilihaksiston täyden liikkuvuuden.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Mitat	Pakkauskoko
35210	Sininen	Bilat.	Yksi koko	22x168 mm	10





## Basic lisänauhat

Erilliset lisänauhat Basic rannetuille 27441 ja 27442 sekä peukalotuille 27443 ja 27444. Kaksi levyttä.

Tuotenro.	Väri	Koko	Leveys
27447	Sininen	Small	5 cm
27448	Sininen	Large	7,5 cm

## Basic rannetuki, lyhyt ja pitkä

Yksinkertainen, tarrakiinnitteinen rannetuki tukee ja istuu hyvin. Tuet saa kokonaan auki, mikä helpottaa pukemista ja riisumista. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Perusmallin tarrakiinnityksen ansiosta koon valinta on joustavampaa. Lyhyeen malliin saa lisätukea erillisillä rannenuhoilla 27447 tai 27448. Pitkässä mallissa on jo valmiiksi elastinen rannenuha.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Tuotenro.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
27441	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	X-Small	<12 cm
27441	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Small	11-14 cm
27441	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Medium	14-17 cm
27441	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	Large	17-20 cm
27441	Sininen	Lyhyt	Vas/oik	X-Large	20-23 cm
27445	Sininen	Pitkä	Vas/oik	X-Small	<12 cm
27445	Sininen	Pitkä	Vas/oik	Small	11-14 cm
27445	Sininen	Pitkä	Vas/oik	Medium	14-17 cm
27445	Sininen	Pitkä	Vas/oik	Large	17-20 cm
27445	Sininen	Pitkä	Vas/oik	X-Large	20-23 cm



## Basic rannetuki

Rannetuki, jossa on rannetta tukeva nauha. Leveän proksimaalisen nauhan ansiosta koon valinta on joustavampaa. Avoin malli helpottaa tuen pukemista ja riisumista. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Tuki on pikkusormen puolelta hieman korkeampi ja tukee ulnaarisesti.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
27446	Sininen	Vas/oik	X-Small	<12 cm
27446	Sininen	Vas/oik	Small	11-14 cm
27446	Sininen	Vas/oik	Medium	14-17 cm
27446	Sininen	Vas/oik	Large	17-20 cm
27446	Sininen	Vas/oik	X-Large	20-23 cm

## Kevyt rannetuki

Neopreenista valmistettu tuki lämmittää ja tukee rannetta. Tuki pujotetaan peukalon läpi ja kierretään kämmenselän puolelta ranteen ympäri. Voidaan leikata haluttuun muotoon.

**Käyttöalueet:** Käytetään reumatologisissa sairauksissa ja keventämään kuormitusta.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko
28230	Sininen	Bilat.	Yksi koko



## Bromsa rannetuki

Tuki, jossa on dorsaalipuolella kaksi joustavaa muovilastaa. Lastat ja leveä kiinnitys nauha rajoittavat ranteen dorsaalfleksiota. Vastusta säädetään yksinkertaisesti käyttämällä joko yhtä tai kumpaakin lastaa tai asettamalla kiinnitys nauha enemmän proksimaalisesti tai distaalisesti. Volaaripuolella ei ole lastaa, mikä helpottaa muita käden toimintoja.

**Käyttöalue:** Käytetään keventämään ekstensoreiden kuormitusta ja lateraalissa epikondyliitissä.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28240	Sininen	Vas/oik	Small	11-14 cm
28240	Sininen	Vas/oik	Medium	14-17 cm
28240	Sininen	Vas/oik	Large	17-20 cm
28240	Sininen	Vas/oik	X-Large	20-23 cm



## Elcross® Carpus Flexi rannetuki

Yksi suosituimmista tuista reumapotilaille. Vuorattu iholle miellyttävällä puuvillalla. Nyöryitys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Sopii hyvin potilaille, joilla käden toiminnot ovat heikot. Tuen istuvuutta voidaan säätää ja se sopii näin sekä leveille että kapeille kyynärvarsille. Irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta.

**Käyttöalueet:** Käytetään reumatologisissa sairauksissa ja vähentämään rasiitusta.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28149	Sininen	Vas/oik	Small	11-14 cm
28149	Sininen	Vas/oik	Medium	14-17 cm
28149	Sininen	Vas/oik	Large	17-20 cm
28149	Sininen	Vas/oik	X-Large	20-23 cm
28144	Beige	Vas/oik	Small	11-14 cm
28144	Beige	Vas/oik	Medium	14-17 cm
28144	Beige	Vas/oik	Large	17-20 cm
28144	Beige	Vas/oik	X-Large	20-23 cm





## Bisca® rannetuki

Tuki sopii erityisesti reumaatikoille. Vuorattu iholle miellyttävällä puuvillalla. Tuen integroitu nauha sekä irrotettavat ja muotoiltavat alumiinilastat tukevat hyvin.

**Käyttöalueet:** Käytetään reumatologisissa sairauksissa ja vähentämään räsitusta.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28042	Sininen	Vas/oik	Small	11-14 cm
28042	Sininen	Vas/oik	Medium	14-17 cm
28042	Sininen	Vas/oik	Large	17-20cm



## D-lenkki rannetuki

Joustamaton, puuvillalla vuorattu tuki, jossa on muotoiltava alumiinilasta vo-laaripuolella. Kiinnitetään D-lenkin avulla. Paksu pehmuste on mukava ja sopii hyvin herkille potilaille. Tukea on saatavana kahta väriä sekä erittäin kulutusta kestävä versio, joka on valmistettu mustasta nahasta.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, post-operatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja vähentämään räsitusta.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
53225	Musta, nahka	Vas/oik	X-Small	<14,6 cm
53225	Musta, nahka	Vas/oik	Small	14,6-16,5 cm
53225	Musta, nahka	Vas/oik	Medium	16,6-19,1 cm
53225	Musta, nahka	Vas/oik	Large	19,2-21,6 cm
53225	Musta, nahka	Vas/oik	X-Large	>21,6 cm



## Wrist Lacer™, lyhyt malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari- että dorsaalipuolella. Tuki tukee myös kynäriluuta. Valmistettu kestävästä mokkajäljelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Säädettävä peukalonauha. Nyöryitys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Vo-laaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta. Tukea on saatavana kahta väriä.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, post-operatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

**Muuta:** Tämä malli on 20 cm pitkä.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28570	Beige	Lyhyt	Vas/oik	X-Small	12-14 cm
28570	Beige	Lyhyt	Vas/oik	Small	14-16 cm
28570	Beige	Lyhyt	Vas/oik	Medium	16-18 cm
28570	Beige	Lyhyt	Vas/oik	Large	18-20 cm
28570	Beige	Lyhyt	Vas/oik	X-Large	20-22 cm
28571	Musta	Lyhyt	Vas/oik	X-Small	12-14 cm
28571	Musta	Lyhyt	Vas/oik	Small	14-16 cm
28571	Musta	Lyhyt	Vas/oik	Medium	16-18 cm
28571	Musta	Lyhyt	Vas/oik	Large	18-20 cm
28571	Musta	Lyhyt	Vas/oik	X-Large	20-22 cm

## Wrist Lacer™, pitkä malli

Erittäin stabiili rannetuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat sekä volaari- että dorsaalipuolella. Tuki tukee myös kynnärluuta. Valmistettu kestävästä mokkajäljelmästä ja vuorattu hengittävällä materiaalilla. Säädettävä peukalonauha. Nyöryitys helpottaa tuen kiinnitystä ja säätämistä. Se on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä. Volaaripuolen pehmuste lisää käyttömukavuutta. Tukea on saatavana kahta väriä.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, post-operatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

**Muuta:** Tämä malli on 26 cm pitkä.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28572	Beige	Pitkä	Vas/oik	Small	14-16 cm
28572	Beige	Pitkä	Vas/oik	Medium	16-18 cm
28572	Beige	Pitkä	Vas/oik	Large	18-20 cm
28572	Beige	Pitkä	Vas/oik	X-Large	20-22 cm
28573	Musta	Pitkä	Vas/oik	Small	14-16 cm
28573	Musta	Pitkä	Vas/oik	Medium	16-18 cm
28573	Musta	Pitkä	Vas/oik	Large	18-20 cm
28573	Musta	Pitkä	Vas/oik	X-Large	20-22 cm



## V-Strap™, lyhyt malli

V-Strap muistuttaa MedSpec Wrist Laceria, mutta siinä on erilainen kiinnityssysteemi ja se on erimuotoinen kuin Wrist Lacer. Tukea voi tilata myös lasten kanssa (lyhyt malli). Tuki myötäilee käden muotoja ja sopii hyvin myös leveään käteen. Patentoitu, V:n muotoinen kiinnitys pitää kiinnitysnauhat paikallaan kiinnitysrenkaissa tukea puettaessa ja riisuttaessa.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, post-operatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

**Muuta:** Tämä malli on 20 cm pitkä.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28574	Musta	Lyhyt	Vas/oik	XX-Small	<12 cm
28574	Musta	Lyhyt	Vas/oik	X-Small	12-14 cm
28574	Musta	Lyhyt	Vas/oik	Small	14-16 cm
28574	Musta	Lyhyt	Vas/oik	Medium	16-18 cm
28574	Musta	Lyhyt	Vas/oik	Large	18-20 cm
28574	Musta	Lyhyt	Vas/oik	X-Large	20-22 cm
28574	Musta	Lyhyt	Vas/oik	XX-Large	22-25 cm





## Tripod™ Wrist Lacer

Erittäin tukeva rannetuki, jossa on sama hyvä istuvuus ja toiminnallisuus kuin Wrist Lacerissa. Tripodissa on kolme muotoiltavaa alumiinista tukilastaa, jotka ovat sijoitettu ulnaarisesti, plantaarisesti ja dorsaalisesti. Lastat toimivat vuorovaikutuksellisesti estäen radial-ulnaarisia virheasentoja, sekä rajoittaen ranteen fleksiota. Ulnaarinen lasta yhdessä kaksinkertaisen nyöritysjärjestelmän kanssa estävät radial-ulnaarisia virheasentoja. Aivan kuten Wrist Lacerissa peukalon liikkuvuus on vapaa myös Tripodissa. Ortoosin nyöritysjärjestelmä tekee sulkemisen ja avaamisen helpoksi yhdellä kädellä.

**Käyttöalueet:** Posttraumaattinen, postoperatiivinen, radial-ulnaarisia virheasentoja, rannekanavaoireyhtymä, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

Tuoteno	Väri	Malli	Vas/Oik	Koko	Ranteen ympäry
28577	Musta	Lyhyt	vas/oik	X-Small	12-14 cm
28577	Musta	Lyhyt	vas/oik	Small	14-16 cm
28577	Musta	Lyhyt	vas/oik	Medium	16-18 cm
28577	Musta	Lyhyt	vas/oik	Large	18-20 cm
28577	Musta	Lyhyt	vas/oik	X-Large	20-22 cm



## V-Strap™, pitkä malli

V-Strap muistuttaa Wrist Laceria, mutta siinä on erilainen kiinnityssysteemi ja se on erimuotoinen kuin Wrist Lacer. Tuki myötäilee käden muotoja ja sopii hyvin myös leveään käteen. Patentoitu, V:n muotoinen kiinnitys pitää kiinnitysnauhat paikallaan kiinnityksenauhaissa tukea puettaessa ja riisuttaessa.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, post-operatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

**Muuta:** Tämä malli on 26 cm pitkä.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäry
28575	Musta	Pitkä	Vas/oik	Small	14-16 cm
28575	Musta	Pitkä	Vas/oik	Medium	16-18 cm
28575	Musta	Pitkä	Vas/oik	Large	18-20 cm
28575	Musta	Pitkä	Vas/oik	X-Large	20-22 cm



## CTS-lepo-ortoosi

Yölasta, joka on valmistettu ohuesta, perforoidusta Kydex-muovista. Immobilisoi ranteen. Tarkoitettu potilaille, joilla on karpaalikanavasyndroomasta johtuvaa yöllistä puutumista ja turvotusta käsissä.

**Käyttöalue:** Karpaalikanavasyndrooma.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Kämmenen ympäry	Kyynärvarren ympäry
28542	Vaaleansininen	Vas/oik	Small	<20 cm	<23 cm
28542	Vaaleansininen	Vas/oik	Large	>20 cm	>23 cm
25030	Nauha	19 mm			
25030	Nauha	25 mm			
25030	Nauha	50 mm			

## Basic peukalollinen rannetuki

Yksilöllisesti suunniteltu rannetuki, joka tukee peukaloa olematta kuitenkaan kömpelö. Innovatiivisesti suunniteltu peukalo-osa muotoilee thenaralueen lihaksia ja takaa hyvän istuvuuden. Peukalo pysyy levossa perusasennossa. Volaaripuolella on irrotettava ja muotoiltava alumiinilasta. Joustava, muovinen peukalolasta antaa lisätukea. Perusmallin tarrakiinnityksen ansiosta koon valinta on joustavampaa.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja keventämään kuormitusta.

**Muuta:** Basic lisänauha (kuvassa) ostettavissa erikseen (kts. sivu 12).

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
27442	Sininen	Vas/oik	X-Small	<12 cm
27442	Sininen	Vas/oik	Small	11-14 cm
27442	Sininen	Vas/oik	Medium	14-17 cm
27442	Sininen	Vas/oik	Large	17-20 cm
27442	Sininen	Vas/oik	X-Large	20-23 cm



## D-lenkki ranne- ja peukalotuki

Joustamaton, puuvillalla vuorattu tuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat peukalolle ja ranteelle. Kiinnitetään D-lenkin avulla. Paksu pehmuste on mukava ja tuki soveltuu myös herkkähoisille potilaille.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, reumatologisissa sairauksissa, instabiliteetissa ja vähentämään räsitusta.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
53219	Beige	Vas/oik	X-Small	<14,6 cm
53219	Beige	Vas/oik	Small	14,6-16,5 cm
53219	Beige	Vas/oik	Medium	16,6-19,1 cm
53219	Beige	Vas/oik	Large	19,2-21,6 cm
53219	Beige	Vas/oik	X-Large	>21,6 cm



## Ryno Lacer®

Erittäin stabiili ranne- ja peukalotuki, jossa on muotoiltavat alumiinilastat dorsaali-, volaari- ja radiaalipuolella. Radiaalinen peukalolasta kulkee koko tuen pituudelta ja immobilisoi peukalon tehokkaasti. Tuki on valmistettu kestävästä makkajäljitelmästä ja siinä on hengittävä vuori. Nauhallinen kiinnityssystemi on helppo avata ja sulkea yhdellä kädellä.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti, post-operatiivisesti, reumatologisissa sairauksissa ja spastisiteetissa.

**Muuta:** Tämä malli on 22 cm pitkä.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
28576	Musta	Vas/oik	X-Small	<14 cm
28576	Musta	Vas/oik	Small	14-16 cm
28576	Musta	Vas/oik	Medium	16-18 cm
28576	Musta	Vas/oik	Large	18-20 cm
28576	Musta	Vas/oik	X-Large	20-22 cm





## Thermoskin artroosikäsine

Käsine, joka lämmittää ja lievittää kipua. Ulkopuolen liukumaton materiaali auttaa saamaan hyvän otteen. Patentoitu Trioxon®-materiaali stimuloi ihoa tuottamaan lämpöä, siirtää kosteuden pois iholta ja antaa sen hengittää. Kliinisten testien mukaan käsine nostaa ihon ja ihonalaista lämpötilaa noin 2 °C:lla. Tämä parantaa lihasten, jänteiden ja siteiden elastisuutta.

**Käyttöalue:** Reumatologiset sairaudet.

Tuoteno.	Väri	Koko	MCP-nivelien ympärysmitta	Pakkaus
53234	Musta	X-Small	15-17 cm	Myydään pareittain pari
53234	Musta	Small	18-20 cm	Myydään pareittain pari
53234	Musta	Medium	21-23 cm	Myydään pareittain pari
53234	Musta	Large	24-26 cm	Myydään pareittain pari
53234	Musta	X-Large	27-29 cm	Myydään pareittain pari
53234	Musta	XX-Large	>30 cm	Myydään pareittain pari



## Grippa rannetuki

Tukee rannetta tehokkaasti raskaassa tai yksipuolisesti rannetta kuormittavassa työssä. Leveä rannenuha tukee rannetta. Kämmentä puolelta luistamattoman materiaalin ansiosta erilaisista työkaluista saa hyvän otteen. Kehitetty yhteistyössä teollisuuden asentajien kanssa.

**Käyttöalueet:** Käytetään keventämään kuormitusta kämmenessä ja ranteessa sekä ennaltaehkäisevästi esim. asennustyössä.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28210	Sininen	Vas/oik	Small	11-14 cm
28210	Sininen	Vas/oik	Medium	14-17 cm
28210	Sininen	Vas/oik	Large	17-20 cm
28210	Sininen	Vas/oik	X-Large	20-23 cm



## Combi rannetuki

Tuki, joka tukee rannetta ja suojaa kämmentä. Tuen volaaripuoli on tehty erityiskäsittelystä ja oteystävällisestä vuohennahasta. Tuki on vuorattu keklarilla, joka suojaa lämmöltä ja teräviltä esineiltä. Leveä kiinnitysnauha tukee rannetta. Tehty sopimaan kovaankin työhön.


**Käyttöalueet:** Käytetään vähentämään rasitusta kämmenessä ja ranteessa sekä ennaltaehkäisevästi esim. asennustyössä.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
28220	Sininen	Vas/oik	Small	11-14 cm
28220	Sininen	Vas/oik	Medium	14-17 cm
28220	Sininen	Vas/oik	Large	17-20 cm
28220	Sininen	Vas/oik	X-Large	20-23 cm
28220	Sininen	Vas/oik	XX-Large	23-26 cm

## Ergospoon lasta

Volaarinen muovilasta, joka sopii useimpiin rannetukiin. Saatavana kolmea jäykkyyttä. Pitää ranteen aktiivisessa kulmassa. Muoto sallii thenarlihasten maksimaalisen liikkuvuuden.

Tuotenro.	Väri	Jäykkyys	Puoli	Pakkaus
27340	Keltainen	Taipuisa	Vas/oik	10 nimike
27340	Vihreä	Medium	Vas/oik	10 nimike
27340	Punainen	Jäykkä	Vas/oik	10 nimike

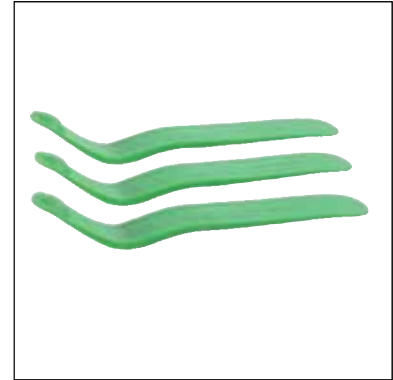

## Sormikontraktuura-tyyny

Pehmeä, polyesteritäytteinen tyyny, joka pitää sormet erillään ja suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Päällystetty froteella, joka imee kosteuden.

**Käyttöalue:** Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Mitat	Pakkaus
51616	Sininen	Bilat.	Medium	7,6 x 12,7 cm	3 nimike
51616	Sininen	Bilat.	Large	10 x 12,7 cm	3 nimike



## Kämmensuoja

Pehmeä suoja, joka suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Kämmentä ja sormien väliin voi laittaa rullan, jos halutaan lisää ekstensiota.

**Käyttöalue:** Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko	Pakkaus
51600	Valkoinen/beige	Vas/oik	Yksi koko	1 nimike
51601	Valkoinen/beige	Vas/oik	Yksi koko	3 nimike



## Sormellinen kämmentuki

Pehmeä suoja, joka suojaa kämmentä sormikontraktuurissa. Sormien välissä oleva materiaali antaa kevyen abduktion. Tuki on helppo pukea, koska sen saa täysin auki.

**Käyttöalue:** Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuotenro.	Väri	Puoli	Koko
51605	Valkoinen/beige	Vas/oik	Yksi koko





## Sof-Gel™ sormellinen kämmmentuki

Pehmeä kämmensuoja, jonka painetta vähentävä geeli suojaa kämmentä ja sormien välistä ihoa. Leveä volaariosa suojaa peukaloa.

**Käyttöalue:** Pitkälle edenneet kontraktuurat.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko
51615	Beige	Vas/oik	Yksi koko




## Carve-It™ -käsiortoosi

Ortoosi, joka auttaa pitämään käden funktionaalisessa asennossa, kun sormissa on lievä tai kohtuullinen spastisiteetti. Ortoosissa on irrotettava pehmuste. Kämmenpuolella on anatomisesti muotoiltu vaahtotyyny, joka suojaa kämmenen kaarta. Ortoosin alapuoli on tasainen, minkä ansiosta tuki lepää hyvin alustan päällä. Voidaan leikata haluttuun muotoon. Käy kumpaankin käteen.

**Käyttöalueet:** Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset.

**Muuta:** Pehmuesteen voi pestä käsin. Anna ilmakeivua.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Mitta 2-5 MCP-niveleen
51650	Valkoinen	Bilat.	Small/Medium	<7,6 cm
51650	Valkoinen	Bilat.	Large/X-Large	>7,6 cm
51651	Lisäpehmuste		Small/Medium	
51651	Lisäpehmuste		Large/X-Large	

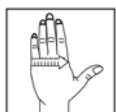

## Kwik-Form™ progressiivinen käden lepo-ortoosi

Ortoosi, jossa on tukeva lasta ja irrotettava pehmuste. Ortoosia voidaan säätää ilman työkaluja. Tukee kättä ja rannetta. Mukana tulee kolme erikokoista käsirullaa käden kontraktuurien progressiivisen hoidon avuksi.

**Käyttöalueet:** Pitkälle edenneiden kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
51630	Kirkaansininen	Bilat.	Small/Medium	<18 cm
51630	Kirkaansininen	Bilat.	Medium/Large	>18 cm
51631	Pehmuste		Small/Medium	
51631	Pehmuste		Medium/Large	



## Kwik-Form™ lepo-ortoosi

Ortoosi, joka voidaan säätää haluttuun asentoon ilman työkaluja. Tarranauhat kiinnitetään suoraan tuen pehmeään päälliseen. Tukee peukaloa, kättä ja rannetta.

**Käyttöalueet:** Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, lepo-ortoosi.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
51638	Kirkkaansininen	Vas/oik	Small/Medium	<18 cm
51638	Kirkkaansininen	Vas/oik	Medium/Large	>18 cm



## TheraPlus™ Universal lepo-ortoosi

Alumiinirunkoinen ortoosi, jossa on irrotettava pehmuste ja joka tukee kättä ja rannetta. Ortoosia voidaan säätää ilman työkaluja. Saatavana kahta jäykkyyttä.

Tukevampi malli soveltuu potilaille, joilla on kohonnut lihastonus. Mukana tulee irrotettava sormiosa, joka erottaa sormet toisistaan ja suojaaa ihoa.

**Käyttöalueet:** Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, lepo-ortoosi.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Pituus ranteesta sormenpäähän
51640	Sininen	Normaali	Bilat.	Small	16,5 cm
51640	Sininen	Normaali	Bilat.	Medium	18 cm
51640	Sininen	Tukeva	Bilat.	Medium	18 cm
51640	Sininen	Tukeva	Bilat.	Large	>23 cm
51641	Pehmuste			Small	
51641	Pehmuste			Medium	
51641	Pehmuste			Large	





## Lynx WHFO™ Deluxe lepo-ortoosi

Alumiinirunkoinen ortoosi, jossa on irrotettava pehmuste. Ortoosia voidaan säätää ilman työkaluja. Tukee peukaloa, kättä ja rannetta. Mediaalinen ja lateraalinen tuki pitää peukalon paikoillaan. Mukana tulee irrotettava sormiosa, joka erottaa sormet toisistaan ja suojaaa ihoa. Pehmusteen voi pestä.

**Käyttöalueet:** Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, lepo-ortoosi.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Pituus ranteesta sormenpäähän
51642	Sininen	Vas/oik	X-Small	14,5-16,5 cm
51642	Sininen	Vas/oik	Small	16,5-18,5 cm
51642	Sininen	Vas/oik	Medium	18,5-20 cm
51642	Sininen	Vas/oik	Large	>20 cm
51643	Pehmuste	Vas/oik	X-Small	
51643	Pehmuste	Vas/oik	Small	
51643	Pehmuste	Vas/oik	Medium	
51643	Pehmuste	Vas/oik	Large	

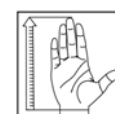

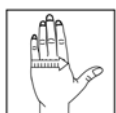

## Jackson lepo-ortoosi

Kevyt, esimuotoiltu lepo-ortoosi, joka on valmistettu läpinäkyvästä korkealämpömuovista. Lasta nousee korkealle ulnaaripuolella ja immobilisoi sekä ranteen että sormet. Reunat on pyöristetty. Mukana tulee tukevat nailonnauhat, joissa on yksinkertainen tarrakiinnitys.

**Käyttöalue:** Käden ja ranteen immobilisaatio.

Tuoteno.	Puoli	Koko	Mitta 2-5 MCP-niveleen	Pituus
28701	Vas/oik	Small	8 cm	29 cm
28701	Vas/oik	Medium	8 cm	32 cm
28701	Vas/oik	Large	9 cm	33 cm




## Esimuotoiltu käsi- ja ranneortoosi

Ortoosi, joka pitää käden ja ranteen toiminnallisessa asennossa. Ortoosi on valmistettu 3,2 mm Polyform matalalämpömuovista, jota voidaan hyvin muotoilla uudestaan. Mukana tulee itsekiinnittyvät nauhat, joiden laitto lastaan käy parhaiten kuumailmapuhaltimen avulla.

**Käyttöalueet:** Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Mitta 2-5 MCP-niveleen
53231	Valkoinen	Vas/oik	Small	6,4-8,8 cm
53231	Valkoinen	Vas/oik	Medium	8,9-11,3 cm
53231	Valkoinen	Vas/oik	Large	>11,4 cm

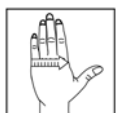

## Esimuotoiltu antispasmiortoosi

Ortoosi, joka loitontaa sormet ja peukalon, pitää ranteen paikallaan sekä pitää käden optimaalisessa asennossa spastisuuden vähentämiseksi. Ortoosi on valmistettu 3,2 mm Polyform matalalämpömuovista, jota voidaan hyvin muotoilla uudestaan. Mukana tulee itsekiinnittyvät D-lenkkinauhat, joiden laitto lastaan käy parhaiten kuumailmapuhaltimen avulla.

**Käyttöalueet:** Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset.


Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Mitta 2-5 MCP-niveleen
53232	Valkoinen	Vas/oik	X-Small	7,6-8,2 cm
53232	Valkoinen	Vas/oik	Small	8,3-8,8 cm
53232	Valkoinen	Vas/oik	Medium	8,9-10,2 cm
53232	Valkoinen	Vas/oik	Large	>10,2 cm

## Esimuotoiltu lepolasta

Ortoosi, joka pitää käden ja ranteen lepoasennossa. Ortoosi on valmistettu 3,2 mm Polyform matalalämpömuovista, jota voidaan hyvin muotoilla uudestaan. Mukana tulee itsekiinnittyvät nauhat, joiden laitto lastaan käy parhaiten kuumailmapuhaltimen avulla.

**Käyttöalueet:** Kontraktuurien hoito ja korjaus sekä tonusmuutokset, reumatologiset sairaudet, lepolasta.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Mitta 2-5 MCP-niveleen
53223	Beige	Vas/oik	Small	<8,9 cm
53223	Beige	Vas/oik	Medium	9-10,2 cm
53223	Beige	Vas/oik	Large	>10,2 cm

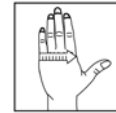

## Ranneortoosi vetoketjulla

Murtumaortoosi, joka immobilisoi ranteen. Ortoosi on valmistettu 2,4 mm Aquaplast-T:stä. Lasta toimitetaan suorana ja muotoillaan yksilöllisesti lämmittämällä sitä vesialtaassa 70°:ssa tai uunissa. Vetoketjun ansiosta ortoosi on hygieeninen ja helppo riisua. Aquaplast-T on lämmitettyinä läpinäkyvää, siinä on 100% muisti ja se päästää läpi röntgensäteitä.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti ja post-operatiivisesti sekä ranteen immobilisaatioon.

Tuoteno.	Väri	Malli	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
53221	Valkoinen	Lyhyt	Bilat.	Small	12,7-15,5 cm
53221	Valkoinen	Lyhyt	Bilat.	Medium	15,6-18,3 cm
53221	Valkoinen	Lyhyt	Bilat.	Large	18,4-21 cm
53220	Valkoinen	Pitkä	Bilat.	Small	12,7-15,5 cm
53220	Valkoinen	Pitkä	Bilat.	Medium	15,6-18,3 cm
53220	Valkoinen	Pitkä	Bilat.	Large	18,4-21 cm



## Ranne- ja peukalo-ortoosi vetoketjulla

Murtumaortoosi, joka immobilisoi ranteen ja peukalon. Ortoosi on valmistettu 2,4 mm Aquaplast-T:stä. Lasta toimitetaan suorana ja muotoillaan yksilöllisesti lämmittämällä sitä vesialtaassa 70°:ssa tai uunissa. Vetoketjun ansiosta ortoosi on hygieeninen ja helppo riisua. Aquaplast-T on lämmitettyinä läpinäkyvää, siinä on 100% muisti ja se päästää läpi röntgensäteitä.

**Käyttöalueet:** Käytetään posttraumaattisesti ja post-operatiivisesti sekä ranteen immobilisaatioon.

Tuoteno.	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
53215	Valkoinen	Bilat.	Small	13-15,8 cm
53215	Valkoinen	Bilat.	Medium	15,9-18,6 cm
53215	Valkoinen	Bilat.	Large	18,7-21,3 cm



