



Hånd- og håndleddsorthoser

www.camp.no



SOF-Stretch dynamisk fingerortose kort

Ortose som gir en dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk. Bilaterale vaiere kan bøyes for å tilpasse motstanden og gi plass for eventuelt ødem. Den korte designen tillater full bevegelse i MCP-leddene.

Bruksområder: Fleksjonskontraktur og stramhet i PIP-leddet.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Mål volart mellom MCP-leddet og DIP-leddet
51405	Hvit	X-Small	3,8 cm
51405	Hvit	Small	4,4 cm
51405	Hvit	Medium	5,1 cm
51405	Hvit	Large	5,7 cm
51405	Hvit	X-Large	7 cm



SOF-Stretch dynamisk fingerortose

Ortose som gir en dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk. Bilaterale vaiere kan bøyes for å tilpasse motstanden og gi plass for eventuelt ødem.

Bruksområder: Fleksjonskontraktur og stramhet i PIP-leddet.


Art.nr.	Farge	Størrelse	Mål volart mellom den distale palmarbøyen og DIP-leddet
51400	Hvit	X-Small	5,1 cm
51400	Hvit	Small	6,4 cm
51400	Hvit	Medium	7,6 cm
51400	Hvit	Large	8,9 cm
51400	Hvit	X-Large	10,2 cm
51401	Svart	X-Small	5,1 cm
51401	Svart	Small	6,4 cm
51401	Svart	Medium	7,6 cm
51401	Svart	Large	8,9 cm
51401	Svart	X-Large	10,2 cm

SOF-Stretch dynamisk spiralortose

Ekstensjonsortose (Capener) som gir dynamisk motstand for å øke ekstensjonen i PIP-leddet ved kontraktur og stramhet. Spiralfjærene er plassert på begge sider av PIP-leddet for å gi samme motstand i alle posisjoner. De kan løsnes eller strammes til ønsket motstand. Anatomisk formede puter fordeler og avlaster trykk.

Bruksområder: Fleksjonskontrakturer og stramhet i PIP-leddet. Utmerket til kontrakturer opp til 45°. Egner seg ikke til rigide kontrakturer.


Art.nr.	Farge	Størrelse	Mål volart mellom den distale palmarbøyen og DIP-leddet
51410	Hvit	Small	6,4 cm
51410	Hvit	Medium	7 cm
51410	Hvit	Large	7,6 cm
51410	Hvit	X-Large	8,3 cm

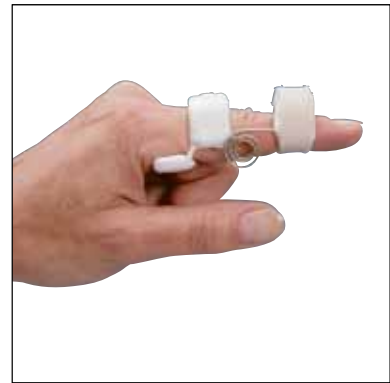

Stax fingerhylse

Immobiliserer DIP-leddet i ekstensjon og gir samtidig full bevegelse i PIP-leddet. Brukes normalt uten polstring og fikseres mot mellomste falangen med selvklebende bånd (ikke inkludert).


Art.nr.	Størrelse	Lengde	Diameter	Pk.
51421	1	5,3 cm	1,5 cm	12 stk.
51421	2	5,1 cm	1,7 cm	12 stk.
51421	3	5,8 cm	1,9 cm	12 stk.
51421	4	6,3 cm	1,9 cm	12 stk.
51421	5	5,8 cm	1,9 cm	12 stk.
51421	5,5	6,1 cm	2,3 cm	12 stk.
51421	6	6,4 cm	2,3 cm	12 stk.
51421	7	6,2 cm	2,5 cm	12 stk.
51420	30 fingerskinner i assorterte størrelser i plastboks			30 stk.

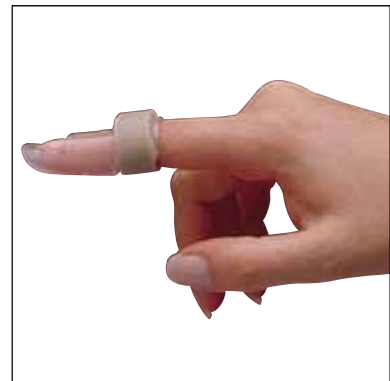

Buddy strap

Tvillingbånd som holder to fingre stadig sammen. Borrelåsen kan lett klippes til ønsket størrelse.

Art.nr.	Størrelse	Bredde	Lengde	Pk.
51430	En størrelse	1,3 cm	12,7 cm	5 stk.

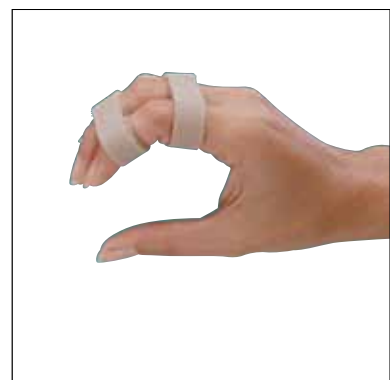



Selection tommelortose Soft

Smidig og elastisk tommelortose som avlastet og gir lett beskyttelse til tommelens ledd. Selection Tommelortose Myk er laget av et smidig, moderne og føyelig materiale som puster og som føles behaglig mot huden. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd og lett CMC-I artrose.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
35200	Svart	Soft	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35200	Svart	Soft	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35200	Svart	Soft	Ve/Hø	Large	> 17 cm
35201	Beige	Soft	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35201	Beige	Soft	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35201	Beige	Soft	Ve/Hø	Large	> 17 cm



Selection tommelortose Rigid

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet rundt tommelens strukturer. Gir avlastning og stabil støtte til tommelens ledd. Gir også støtte og beskyttelse for tommelens MCP-ledd. Selection Tommelortose Rigid er laget av et smidig, moderne og føyelig materiale som puster og som føles behaglig mot huden. Ved hvile holdes tommelen i nøytralposisjon uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer, avlastning, hypermobilitet i tommelens ledd og lett til moderat CMC-I artrose.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
35202	Svart	Rigid	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35202	Svart	Rigid	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35202	Svart	Rigid	Ve/Hø	Large	> 17 cm
35203	Beige	Rigid	Ve/Hø	Small	< 15 cm
35203	Beige	Rigid	Ve/Hø	Medium	15 - 17 cm
35203	Beige	Rigid	Ve/Hø	Large	> 17 cm

Tommelortose myk, Tommeliten og Tommestor

Myk, elastisk tommelortose i neoprene. Beskytter og avlaster tommelen samt gir varme. Finnes i to lengder. Den lange modellen gir også lett støtte til håndleddet. Ved hvile holdes tommelen i grunnleie uten å belaste muskler og senefester. Kan klippes til ønsket form.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer; avlastning og hypermobilitet i tommel og håndledd.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28548	Beige	Tommeliten	Ve/Hø	Small	<17 cm
28548	Beige	Tommeliten	Ve/Hø	Large	>17cm
28558	Blå	Tommeliten	Ve/Hø	Small	<17 cm
28558	Blå	Tommeliten	Ve/Hø	Large	>17 cm
28549	Beige	Tommestor	Ve/Hø	En størrelse	
28559	Blå	Tommestor	Ve/Hø	En størrelse	



Basic tommelortose, kort og lang

Ortose med plastskiner. Gir støtte for tommel og omkringliggende strukturer. Materialet er klipt på skrå for best mulig passform og elastisitet. Åpent justerbart tommelgrep. Den lange modellen er 2 cm lengre og gir støtte for håndleddet. Kan kombineres med håndleddsband 27447 eller 27448 for ekstra stabilitet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer; instabilitet og avlastning.

Annet: Basic Ekstra Bånd, som vises på bildet, kan kjøpes separat.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27443	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27444	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm





Tee Pee™ tommelortose

Tommelortose med tre formbare aluminiumskinner, sentralt, dorsalt og palmart. Ortosen gir stabil støtte for tommelen. Laget av perforert luftig mokkaimmitasjon samt fôr som puster.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer og instabilitet.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Lengde fra håndledd til tommelens IP-ledd
28560	Svart	Bilateral	X-Small	<9 cm
28560	Svart	Bilateral	Small	9-10 cm
28560	Svart	Bilateral	Medium	10-11,5 cm
28560	Svart	Bilateral	Large	11,5-13 cm
28560	Svart	Bilateral	X-Large	>13 cm



CMC tommelortose

Denne tommelbaseortosen er beregnet til å støtte CMC-leddet ved instabilitet og slitasjeskader. Den polstrede indre skinnen i kombinasjon med et ytre elastisk lukningsbånd gir kompresjon av tommelbasen, og hjelper dermed til med å stabilisere CMC-leddet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer og instabilitet.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28561	Svart	Ve/Hø	X-Small	<14 cm
28561	Svart	Ve/Hø	Small	14-15,5 cm
28561	Svart	Ve/Hø	Medium	15,5-17,5 cm
28561	Svart	Ve/Hø	Large	17,5-19,5 cm
28561	Svart	Ve/Hø	X-Large	>19,5 cm



Sporlastic tommelortose

Stabil tommelortose laget av plastmateriale for immobilisering av tommelen i funksjonsstilling. Påsydd borrelås gir fleksibel lukning. Stockinette i high-tech fiber som tar opp fuktighet og gir myk polstringseffekt er inkludert.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt og instabilitet.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28545	Beige	Ve/Hø	Small	<17 cm
28545	Beige	Ve/Hø	Medium	17-19 cm
28545	Beige	Ve/Hø	Large	>19 cm



Selection håndleddsorthose Soft

Smidig, elastisk håndleddsorthose laget av et moderne og føyelig materiale som puster og som føles behagelig mot huden. Selection myk har en formet plastskinne på volarsiden og en mykere rett plastskinne på dorsalsiden. Skinnene er uttagbare. Den todelte låsingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform.

Bruksområder: Når håndleddet trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengninger samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: Denne modellen er 17 cm lang.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
35204	Svart	Soft	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35204	Svart	Soft	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35204	Svart	Soft	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35204	Svart	Soft	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



Selection håndleddsorthose Rigid

Smidig, elastisk håndleddsorthose med tommedel laget av et moderne og føyelig materiale som puster og som føles behagelig mot huden. Tommeldelen gir ved sitt stabilere materiale en bra støtte og holder tommelen i nøytralposisjon. Selection Rigid har en formet plastskinne på volarsiden og en mykere rett plastskinne på dorsalsiden. Skinnene er uttagbare. Den todelte låsingen gjør ortosen lett å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep. Materialets konstruksjon gjør det mulig å justere formen litt med saks for optimal passform.

Bruksområder: Når håndleddet og tommelen trenger avlastning f.eks. ved betennelser, arbeidsrelaterte overanstrengninger samt ved revmatiske eller degenerative forandringer.

Annet: Denne modellen er 17 cm lang.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
35206	Svart	Rigid	Ve/Hø	Small	11 - 14 cm
35206	Svart	Rigid	Ve/Hø	Medium	14 - 17 cm
35206	Svart	Ridig	Ve/Hø	Large	17 - 20 cm
35206	Svart	Rigid	Ve/Hø	X-Large	20 - 23 cm



CS-skinne

Volar plastskinne med "Medium" hardhetsgrad som passer de fleste håndleddsorthoser. Skinnen holder håndleddet i funksjonsposisjon. Formen tillater maksimal bevegelse av thenarmuskulaturen.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål	Pk.
35210	Blå	Bilateral	En størrelse	22x168 mm	10





Basic ekstra bånd

Separate elastiske bånd i to bredder til Basic håndleddsorthoser modell 27441, 27442 og tommelortoser modell 27443 og 27444.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Bredde
27447	Blå	Small	5 cm
27448	Blå	Large	7,5 cm



Basic håndleddsorthose, kort og lang

Enkel håndleddsorthose i kort og lang modell med borrelås. Gir god støtte og kompresjon. Åpne modeller som er lette å ta på og av. Uttagbar og formbar aluminiumsskinne volart. Standardmodell med hook som festpunkt og loop som lukning gir fleksibilitet ved valg av størrelse. Kort modell kan kompletteres med ekstra bånd 27447 eller 27448 for ekstra stabilitet. Den lange modellen har et fastmontert elastisk bånd rundt håndleddet.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27441	Blå	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27445	Blå	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm



Basic håndleddsorthose

Håndleddsorthose med integrert bånd som gir ekstra bra støtte for håndleddet. Det brede proximale båndet med stor overflate for lukning, gir fleksibilitet ved valg av størrelse og forenkler på- og avtaking. Åpen modell som gjør ortosen lett å ta på og av. Uttagbar og formbar aluminiumsskinne volart. Høyt skåret ved lillefingersiden for ulnar støtte.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
27446	Blå	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27446	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27446	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27446	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27446	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm

Lett håndleddsorthose

Håndleddstøtte i neoprene. Gir varme og støtte til håndleddet. Holdes på plass ved å festes rundt tommelen.

Kan klippes til ønsket passform.

Bruksområder: Revmatologiske sykdommer og avlastning.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse
28230	Blå	Bilateral	En størrelse



Brems håndleddsorthose

Håndleddsorthose med to fleksible plastskinner dorsalt, som sammen med det kraftige elastiske båndet begrenser dorsalfleksjon av håndleddet. Motstanden justeres enkelt ved å bruke en eller begge plastskinnene, og ved å plassere det elastiske båndet mer proksimalt eller distalt. Ingen skinne volart som påvirker håndens øvrige funksjoner.

Bruksområde: Avlastning av ekstensorsenene i samband med lateral epicondylitt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28240	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28240	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28240	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28240	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm



Elcross® Carpus Flexi håndleddsorthose

En av de mest populære ortosene til revmatiske pasienter. Føret med bomull som er behagelig mot huden. Snøresystemet gjør det enklere å lukke og justere. Tilpasser seg godt til pasienter med svak håndfunksjon. Passformen er fleksibel og passer både en bred og smal underarm. Uttagbar og formbar aluminiumskinne.

Bruksområder: Revmatiske sykdommer og avlastning.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28149	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28149	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28149	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28149	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
28144	Beige	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28144	Beige	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28144	Beige	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28144	Beige	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm



Bisca® håndleddsorthose

Modellen er spesielt egnet for revmatikere. Ortosen er føret med bomullsmateriale som er behagelig mot huden. Det integrerte båndet i kombinasjon med den uttagbare og formbare aluminiumskinnen gir bra støtte.

Bruksområder: Revmatiske sykdommer og avlastning



Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28042	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28042	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28042	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm

D-ring håndleddsorthose

En uelastisk, polstret håndleddsorthose med formbar aluminiumskinne volart. Ortosen lukkes med D-ring. Den tykke polstringen passer godt til pasienter med smerter. Ortosen er bomullsføret og finnes i to farger samt i en ekstra slitesterk "Work-Hard" versjon i svart skinn.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer, ustabilitet og avlastning.



Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
53225	Svart Skinn	Ve/Hø	X-Small	<14,6 cm
53225	Svart Skinn	Ve/Hø	Small	14,6-16,5 cm
53225	Svart Skinn	Ve/Hø	Medium	16,6-19,1 cm
53225	Svart Skinn	Ve/Hø	Large	19,2-21,6 cm
53225	Svart Skinn	Ve/Hø	X-Large	>21,6 cm

Wrist Lacer™, kort

Meget stabil håndleddsorthose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Ortosen gir også en ulnar støtte. Laget i slitesterk mokkaimitasjon med for som puster. Justerbart tommelgrep. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og stenge med en hånd. Volar polstring ved skinnen for ekstra komfort. Finnes i to farger.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Denne modellen er 20 cm lang.



Art. nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28570	Beige	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm
28571	Svart	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28571	Svart	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28571	Svart	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28571	Svart	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28571	Svart	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm

Wrist Lacer™, lang

Meget stabil håndleddsortose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. Ortosen gir også en ulnar støtte. Laget i slitesterk mokkaimitasjon med før som puster. Justerbart tommelgrep. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og stenge med en hånd. Volar polstring ved skinnen for ekstra komfort. Finnes i to farger.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Denne modellen er 26 cm lang.

Art. nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28572	Beige	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm
28573	Svart	Lang	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28573	Svart	Lang	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28573	Svart	Lang	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28573	Svart	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm



V-Strap™, kort

Ligner Wrist Lacer, men kan også bestilles i barnestørrelse (kort modell). Den finnes kun i svart. Ortosen er annerledes i lukkesystem og passform. Ortosen følger håndens konturer og passer godt også til en bred hånd. Det patenterte V-formede lukkesystemet holder båndene på plass i D-ringene ved på- og avtaking.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Denne modellen er 20 cm lang.

Art. nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28574	Svart	Kort	Ve/Hø	XX-Small	<12 cm
28574	Svart	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28574	Svart	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28574	Svart	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28574	Svart	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28574	Svart	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm
28574	Svart	Kort	Ve/Hø	XX-Large	22-25 cm





Tripod™ Wrist Lacer

En meget stabil håndleddsorthose med samme gode komfort og funksjonelle egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbare aluminiumskinner som er plassert ulnart, palmart og dorsalt. Disse skinnene virker sammen for å hindre radial-ulnar deviasjon og minimere fleksjon-ekstensjon av håndleddet. Den ulnare skinnen sammen med det doble snøringssystemet motvirker radial-ulnar deviasjon. Akkurat som Wrist Lacer tillater Tripod en fullt bevegelig tommel. Låsningssystemet med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, radial-ulnar deviasjon, carpaltunnelsyndrom, revmatologiske sykdommer og spastisitet..

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28577	Svart	Kort	Ve/Hø	X-Small	12-14 cm
28577	Svart	Kort	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28577	Svart	Kort	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28577	Svart	Kort	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28577	Svart	Kort	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm



V-Strap™, lang

Ligner Wrist Lacer. Den finnes kun i svart. Ortosen er annerledes i lukkesystem og passform. Ortosen følger håndens konturer og passer godt også til en bred hånd. Det patenterte V-formede lukkesystemet holder båndene på plass i D-ringene ved på- og avtaking.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Denne modellen er 26 cm lang.

Art. nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28575	Svart	Lang	Ve/Hø	Small	14-16 cm
28575	Svart	Lang	Ve/Hø	Medium	16-18 cm
28575	Svart	Lang	Ve/Hø	Large	18-20 cm
28575	Svart	Lang	Ve/Hø	X-Large	20-22 cm



CTS håndleddsorthose

Nattortose av tynn, perforert Kydexplast. Immobiliserer håndleddet. Beregnet for pasienter med carpaltunnelsyndrom med nattlige dovninger og hevelser i hendene.

Bruksområde: Karpaltunnelsyndrom.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndflate	Omkrets underarm
28542	Lyseblå	Ve/Hø	Small	<20 cm	<23 cm
28542	Lyseblå	Ve/Hø	Large	>20 cm	>23 cm
25030	Ekstra bånd	19 mm			
25030	Ekstra bånd	25 mm			
25030	Ekstra bånd	50 mm			

Basic håndleddsorthose med tommel

Unikt designet håndleddsorthose. Den støtter også tommelen uten å bli klumpete. Tommeldelen er delvis frittstående for å følge thenarmuskulaturen og sikre en god passform. Tommelen holdes i basisleie ved hvile. Uttagbar og formbar aluminiumskinne volart. Tommelens skinne i fleksibel plast løper langs hele ortosen for ekstra stabilitet. Standardmodell med hook som festpunkt og loop som lukking gir fleksibilitet ved valg av størrelse.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Annet: Basic Ekstra Bånd, som vises på bildet, kan kjøpes separat (side 12 i katalogen).

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
27442	Blå	Ve/Hø	X-Small	<12 cm
27442	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
27442	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
27442	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
27442	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm



D-ring håndledds- og tommelortose

En uelastisk, polstret håndledds- og tommelortose med formbare aluminiumskinner for tommel og håndledd som lukkes med D-ring. Ortosen er bomullsfôret og den tykke polstringen passer godt til pasienter med smerter.

Bruksområder: Posttraumatisk, revmatologiske sykdommer, instabilitet og avlastning.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
53219	Beige	Ve/Hø	X-Small	<14,6 cm
53219	Beige	Ve/Hø	Small	14,6-16,5 cm
53219	Beige	Ve/Hø	Medium	16,6-19,1 cm
53219	Beige	Ve/Hø	Large	19,2-21,6 cm
53219	Beige	Ve/Hø	X-Large	>21,6 cm



Ryno Lacer®

Meget stabil håndledds- og tommelortose med formbare aluminiumskinner dorsalt, volart og radiale. Den radiale tommelskinnen løper i hele ortosens lengde og immobiliserer tommelen effektivt. Laget i slitesterk mokkaimitasjon med fôr som puster. Lukkesystemet med snøring er lett å åpne og lukke med en hånd.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og spastisitet.

Annet: Denne modellen er 22 cm lang.

Art. nr.	Farge	Ve/hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28576	Svart	Ve/hø	X-Small	<14 cm
28576	Svart	Ve/hø	Small	14-16 cm
28576	Svart	Ve/hø	Medium	16-18 cm
28576	Svart	Ve/hø	Large	18-20 cm
28576	Svart	Ve/hø	X-Large	20-22 cm



Thermoskin artrosehanske



Måltaking: Omkrets MCP-leddene.

Hanske som gir varme for smertelindring. Yttermateriale av "nonslip" gir et sikkert grep. Det patenterte Trioxon® materialet stimulerer huden til å produsere varme, transporterer fuktighet fra huden og tillater den å puste. Det er klinisk påvist at hansken øker temperaturen på hudoverflaten og subkutant med ca. 2°, noe som forbedrer elastisiteten i muskler, sener og ligament.

Bruksområde: Revmatologiske lidelser.

Art.nr.	Farge	Størrelse	Mål 2-5 MCP	Pk.
53234	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53234	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53234	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53234	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53234	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53234	Svart	XX-Large	>30 cm	1 par

Gripa håndleddsorthose



Ortosen gir effektiv støtte for håndleddet ved tunge eller monotone arbeidsmoment. Et kraftig elastisk bånd støtter håndleddet. "Tuff Grip" inne i håndflaten sikrer et bra grep om ulike verktøy. Laget i samarbeide med montører innen verkstedsindustrien.

Bruksområder: Avlastning for håndflaten samt håndleddet og preventivt ved f.eks. monteringsarbeide.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28210	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28210	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28210	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28210	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm

Combi håndleddsorthose



Hanske som gir støtte til håndleddet og beskytter håndflaten. Hanskens volare side består av spesialbehandlet gripevennlig geiteskinn som er polstret med Kevlar som beskytter mot varme og skarpe gjenstander. Håndleddet støttes av et kraftig elastisk bånd. Laget med tanke på røffe miljøer.


Bruksområder: Avlastning for håndflaten samt håndleddet. Preventivt ved f.eks. monteringsarbeide.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
28220	Blå	Ve/Hø	Small	11-14 cm
28220	Blå	Ve/Hø	Medium	14-17 cm
28220	Blå	Ve/Hø	Large	17-20 cm
28220	Blå	Ve/Hø	X-Large	20-23 cm
28220	Blå	Ve/Hø	XX-Large	23-26 cm

Ergospoon skinne

Volar plastskinne som passer de fleste håndleddsortoser. Lages i tre ulike hardhetsgrader. Holder håndleddet i aktiv vinkel. Formen tillater maksimal bevegelighet av thenarmuskulaturen.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Pk.
27340	Gul	Soft	Ve/Hø	10 stk.
27340	Grønn	Medium	Ve/Hø	10 stk.
27340	Rød	Rigid	Ve/Hø	10 stk.

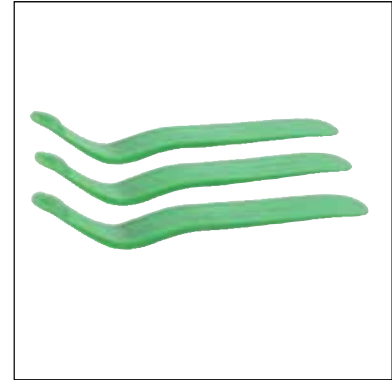

Fingerkontrakturpute

Myk, polyesterfylt fingerseparator som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Kledd med frottémateriale som tar opp fuktighet.

Bruksområde: Framskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål	Pk.
51616	Blå	Bilateral	Medium	7,6 x 12,7 cm	3 stk.
51616	Blå	Bilateral	Large	10 x 12,7 cm	3 stk.



Håndflatebeskytter

Myk ortose som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer.

Ønskes ytterligere ekstensjon kan en rull enkelt settes inn mellom håndflate og fingre.

Bruksområde: Framskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Pk.
51600	Hvit/Beige	Ve/Hø	En størrelse	1 stk.
51601	Hvit/Beige	Ve/Hø	En størrelse	3 stk.



Håndflatebeskytter med fingerdeler

Myk ortose som beskytter håndflaten ved fingerkontrakturer. Materialet mellom fingrene gir en lett abduksjon. Kan åpnes helt for enkel påtaging.

Bruksområde: Framskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse
51605	Hvit/Beige	Ve/Hø	En størrelse





Sof-Gel™ håndflatebeskytter med fingerdeler

Myk håndflatebeskytter med trykkavlastende gel som beskytter håndflaten og huden mellom fingrene. Den brede volare delen beskytter tommelen.

Bruksområde: Framskredne kontrakturer.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse
51615	Beige	Ve/Hø	En størrelse




Carve-It™ håndortose

Ortose som hjelper til med å holde hånden med mild til moderat fingerspasticitet i en funksjonell posisjon. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i hånden er det en anatomisk formet skumdel som bevarer håndflatens velving. En flat underside gjør den enkel å posisjonere f.eks. i sengen. Kan klippes til ønsket form. Universal bruk til både venstre og høyre hånd.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus.

Annet: Avtagbart trekk som kan håndvaskes og lufttørkes.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP
51650	Hvit	Bilateral	Small/Medium	<7,6 cm
51650	Hvit	Bilateral	Large/X-Large	>7,6 cm
51651	Ekstra trekk		Small/Medium	
51651	Ekstra trekk		Large/X-Large	

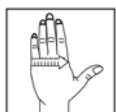

Kwik-Form™ progressiv håndortose

Ortose med fast skinne og avtagbar polstring. Ortosen kan justeres uten verktøy. Støtter hånd- og håndledd. Tre håndruller i ulike størrelser inngår for progressiv behandling av fleksjonskontrakturer i hånden.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av framskredne kontrakturer og endret tonus.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
51630	Klarblå	Bilateral	Small/Medium	<18 cm
51630	Klarblå	Bilateral	Medium/Large	>18 cm
51631	Ekstra trekk		Small/Medium	
51631	Ekstra trekk		Medium/Large	




Kwik-Form™ hvileortose

Ortose som kan justeres til ønsket posisjon uten verktøy. Borrelåsen fester direkte mot ortosens myke overflate. Støtter tommel, hånd- og håndledd.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus og som hvileskinne.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
51638	Klarblå	Ve/Hø	Small/Medium	<18 cm
51638	Klarblå	Ve/Hø	Medium/Large	>18 cm

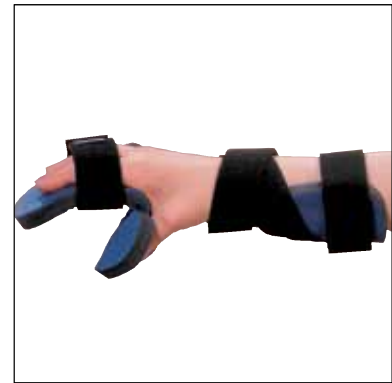


TheraPlus™ Universal håndortose

Ortose av aluminium med avtagbar polstring. Ortosen kan justeres uten verktøy. Finnes i to ulike modeller med ulik rigiditet som støtter hånd og håndledd. Den stabile modellen velges til pasienter med forhøyet tonus. Avtagbar fingerdeler for posisjonering av fingrene og beskyttelse for huden er inkludert.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus og som hvileskinne.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Fra håndledd til fingerspiss
51640	Blå	Regular	Bilateral	Small	16,5 cm
51640	Blå	Regular	Bilateral	Medium	18 cm
51640	Blå	Stabil	Bilateral	Medium	18 cm
51640	Blå	Stabil	Bilateral	Large	>23 cm
51641	Ekstra trekk			Small	
51641	Ekstra trekk			Medium	
51641	Ekstra trekk			Large	

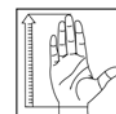



Lynx WHFO™ Deluxe håndortose

Ortose av aluminium med avtagbar polstring. Ortosen kan justeres uten verktøy. Støtter tommel, hånd og håndledd. Tommelen holdes på plass av en medial og lateral support. Avtagbare fingerdelere til posisjonering av fingre og til beskyttelse av huden er inkludert. Avtagbar polstring som kan vaskes.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus og som hvileskinne.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Lengde håndledd til fingerspiss
51642	Blå	Ve/Hø	X-Small	14,5-16,5 cm
51642	Blå	Ve/Hø	Small	16,5-18,5 cm
51642	Blå	Ve/Hø	Medium	18,5-20 cm
51642	Blå	Ve/Hø	Large	>20 cm
51643	Ekstra trekk	Ve/Hø	X-Small	
51643	Ekstra trekk	Ve/Hø	Small	
51643	Ekstra trekk	Ve/Hø	Medium	
51643	Ekstra trekk	Ve/Hø	Large	

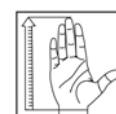

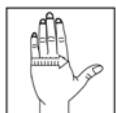


Måltaking: Fra andre til femte MCP ledd.

Jackson hånd- og håndleddsorthose

En forformet hvileortose med lav vekt laget i transparent høytemperaturplast. Skinnen går høyt opp på ulnarsiden og immobiliserer både håndledd og fingre. Kantene er mykt avrundede. Stødige nylonbånd med enkel borrelås er inkludert.

Bruksområde: Immobilisering av håndledd og fingre.

Art.nr.	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP	Lengde
28701	Ve/Hø	Small	8 cm	29 cm
28701	Ve/Hø	Medium	8 cm	32 cm
28701	Ve/Hø	Large	9 cm	33 cm

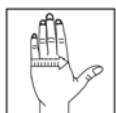


Måltaking: Fra andre til femte MCP ledd.

Forformet hånd- og håndleddsorthose

Ortose som holder hånd og håndledd i funksjonsstilling. Skinnen er laget av lavtemperaturplast 3.2mm Polyform som utmerket kan formes om ved individuell utprøving. Selvklebende bånd som enkelt appliseres på skinnen med varmpistol er inkludert.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP
53231	Hvit	Ve/Hø	Small	6,4-8,8 cm
53231	Hvit	Ve/Hø	Medium	8,9-11,3 cm
53231	Hvit	Ve/Hø	Large	> 11,4 cm

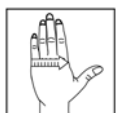

Måltaking: Fra andre til femte MCP ledd.

Forformet anti-spastisitetstortose

Ortose som abdukerer fingre og tommel samt posisjonerer håndleddet og holder hånden i en optimal stilling for å redusere spastisitet. Skinnen er laget av lavtemperaturplast 3.2mm Polyform som utmerket kan formes om ved individuell utprøving. Selvklebende vatterte D-ringsbånd som enkelt appliseres på skinnen med varmpistol er inkludert.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus og som hvileskinne.


Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP
53232	Hvit	Ve/Hø	X-Small	7,6-8,2 cm
53232	Hvit	Ve/Hø	Small	8,3-8,8 cm
53232	Hvit	Ve/Hø	Medium	8,9-10,2 cm
53232	Hvit	Ve/Hø	Large	> 10,2 cm

Forformet hvileortose

Ortose som holder hånd og håndledd i hvilestilling. Skinnen er laget av lavtemperaturplast 3.2 mm Polyform som utmerket kan formes om ved individuell utprøving. Selvklebende bånd som enkelt appliseres på skinnen med varmepistol er inkludert.

Bruksområder: Behandling og korreksjon av kontrakturer og endret tonus, revmatiske sykdommer og som hvileskinne.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Mål 2-5 MCP
53223	Beige	Ve/Hø	Small	<8,9 cm
53223	Beige	Ve/Hø	Medium	9-10,2 cm
53223	Beige	Ve/Hø	Large	>10,2 cm

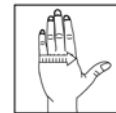

Måltaking: Fra andre til femte MCP ledd.

Håndleddsorthose med glidelås

Frakturortose med glidelås i 2,4 mm Aquaplast-T. Ortosen immobiliserer håndleddet. Skinnen leveres flat og formes individuelt etter oppvarming i vannbad i 70° eller ovn. Glidelåsen gjør at skinnen lett kan tas av for kontroll og den bidrar til god hygiene. Aquaplast-T blir gjennomsiktig ved oppvarming, har 100% minne og slipper igjennom røntgenstråler.

Bruksområder: Immobilisering, posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Modell	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
53221	Hvit	Kort	Bilateral	Small	12,7-15,5 cm
53221	Hvit	Kort	Bilateral	Medium	15,6-18,3 cm
53221	Hvit	Kort	Bilateral	Large	18,4-21 cm
53220	Hvit	Lang	Bilateral	Small	12,7-15,5 cm
53220	Hvit	Lang	Bilateral	Medium	15,6-18,3 cm
53220	Hvit	Lang	Bilateral	Large	18,4-21 cm



Håndledds- og tommelortose med glidelås

Frakturortose med glidelås i 2,4 mm Aquaplast-T. Ortosen immobiliserer håndledd og tommel. Skinnen leveres flat og formes individuelt etter oppvarming i vannbad i 70° eller ovn. Glidelåsen gjør at skinnen lett kan tas av for kontroll og den bidrar til god hygiene. Aquaplast-T blir gjennomsiktig ved oppvarming, har 100% minne og slipper igjennom røntgenstråler.

Bruksområder: Immobilisering, posttraumatisk og postoperativt.

Art.nr.	Farge	Ve/Hø	Størrelse	Omkrets håndledd
53215	Hvit	Bilateral	Small	13-15,8 cm
53215	Hvit	Bilateral	Medium	15,9-18,6 cm
53215	Hvit	Bilateral	Large	18,7-21,3 cm



