



# Arm- och axelortoser

[www.camp.se](http://www.camp.se)



## Armbågs/hälskydd Heelbo™

Elastisk strumpa med tryckavlastande uttagbar gelplatta som skyddar huden på armbågen och förebygger trycksår.

Art.nr.	Färg	Storlek	Omkrets 12 cm ovanför armbåge	Förp.
53600	Gul	Small	15-20 cm	par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	par
53600	Vit	Large	25-30 cm	par
53600	Grön	X-Large	>30 cm	par




## EpiGel epikondylit

Bekväm epikondylitortos med två flyttbara gelkuddar som avlastar genom kompression över extensor- och flexormuskelnerna utan att ge kompression runt underarmen. De mjuka gelkuddarna är stötdämpande. Ortosen har en låg profil. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

**Användningsområden:** Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Art.nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö	Omkrets 5 cm nedanför armbågen
28166	Svart	En storlek	Bilat.	20-35 cm

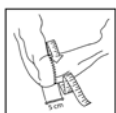


## EpiFoam epikondylit

Epikondylitortos med en foamkudde, som placeras antingen över extensormuskeln för att ge avlastning vid lateral epikondylit eller över flexormuskeln för avlastning vid medial epikondylit. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

**Användningsområden:** Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets 5cm nedanför armbågen
28165	Svart	Bilat.	En storlek	20-35 cm

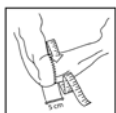


## Elcross Epikondylit

Bandage som ger tryck över muskelbuken för avlastning av muskulatur, senor och senfästen för minskad smärta vid epikondylit. Mjuk pelott på insidan kombinerat med en plastbricka ökar trycket under spännbandet.

**Användningsområde:** Lateral eller medial epikondylit (s.k. tennis- eller golfarmbåge).

Art.nr.	Färg	Storlek	Omkrets 5cm nedanför armbågen
28162	Blå	Small	20-25 cm
28162	Blå	Medium	25-30 cm
28162	Blå	Large	30-35 cm
28162	Blå	X-Large	35-40 cm

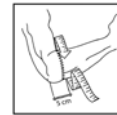


## MFC™ II unilateral skulderortos

Skulderortos som används vid svag skuldermuskulatur efter stroke eller trauma. Ortosen stöder skulderleden, förebygger sublaxation och bibehåller korrekt position av humerus. Extra band på ryggen som drar skuldran tillbaka i korrekt position.

**Användningsområden:** Instabilitet och avlastning.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets överarmens bredaste mått
53213	Svart	Vä/Hö	Small	23-28 cm
53213	Svart	Vä/Hö	Medium	28-33 cm
53213	Svart	Vä/Hö	Large	33-38 cm

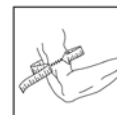

Överarmens bredaste omkretsmått.


## Armslinga Foam

Armslinga med extra band för fixering. Frottémateriell på insidan. Justerbart axelband som fäster var som helst på ortosen.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek
20030	Blå	Bilat.	En storlek



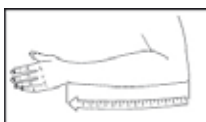


## Armslinga NÄT

Luftig armslinga med steglöst justerbart axelband. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr; stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått
47100	Grå	Bilat.	Small/Medium	27-30 cm
47100	Grå	Bilat.	Large/X-Large	31-34 cm

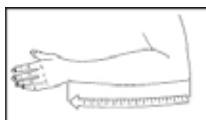

## Armslinga BOMULL

Enkel armslinga av bomull som har steglöst axelband. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått
47101	Grå	Bilat.	Small	25-28 cm
47101	Grå	Bilat.	Medium	27-30 cm
47101	Grå	Bilat.	Large	29-32 cm
47101	Grå	Bilat.	X-Large	31-34 cm



## Armslinga WRAP

Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. Arm-delen har ett plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider ut över axlarna.

Omtaget justeras steglöst med kardborrband.

**Användningsområden:** Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått slinga HxB	Mått omtag HxL
47102	Grå	Bilat.	Small/Medium	32 cm	10 x 132 cm
47102	Grå	Bilat.	Large/X-Large	35 cm	13 x 155 cm

NYHET!



NYHET!



NYHET!



## Armslinga canvas

Armslinga med en extra djup ficka för att säkra armens position och ge stöd för både underarm och hand. Tillverkad av bomullscanvas. Justerbart axelband.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Längd underarm armbåge-MCP
53207	Blå	Bilat.	Small	28 cm
53207	Blå	Bilat.	Medium	36 cm
53207	Blå	Bilat.	Large	43 cm
53207	Blå	Bilat.	X-Large	51 cm



**Måttagning:** Underarmens längd från armbåge till MCP-led.

## Armslinga tvådelad beige

Armslinga i foam med brett avtagbart band för fixering. Två bärande band som fördelar vikten över båda skuldrorna. Justerbara band som fäster var som helst på ortosen. Stort storleksurval.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått slinga HxB	Mått omtag HxL
20040	Beige	Bilat.	Small	23x29 cm	10x80 cm
20040	Beige	Bilat.	Medium	24x32 cm	13x100 cm
20040	Beige	Bilat.	Large	25x35 cm	13x115 cm
20040	Beige	Bilat.	X-Large	25x35 cm	13x135 cm



## Armslinga tvådelad blå

Armslinga i foam med brett avtagbart band för fixering. Två bärande band som fördelar vikten över båda skuldrorna. Krysspänne på ryggen håller banden på plats. Justerbara band som fäster var som helst på ortosen.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått slinga HxB	Mått omtag HxL
20045	Blå	Bilat.	Small/Medium	24x32 cm	10x100 cm
20045	Blå	Bilat.	Large/X-Large	25x35 cm	13x135 cm





## Armslinga Deluxe

Armslinga med brett band för fixering. Två bärande band som korsas på ryggen och fördelar vikten över skulderna. Justerbara band som fäster var som helst på ortosen.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Storlek	Mått slinga HxB	Mått omtag HxL	Förp.
42215	Grå	En storlek	23x33 cm	13x130cm	10 styck



## Armslinga Deluxe fixerbar

Armslinga som är enkel att applicera. Kardborrbandet fäster mot ortosen och den skadade armen kan därmed fästas mot omtaget i önskad höjd. Justerbart axelband.

**Användningsområden:** Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått omtag HxL
42214	Grå	Bilat.	En storlek	16x135 cm



## Armslinga "8"

Lätt och luftig armslinga för avlastning av skuldra, arm och hand. Två breda reglerbara band fördelar vikten över båda skulderna och samlas i en metallring på ryggen. Kan tas på och av med en hand. Lämplig vid neurologiska sjukdomar.

**Användningsområden:** Neurologiska sjukdomar; avlastning, posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek
53200	Beige	Bilat.	Small/Medium
53200	Beige	Bilat.	Large/X-Large

## Armslinga Atlas Minor

Atlas Minor Sling är avsedd att avlasta skuldran efter skuldertrauma och skulderoperationer. Slingan har en avlastande skuldersele för god komfort vid användning under en hel dag. Skulderselen är försedd med ett "Quick release" spänne för enkel påtagning, samt tumstöd för att minska risken för glidning. Hela armslingan omsluts av ett Airmesh-material för maximal ventilation och transport av fukt bort från huden.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt

Art.nr.	Färg	Hö/Vä	Storlek	Längd armbåge-MCP
45717	Svart	Bilat.	En storlek	29-44 cm



NYHET!



## Armslinga Atlas Universal

Armslinga i universalstorlek med en abduktionskudde som håller armen/skuldran immobiliserad i 15° abduktion, avsedd att avlasta skuldran efter skuldertrauma och skulderoperation. Slingan som har en mycket hög komfort är försedd med en skuldersele som avlastar nacken samt ett avtagbart midjeband, båda med ett "Quick release" spänne. Armslingan och abduktionskudden omsluts av ett Airmesh-material för maximal ventilation och transport av fukt bort från huden.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt

Art.nr.	Färg	Hö/Vä	Storlek	Längd armbåge-MCP
45716	Svart	Bilat.	En storlek	29-44 cm



NYHET!



## Slingshot 3

Armslinga som håller armen/skuldran immobiliserad i 15° abduktion med inåtrota-tion. Slingshot 3 har en avlastande skuldersele som fördelar trycket över nacken till motsatt skuldra och skulderblad. Justerbart axelband med extra polstring för avlastning och god komfort vid användning under en hel dag. Ortosen har en "2-in-1" abduktions-kudde som ger olika möjligeter att stödja skulderleden post-operativt. Både armslingan och abduktionskudden omsluts av ett Airmesh-material för maximal ventilation och transport av fukt bort från huden.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Längd armbåge-MCP
45713	Svart	Bilat.	Small	29-33 cm
45713	Svart	Bilat.	Medium	34-37 cm
45713	Svart	Bilat.	Large	38-41 cm
45713	Svart	Bilat.	X-Large	42-44 cm



**Måttagning:** Från armbåge till MCP-lederna.

NYHET!





## Armslinga Neutral Wedge

Armslinga med kilkudde som immobiliserar humerus i neutral position. Justerbart axelband med extra polstring för god komfort.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Storlek	Underarmens längd
45700	Svart	Small/Medium	<37 cm
45700	Svart	Large/X-Large	>37 cm
45705	Kilkudde för användning på natten	Small/Medium	
45705	Kilkudde för användning på natten	Large/X-Large	



## Skulderabduktionskudde

Uppblåsbar kudde som enkelt justerar abduktionsvinkeln i skulderleden mellan 10-75°. När kudden är uppblåst fästes armen mot kudden för immobilisering. Axelband med extra polstring för god komfort.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek
45720	Svart	Bilat.	En storlek




## Frakturortos humerus

Ortosen är tillverkad i polyflex II 3.2 mm lågtemperaturplast polstrad med 3.2 mm kushionflex. Mediala skalet i mjuk polyeten. Ortosen kan omformas med varmluftspistol. D-ringsband medföljer.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets överarm proximalt
53401	Vit	Vä/Hö	Small	25,4-30,5 cm
53401	Vit	Vä/Hö	Medium	30,5-35,6 cm
53401	Vit	Vä/Hö	Large	34,3-39,4 cm

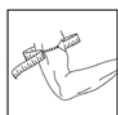


## Frakturortos humerus kort

Tvådelad prefabricerad frakturortos. Tillverkad i polyeten med polstring i det mediala skalet. Två bomullsstrumpor samt D-ringsband medföljer. Röntgengenomsläppligt.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets överarmens bredaste mått	Längd medialt	Längd lateralt
62102	Vit	Bilat.	Small	20-28 cm	14 cm	16 cm
62102	Vit	Bilat.	Medium	27-35 cm	14 cm	16 cm
62102	Vit	Bilat.	Large	30-38 cm	15 cm	17,5 cm
62102	Vit	Bilat.	X-Large	35-42 cm	17,5 cm	20 cm

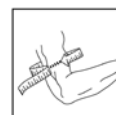


## Frakturortos humerus med axeldel

Tvådelad prefabricerad frakturortos som går upp över axeln. Tillverkad i polyeten med polstring i det mediala skalet. Två bomullsstrumpor samt D-ringsband medföljer. Röntgengenomsläppligt.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets överarmens bredaste mått	Längd
62104	Vit	Bilat.	Small	20-28 cm	27,5 cm
62104	Vit	Bilat.	Medium	27-35 cm	31 cm
62104	Vit	Bilat.	Large	30-38 cm	34 cm
62104	Vit	Bilat.	X-Large	35-42 cm	35 cm

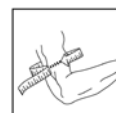


## Humerusortos med blixtlås

Ortos i 2,4 mm perforerad Aquaplast-T™ med blixtlås. Skenan levereras flat och formas individuellt efter uppvärmning i vattenbad eller ugn. Formen tillåter immobilisering av skuldran vid behov. Denna del kan klippas bort. Blixtlåset gör att skenan lätt kan tas av för kontroll och hygien. Aquaplast-T™ blir genomskinlig vid uppvärmning, har 100 % minne och är röntgengenomsläppligt.

**Användningsområden:** Posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets överarm proximalt
53400	Vit	Vä/Hö	Small	21,6-28,2 cm
53400	Vit	Vä/Hö	Medium	28,3-37,1 cm
53400	Vit	Vä/Hö	Large	37,2-45,7 cm

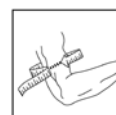



**Måttagning:** Från ortosens ledcenter till yttre kanten av skenorna.

## T-Scope armbåge

Postoperativ armbågs-ortos med mycket låg profil. Den anses vara den postoperativa ortos på marknaden med lägst vikt. Leden går att låsa i önskat läge. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd och omfång justeras steglöst. Aluminiumskenor kan skränkas så att ortosen uppnår god passform. Patienten tar av och på ortosen med enkla snabbspännen. Polstring och band kan trimmas så att de passar olika armstorlekar.

**Användningsområden:** Stabila frakturer i armbågen, distala humerus, proximala radius eller ulna. Senor och ligamentskador. Kollateralligament rekonstruktioner. Hyperextension.

**Övrigt:** Rörelseintervall: Extension från -10° till 110° i intervall om 10°. Flexion från 10° till 120° i intervall om 10°. Går att låsa i önskat läge.

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Skenans min-max längd humerus	Skenans min -max längd underarm
45725	Standard	Vä/Hö	16,5-21,5 cm	19-24,1 cm
45726	Lång	Vä/Hö	16,5-21,5 cm	24,1-29,2 cm
45727	Extra polstring 4+1			



## T-Scope armbåge handdel

Bekväm handdel till "T-Scope armbåge" som utökar funktionen av produkten. Handdelen är avsedd att reducera flexion/extension och pronation/supination av handen och handleden. Handdelen ansluts till T-Scope armbåge närmast handen med en enkel snabbkoppling.

**Användningsområden:** Armbågsskador inklusive sen- och ligamentskador.

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö
45723	Universal	Bilat.