



Hand- och handledsortoser

www.camp.se



SOF-Stretch dynamisk fingerortos kort

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem. Den korta designen tillåter full rörlighet i MCP-lederna.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Art.nr.	Färg	Storlek	Mått volart mellan MCP-leden och DIP-leden
51405	Vit	X-Small	3,8 cm
51405	Vit	Small	4,4 cm
51405	Vit	Medium	5,1 cm
51405	Vit	Large	5,7 cm
51405	Vit	X-Large	7 cm



SOF-Stretch dynamisk fingerortos

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.


Art.nr.	Färg	Storlek	Mått volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden
51400	Vit	X-Small	5,1 cm
51400	Vit	Small	6,4 cm
51400	Vit	Medium	7,6 cm
51400	Vit	Large	8,9 cm
51400	Vit	X-Large	10,2 cm
51401	Svart	X-Small	5,1 cm
51401	Svart	Small	6,4 cm
51401	Svart	Medium	7,6 cm
51401	Svart	Large	8,9 cm
51401	Svart	X-Large	10,2 cm

SOF-Stretch dynamisk spiralortos

Extensionsskena (Capener) som ger dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Spiralfjädrarna är placerade på bägge sidor om PIP-leden för att ge samma motstånd i alla positioner. De kan lossas eller spännas till önskat motstånd. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden. Lämplig till kontrakturer upp till 45°. Ej för rigida kontrakturer.

Art.nr.	Färg	Storlek	Mått volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden
51410	Vit	Small	6,4 cm
51410	Vit	Medium	7 cm
51410	Vit	Large	7,6 cm
51410	Vit	X-Large	8,3 cm

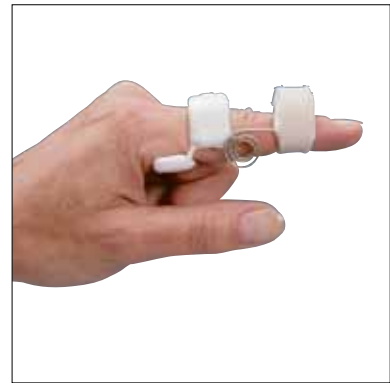

Stax fingerhylsa

Immobiliserar DIP-leden i extension och tillåter samtidigt full rörlighet i PIP-leden. Används normalt utan polstring och fixeras mot mellersta falangen med självhäftande band (medföljer inte).

Art.nr.	Storlek	Längd	Diameter	Förp.
51421	1	5,3 cm	1,5 cm	12 styck
51421	2	5,1 cm	1,7 cm	12 styck
51421	3	5,8 cm	1,9 cm	12 styck
51421	4	6,3 cm	1,9 cm	12 styck
51421	5	5,8 cm	1,9 cm	12 styck
51421	5,5	6,1 cm	2,3 cm	12 styck
51421	6	6,4 cm	2,3 cm	12 styck
51421	7	6,2 cm	2,5 cm	12 styck
51420	30 fingerskenor i varierande storlek i plastbox			30 styck



Buddy strap

Tvillingförband som stadigt håller 2 fingrar tillsammans. Kardborrbandet kan lätt klippas till önskad storlek.

Art.nr.	Storlek	Bredd	Längd	Förp.
51430	En storlek	1,3 cm	12,7 cm	5 styck



Selection tumortos Soft



Smidig och elastisk tumortos som avlastar tummens leder och ger ett lätt stöd. Selection tumortos Soft är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig CMC-I artros.

Art.no.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	Small	< 15 cm
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35200	Svart	Soft	Vä/Hö	Large	> 17 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	Small	< 15 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35201	Beige	Soft	Vä/Hö	Large	> 17 cm



Selection tumortos Rigid

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. Selection tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-I artros.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	Small	< 15 cm
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35202	Svart	Rigid	Vä/Hö	Large	> 17 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	Small	< 15 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	Medium	15 - 17 cm
35203	Beige	Rigid	Vä/Hö	Large	> 17 cm

Tumortos kort och lång

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder: Den långa modellen ger ett lätt stöd för handleden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28548	Beige	Kort	Vä/Hö	Small	<17 cm
28548	Beige	Kort	Vä/Hö	Large	>17cm
28558	Blå	Kort	Vä/Hö	Small	<17 cm
28558	Blå	Kort	Vä/Hö	Large	>17 cm
28549	Beige	Lång	Vä/Hö	En storlek	
28559	Blå	Lång	Vä/Hö	En storlek	



Basic tumortos kort och lång

Ortos med plastskenor som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Materialet är klippt på skrodden för bästa passform och elasticitet. Öppet justerbart tumgrepp. Den långa modellen är 2 cm längre och ger stöd även för handleden. Kan kombineras med handledsband 27447 eller 27448 för extra stabilitet.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
27443	Blå	Kort	Vä/Hö	X-Small	<12 cm
27443	Blå	Kort	Vä/Hö	Small	11-14 cm
27443	Blå	Kort	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
27443	Blå	Kort	Vä/Hö	Large	17-20 cm
27443	Blå	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm
27444	Blå	Lång	Vä/Hö	X-Small	<12 cm
27444	Blå	Lång	Vä/Hö	Small	11-14 cm
27444	Blå	Lång	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
27444	Blå	Lång	Vä/Hö	Large	17-20 cm
27444	Blå	Lång	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm





Tee Pee™ tumortos

Tumortos med tre formbara aluminiumskenor; centralt, dorsalt och palmart. Ortosen ger ett stabilt stöd för tummen. Tillverkad av perforerad luftig mockaimitation samt foder som andas.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Längd från handled till tummens IP-led
28560	Svart	Bilat.	X-Small	<9 cm
28560	Svart	Bilat.	Small	9-10 cm
28560	Svart	Bilat.	Medium	10-11,5 cm
28560	Svart	Bilat.	Large	11,5-13 cm
28560	Svart	Bilat.	X-Large	>13 cm



CMC tumortos

Denna tumbasortos är avsedd att stödja CMC-leden vid instabilitet och förslutnings-skador. Den polstrade inre skenan i kombination med ett yttre elastiskt förslutningsband ger kompression av tumbasen och hjälper därmed till att stabilisera CMC-leden.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28561	Svart	Vä/Hö	X-Small	<14 cm
28561	Svart	Vä/Hö	Small	14-15,5 cm
28561	Svart	Vä/Hö	Medium	15,5-17,5 cm
28561	Svart	Vä/Hö	Large	17,5-19,5 cm
28561	Svart	Vä/Hö	X-Large	>19,5



Sporlastic tumortos

Stabil tumortos framställd av plastmaterial för immobilisering av tummen i funktionställning. Påsytt kardborrband ger en flexibel förslutning. Stockinette i high-tech fiber som suger upp fukt och ger mjuk polstringseffekt medföljer.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt och vid instabilitet.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28545	Beige	Vä/Hö	Small	<17 cm
28545	Beige	Vä/Hö	Medium	17-19 cm
28545	Beige	Vä/Hö	Large	>19 cm



Selection handledsortos Soft

Smidig, elastisk handledsortos tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Selection Soft har en formad plasticskena på volarsidan och en mjukare rak plasticskena på dorsalsidan. Skenorna är urtagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Denna modell är 17 cm lång.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35204	Svart	Soft	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35204	Svart	Soft	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35204	Svart	Soft	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35204	Svart	Soft	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm



Selection handledsortos Rigid

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Tumdelen ger genom sitt stabilare material ett bra stöd och håller tummen i neutraläge. Selection Rigid har en formad plast skena på volarsidan och en mjukare rak plasticskena på dorsalsidan. Skenorna är urtagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Denna modell är 17 cm lång.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
35206	Svart	Rigid	Vä/Hö	Small	11 - 14 cm
35206	Svart	Rigid	Vä/Hö	Medium	14 - 17 cm
35206	Svart	Rigid	Vä/Hö	Large	17 - 20 cm
35206	Svart	Rigid	Vä/Hö	X-Large	20 - 23 cm



CS-skena

Volar plasticskena med hårdhetsgrad "Medium" som passar de flesta handledsortoser. Skenan håller handleden i funktionsläge. Formen tillåter maximal rörlighet av thenarmuskulaturen.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått	Förp.
35210	Blå	Bilat.	En storlek	22x168 mm	10





Basic Extra band

Separata elastiska band i två bredder till Basic handledsortoser modell 27441, 27442 och tumortoser modell 27443 och 27444.

Art.nr.	Färg	Storlek	Bredd
27447	Blå	Small	5 cm
27448	Blå	Large	7,5 cm



Basic handledsortos kort och lång

Enkel handledsortos i kort och lång modell med kardborrlåsning som ger bra stöd och kompression. Öppna modeller som är lätta att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval. Kort modell kan kompletteras med extra band 27447 eller 27448 för extra stabilitet. Den långa modellen har ett monterat elastiskt band runt handleden.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
27441	Blå	Kort	Vä/Hö	X-Small	<12 cm
27441	Blå	Kort	Vä/Hö	Small	11-14 cm
27441	Blå	Kort	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
27441	Blå	Kort	Vä/Hö	Large	17-20 cm
27441	Blå	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm
27445	Blå	Lång	Vä/Hö	X-Small	<12 cm
27445	Blå	Lång	Vä/Hö	Small	11-14 cm
27445	Blå	Lång	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
27445	Blå	Lång	Vä/Hö	Large	17-20 cm
27445	Blå	Lång	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm



Basic handledsortos

Handledsortos med integrerat band som ger ett extra bra stöd för handleden. Det breda proximala bandet med stor förslutningsyta ger flexibilitet vid storleksval och underlättar vid på- och avtagning. Öppen modell som gör ortosen lätt att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Högt skuren vid lillfingersidan för ulnart stöd.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
27446	Blå	Vä/Hö	X-Small	<12 cm
27446	Blå	Vä/Hö	Small	11-14 cm
27446	Blå	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
27446	Blå	Vä/Hö	Large	17-20 cm
27446	Blå	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm

Lätta handledsortos

Handledsstöd i neoprene som ger värme och stöd till handleden. Fästs över tummen för att hållas på plats.

Kan klippas till önskad passform.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar och avlastning.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek
28230	Blå	Bilat.	En storlek



Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plastskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plastskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområde: Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28240	Blå	Vä/Hö	Small	11-14 cm
28240	Blå	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
28240	Blå	Vä/Hö	Large	17-20 cm
28240	Blå	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm



Elcross® Carpus Flexi handledsortos

En av de mest populära ortoserna till reumatiker. Ortosen är fodrad med bomull som är behaglig mot huden. Snörsystemet underlättar vid förslutning och justering. Lämpar sig väl till patienter med svag handfunktion. Passformen är flexibel och passar både en bred och smal underarm. Uttagbar och formbar aluminiumskena.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar och avlastning.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28149	Blå	Vä/Hö	Small	11-14 cm
28149	Blå	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
28149	Blå	Vä/Hö	Large	17-20 cm
28149	Blå	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm
28144	Beige	Vä/Hö	Small	11-14 cm
28144	Beige	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
28144	Beige	Vä/Hö	Large	17-20 cm
28144	Beige	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm



Bisca® handledsortos

Modellen är speciellt lämplig för reumatiker. Ortosen är fodrad med bomullsmaterial som är behagligt mot huden. Det integrerade bandet i kombination med den uttagbara och formbara aluminiumskenan ger ett bra stöd.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar och avlastning



Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28042	Blå	Vä/Hö	Small	11-14 cm
28042	Blå	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
28042	Blå	Vä/Hö	Large	17-20cm

D-ring handledsortos

En oelastisk, polstrad handledsortos med formbar aluminiumskena volart som försluts med D-ring. Den tjocka polstringen är bekväm och lämplig för känsliga patienter. Ortosen är bomullsfodrad och finns i två färger samt i en extra slitstark "Work-Hard" version i svart skinn.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.



Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
53225	Svart Skinn	Vä/Hö	X-Small	<14,6 cm
53225	Svart Skinn	Vä/Hö	Small	14,6-16,5 cm
53225	Svart Skinn	Vä/Hö	Medium	16,6-19,1 cm
53225	Svart Skinn	Vä/Hö	Large	19,2-21,6 cm
53225	Svart Skinn	Vä/Hö	X-Large	>21,6 cm

Wrist Lacer™ handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Ortosen ger även ett ulnart stöd. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Justerbart tumgrepp. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Volar polstring vid skenan för extra komfort. Finns i två färger.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Denna modell är 20 cm lång.



Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28570	Beige	Kort	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm
28570	Beige	Kort	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28570	Beige	Kort	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28570	Beige	Kort	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28570	Beige	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm
28571	Svart	Kort	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm
28571	Svart	Kort	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28571	Svart	Kort	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28571	Svart	Kort	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28571	Svart	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm

Wrist Lacer™ handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Ortosen ger även ett ulnart stöd. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Justerbart tumgrepp. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Volar polstring vid skenan för extra komfort. Finns i två färger.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Denna modell är 26 cm lång.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28572	Beige	Lång	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28572	Beige	Lång	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28572	Beige	Lång	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28572	Beige	Lång	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm
28573	Svart	Lång	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28573	Svart	Lång	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28573	Svart	Lång	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28573	Svart	Lång	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm



V-Strap™ handledsortos, kort

Påminner om Wrist Lacer men skiljer sig i förslutningssystem och passform. Kan även beställas i barnstorlek (kort modell). Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade låsningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Denna modell är 20 cm lång.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28574	Svart	Kort	Vä/Hö	XX-Small	<12 cm
28574	Svart	Kort	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm
28574	Svart	Kort	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28574	Svart	Kort	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28574	Svart	Kort	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28574	Svart	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm
28574	Svart	Kort	Vä/Hö	XX-Large	22-25 cm





Tripod™ Wrist Lacer

En mycket stabil handledsortos med samma goda komfort och funktionella egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbara aluminiumskenor placerade ulnart, palmart och dorsalt. Dessa skenor samverkar för att hindra radial-ulnar deviation och minimera flexion-extension av handleden. Den ulnara skenan tillsammans med det dubbla snörningssystemet motverkar radial-ulnar deviation. Precis som Wrist Lacer tillåter Tripod en fullt rörlig tumme. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, radial/ulnardeviation, karpaltunnelsyndrom, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28577	Svart	Kort	Vä/Hö	X-Small	12-14 cm
28577	Svart	Kort	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28577	Svart	Kort	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28577	Svart	Kort	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28577	Svart	Kort	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm



V-Strap™ handledsortos, lång

Påminner om Wrist Lacer med skiller sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade förslutningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Denna modell är 26 cm lång.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28575	Svart	Lång	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28575	Svart	Lång	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28575	Svart	Lång	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28575	Svart	Lång	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm



CTS handledsortos

Nattortos av tunn, perforerad Kydexplast som immobiliserar handleden. Avsedd för patienter med karpaltunnelsyndrom med nattliga domningar och svullnader i händerna.

Användningsområde: Karpaltunnelsyndrom

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handflata	Omkrets underarm
28542	Ljusblå	Vä/Hö	Small	<20 cm	<23 cm
28542	Ljusblå	Vä/Hö	Large	>20 cm	>23 cm
25030	Extra band	19 mm			
25030	Extra band	25 mm			
25030	Extra band	50 mm			

Basic handledsortos med tumme

Unikt designad handledsortos som stödjer tummen utan att bli otymplig. Tumdelen är delvis fristående för att följa thenarmuskulaturen och säkra en god passform. Tummen hålls i neutralläge vid vila. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Tummens skena i flexibel plast löper längs hela ortosen för extra stabilitet. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Basic Extra Band, som visas på bilden, kan köpas separat (sid.12 i katalogen).

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
27442	Blå	Vä/Hö	X-Small	<12 cm
27442	Blå	Vä/Hö	Small	11-14 cm
27442	Blå	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
27442	Blå	Vä/Hö	Large	17-20 cm
27442	Blå	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm



D-ring handleds- och tumortos

En oelastisk, polstrad handleds- och tumortos med formbara aluminiumskenor för tumme och handled som försluts med D-ring. Ortosen är bomullsfodrad och den tjocka polstringen är bekväm och gör ortosen lämplig för känsliga patienter.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
53219	Beige	Vä/Hö	X-Small	<14,6 cm
53219	Beige	Vä/Hö	Small	14,6-16,5 cm
53219	Beige	Vä/Hö	Medium	16,6-19,1 cm
53219	Beige	Vä/Hö	Large	19,2-21,6
53219	Beige	Vä/Hö	X-Large	>21,6 cm



Ryno Lacer® handledsortos

Mycket stabil handleds- och tumortos med formbara aluminiumskenor dorsalt, volart och radially. Den radially tummskenan löper i hela skenans längd och immobiliserar tummen effektivt. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområden: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28576	Svart	Vä/Hö	X-Small	<14 cm
28576	Svart	Vä/Hö	Small	14-16 cm
28576	Svart	Vä/Hö	Medium	16-18 cm
28576	Svart	Vä/Hö	Large	18-20 cm
28576	Svart	Vä/Hö	X-Large	20-22 cm



Denna modell är 22 cm lång.



Måttagning: Omkrets runt MCP-lederna.

Thermoskin artroshandske

Handske som ger värme för smärtlindring. Yttermaterial av "nonslip" ger ett säkert grepp. Det patenterade Trioxon® materialet stimulerar huden att producera värme, transporterar fukt från huden och tillåter den att andas. Det är kliniskt påvisat att handsken ökar temperaturen på huden och subkutant med ca 2°, vilket förbättrar elasticiteten i muskler, senor och ligament.

Användningsområde: Reumatologiska sjukdomar.

Art.nr.	Färg	Storlek	Omkrets runt MCP-lederna	Förp.
53234	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53234	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53234	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53234	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53234	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53234	Svart	XX-Large	>30 cm	1 par



Gropa handledsortos

Ortosen ger effektivt stöd för handleden vid tunga eller monotona arbetsmoment. Ett kraftigt resårband stöder handleden. "Tuff Grip" inne i handflatan säkrar ett bra grepp om olika verktyg. Framtagen tillsammans med montörer inom verkstadsindustrin

Användningsområden: Avlastning för handflatan samt handleden, preventivt vid t.ex. monteringsarbeten

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28210	Blå	Vä/Hö	Small	11-14 cm
28210	Blå	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
28210	Blå	Vä/Hö	Large	17-20 cm
28210	Blå	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm



Combi handledsortos

Handske som ger stöd till handleden och skyddar handflatan. Handskens volara sida består av specialbehandlat greppvänligt getskinn som polstrats med Kevlar, vilket skyddar mot värme och vassa föremål. Handleden stöds av ett kraftigt resårband. Gjord för tuffa miljöer.

Användningsområden: Avlastning för handflatan samt handleden. Preventivt vid t.ex. monteringsarbeten.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
28220	Blå	Vä/Hö	Small	11-14 cm
28220	Blå	Vä/Hö	Medium	14-17 cm
28220	Blå	Vä/Hö	Large	17-20 cm
28220	Blå	Vä/Hö	X-Large	20-23 cm
28220	Blå	Vä/Hö	XX-Large	23-26 cm

Ergospoon skena

Volar plastskena som passar de flesta handledsortoser. Finns i 3 olika hårdhetsgrader. Håller handleden i aktiv vinkel. Formen tillåter maximal rörlighet av thenarmuskulaturen.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Förp.
27340	Gul	Soft	Vä/Hö	10 styck
27340	Grön	Medium	Vä/Hö	10 styck
27340	Röd	Rigid	Vä/Hö	10 styck



Fingerkontrakturkudde

Mjuk, polyesterfylld fingerseparator som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Klädd med frottématerial som suger upp fukt.

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått	Förp.
51616	Blå	Bilat.	Medium	7,6 x 12,7 cm	3 styck
51616	Blå	Bilat.	Large	10 x 12,7 cm	3 styck



Handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer.

Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Förp.
51600	Vit/Beige	Vä/Hö	En storlek	1 styck
51601	Vit/Beige	Vä/Hö	En storlek	3 styck



Handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Materialet mellan fingrarna ger en lätt abduktion. Kan öppnas helt för enkel påtagning.

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek
51605	Vit/Beige	Vä/Hö	En storlek





Sof-Gel™ handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt handflatsskydd med tryckavlastande gel som skyddar handflatan och huden mellan fingrarna. Den breda volara delen skyddar tummen.

Användningsområde: Framskridna kontrakturer.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek
51615	Beige	Vä/Hö	En storlek



Carve-It™ handpositioneringsortos

Ortos som hjälper till att hålla handen med mild till moderat fingerspasticitet i en funktionell position. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i handen finns en anatomiskt formad skumdel som bevarar handflatans valv. En flat undersida gör den enkelt att positionera i sängen etc. Kan klippas till önskad form. Universal användning till både vänster och höger hand.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus.

Övrigt: Avtagbart överdrag som kan handtvättas och lufttorkas.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått 2-5 MCP
51650	Vit	Bilat.	Small/Medium	<7,6 cm
51650	Vit	Bilat.	Large/X-Large	>7,6 cm
51651	Extra överdrag		Small/Medium	
51651	Extra överdrag		Large/X-Large	



Kwik-Form™ progressiv handledsortos

Ortos med fast skena och avtagbar polstring. Kan justeras utan verktyg. Stöder hand- och handled. Tre handrullar i olika storlekar ingår för progressiv behandling av flexionskontrakturer i handen.

Användningsområden: Behandling och korrektion av framskridna kontrakturer och ändrad tonus.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
51630	Klarblå	Bilat.	Small/Medium	<18 cm
51630	Klarblå	Bilat.	Medium/Large	>18 cm
51631	Extra överdrag		Small/Medium	
51631	Extra överdrag		Medium/Large	



Kwik-Form™ viloortos

Ortos som kan justeras till önskad position utan verktyg. Kardborrbanden fäster direkt mot ortosens mjuka klädsel. Stöder tumme, hand- och handled.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, viloskena.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
51638	Klarblå	Vä/Hö	Small/Medium	<18 cm
51638	Klarblå	Vä/Hö	Medium/Large	>18 cm



TheraPlus™ Universal hand- och handledsortos

Ortos av aluminium med avtagbar polstring. Kan justeras utan verktyg. Finns i två olika modeller med olika rigiditet som stöder hand- och handled. Den stabila modellen väljs till patienter med förhöjd tonus. Avtagbara fingerdelare för positionering av fingrarna och skydd av huden medföljer.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, viloskena.

Art.nr.	Färg	Hårdhet	Vä/Hö	Storlek	Längd handled till fingerspets
51640	Blå	Medium	Bilat.	Small	16,5 cm
51640	Blå	Medium	Bilat.	Medium	18 cm
51640	Blå	Stabil	Bilat.	Medium	18 cm
51640	Blå	Stabil	Bilat.	Large	>23 cm
51641	Extra överdrag			Small	
51641	Extra överdrag			Medium	
51641	Extra överdrag			Large	




Lynx WHFO™ Deluxe hand- och handledsortos

Ortos av aluminium med avtagbar polstring. Kan justeras utan verktyg. Stöder tumme, hand- och handled. Tummen hålls på plats av en medial och lateral support. Avtagbara fingerdelare för positionering av fingrar och skydd av huden medföljer. Avtagbar och tvättbar polstring.


Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, viloskena.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Längd handled till fingerspets
51642	Blå	Vä/Hö	X-Small	14,5-16,5 cm
51642	Blå	Vä/Hö	Small	16,5-18,5 cm
51642	Blå	Vä/Hö	Medium	18,5-20 cm
51642	Blå	Vä/Hö	Large	>20 cm
51643	Extra överdrag	Vä/Hö	X-Small	
51643	Extra överdrag	Vä/Hö	Small	
51643	Extra överdrag	Vä/Hö	Medium	
51643	Extra överdrag	Vä/Hö	Large	

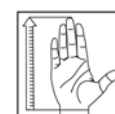

Jackson hand- och handledsortos

Viloortos med låg vikt tillverkad av transparent högtemperaturplast. Skenan går högt upp på ulnarsidan och immobiliserar både handled och fingrar. Kanterna är mjukt rundade. Stadiga nylonband med enkel kardborrförslutning medföljer.

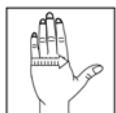


Användningsområde: Immobilisering av handled och fingrar.

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Mått 2-5 MCP	Längd
28701	Vä/Hö	Small	8 cm	29 cm
28701	Vä/Hö	Medium	8 cm	32 cm
28701	Vä/Hö	Large	9 cm	33 cm

Förformad hand- och handledsortos

Ortos som håller hand och handled i funktionsställning. Skenan är tillverkad av lågtemperaturplast, 3.2 mm Polyform™, som går utmärkt att omforma vid individuell utprovning. Självhäftande band medföljer som lämpligast monteras med värmepistol.

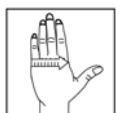


Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått 2-5 MCP
53231	Vit	Vä/Hö	Small	6,4-8,8 cm
53231	Vit	Vä/Hö	Medium	8,9-11,3 cm
53231	Vit	Vä/Hö	Large	>11,4 cm

Förformad anti-spasticitetsortos

Ortos som abducerar fingrar och tumme samt positionerar handleden och håller handen i en optimal ställning för att reducera spasticitet. Skenan är tillverkad av lågtemperaturplast, 3.2 mm Polyform™, som går utmärkt att omforma vid individuell utprovning. Självhäftande vadderade D-ringsband medföljer som lämpligast monteras på skenan med värmepistol.

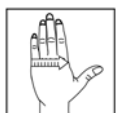

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, viloskena.


Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått 2-5 MCP
53232	Vit	Vä/Hö	X-Small	7,6-8,2 cm
53232	Vit	Vä/Hö	Small	8,3-8,8 cm
53232	Vit	Vä/Hö	Medium	8,9-10,2 cm
53232	Vit	Vä/Hö	Large	>10,2 cm

Förformad vilootos

Ortos som håller hand- och handled i viloställning. Skenan är tillverkad av lågtemperaturplast 3.2 mm Polyform™ som går utmärkt att omforma vid individuell utprovning. Självhäftande band medföljer som lämpligast monteras på skenan med värmepistol.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, reumatiska sjukdomar, viloskena.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått 2-5 MCP
53223	Beige	Vä/Hö	Small	<8,9 cm
53223	Beige	Vä/Hö	Medium	9-10,2 cm
53223	Beige	Vä/Hö	Large	>10,2 cm

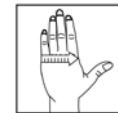

Handledsortos med blixtlås

Frakturortos med blixtlås i 2,4 mm Aquaplast-T™ som immobiliserar handleden. Skenan levereras flat och formas individuellt efter uppvärmning i vattenbad 70° eller ugn. Blixtlåset gör att skenan lätt kan tas av för kontroll och god hygien. Aquaplast-T™ blir genomskinligt vid uppvärmning, har 100 % minne och är röntgenomsläppligt.

Användningsområden: Immobilisering, posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
53221	Vit	Kort	Bilat.	Small	12,7-15,5 cm
53221	Vit	Kort	Bilat.	Medium	15,6-18,3 cm
53221	Vit	Kort	Bilat.	Large	18,4-21 cm
53220	Vit	Lång	Bilat.	Small	12,7-15,5 cm
53220	Vit	Lång	Bilat.	Medium	15,6-18,3 cm
53220	Vit	Lång	Bilat.	Large	18,4-21 cm



Handled- och tumortos med blixtlås

Frakturortos med blixtlås i 2,4 mm Aquaplast-T™ som immobiliserar handled och tumme. Skenan levereras flat och formas individuellt efter uppvärmning i vattenbad 70° eller ugn. Blixtlåsen gör att skenan lätt kan tas av för kontroll och god hygien. Aquaplast-T blir genomskinligt vid uppvärmning, har 100 % minne och är röntgenomsläppligt.

Användningsområden: Immobilisering, posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Omkrets handled
53215	Vit	Bilat.	Small	13-15,8 cm
53215	Vit	Bilat.	Medium	15,9-18,6 cm
53215	Vit	Bilat.	Large	18,7-21,3 cm



